

Bruksanvisning

Accu-Chek® Insight-diabetesbehandlingssystem



Innhold

1	Oversikt	1	5	Blodsuktermåling	47
1.1	Forstå hva som er forskjellig når apparatet er koblet med pumpen	4	5.1	Utføre en blodsuktermåling	47
1.2	Hjem	5	5.2	Legge til informasjon for et blodsukkerresultat	52
2	Oppstart	9	5.3	Tilføre en bolus uten bolusråd	55
2.1	Lade batteriet	9	6	Administrere boluser	69
2.2	Konfigurasjonsveiviser	14	6.1	Programmere og tilføre en standardbolus	70
2.3	Fullføre konfigurasjonsveiviseren	16	6.2	Programmere og tilføre en utvidet bolus	72
2.4	Viktig informasjon	22	6.3	Programmere og tilføre en flerbølgebolus	74
3	Kommunikasjon mellom apparatet og pumpen	31	6.4	Programmere og tilføre en egendefinert bolus	76
3.1	Koble apparatet og pumpen	31	6.5	Slette en egendefinert bolus	80
3.2	Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen	38	6.6	Avbryte en bolus	82
4	Kontrollere pumpen med apparatet	41	6.7	Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd	86
4.1	Tilgang til pumpemenyen	42	7	Midlertidig basaldose	93
4.2	Forstå pumpemenyskjerm bildene på apparatet	43	7.1	Programmere en primær midlertidig basaldose (MBD)	93
4.3	Stoppe pumpen	45	7.2	Programmere eller redigere en egendefinert midlertidig basaldose	95
4.4	Starte pumpen	46	7.3	Avbryte en aktivert midlertidig basaldose	98
			7.4	Slette en egendefinert midlertidig basaldose	100
			7.5	Mer informasjon om funksjonen for midlertidig basaldose	102

8	Basalprofiler	103	11	Mine data	153
8.1	Programmere en basalprofil	103	11.1	Oversikt	153
8.2	Aktivere en basalprofil	107	11.2	Loggboken	154
8.3	Fjerne en basalprofil	109	11.3	Trendgrafen	170
			11.4	Standard uke	176
			11.5	Standard dag	182
			11.6	Måldata	188
			11.7	Tabellen Blodsukkergjennomsnitt	193
9	Bruke modi	111	12	Teknisk informasjon	199
9.1	Endre pumpens signalmodus	111	12.1	Symbolforklaring	200
9.2	Slå på flymodus	113	12.2	Liste over ikoner	201
9.3	Slå av flymodus	114	13	Feilsøking	205
10	Pumpeinnstillinger	115	14	Ordliste	209
10.1	Pumpepåminnelser	116		Stikkordregister	223
10.2	Behandlingsinnstillinger	127			
10.3	Enhetsinnstillinger	141			
10.4	Stille inn pumpens dato og klokkeslett	150			

1 Oversikt

Med Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller (heretter kalt "apparatet") kan du fjernstyre Accu-Chek Insight-insulinpumpen ved å bruke trådløs *Bluetooth®*-teknologi.

Hvis du opplever kommunikasjonsproblemer mellom pumpen og apparatet, må du bruke pumpen manuelt.

Med apparatet kan du fjernstyre følgende pumpefunksjoner:

- ▶ Tilføre boluser
- ▶ Stille inn basaldoser
- ▶ Starte og stoppe pumpen
- ▶ Endre pumpemodus
- ▶ Endre pumpeinnstillinger
- ▶ Stille inn pumpepåminnelser

Med apparatet kan du ikke fjernstyre følgende pumpefunksjoner:

- ▶ Bytte ampulle
- ▶ Fylle infusjonssettet
- ▶ Spole tilbake stempelstangen
- ▶ Kontrollere innstillingene innenfor menyen for trådløs Bluetooth-teknologi på pumpen
- ▶ Endre pumpeskjerminnstillinger
- ▶ Velge brukerprofiler

MERK

- ▶ Når apparatet og pumpen er tilkoblet, kan du fortsatt programmere og tilføre en bolus manuelt med pumpen uten å bruke apparatets kommandoer.
- ▶ Når apparatet og pumpen er tilkoblet, overfører pumpen automatisk bolusinformasjon til apparatet.
- ▶ Hvis bolusråd er innstilt, er det viktig at du angir informasjon om karbohydrater og/eller helsehendelser i apparatet for boluser som er tilført manuelt på pumpen, slik at fremtidige bolusrådanbefalinger blir nøyaktige.
- ▶ Pumpeskjermen må være av for at apparatet skal kunne koble til pumpen.
- ▶ Hvis du låser opp tastene på pumpen mens Bluetooth-kommunikasjon er aktivert, spør pumpen om du vil koble fra Bluetooth-forbindelsen. Velg "Nei" for å beholde Bluetooth-forbindelsen og fortsette å bruke pumpen via apparatet. Velg "Ja" for å koble fra forbindelsen og bruke pumpen via pumpeskjermen.
- ▶ Du kan avbryte en bolus som tilføres av pumpen, enten ved å bruke pumpen manuelt, eller via pumpemenyen på apparatet.



MERK

- ▶ Apparatet og pumpen kan kommunisere innenfor et område på 2 meter.
- ▶ Når apparatet og pumpen kommuniserer, viser apparatet vedlikeholdsskjermbilder som ellers ville vises på pumpen. Når et skjermbilde for pumpevedlikehold vises på apparatet, trykker du OK for å kvittere og avvise meldingen. Du må fremdeles treffe tiltakene som anbefales av vedlikeholdsmeldingen.



1.1 Forstå hva som er forskjellig når apparatet er koblet med pumpen


Hvis du har brukt apparatet eller pumpen alene før de ble koblet, må du være oppmerksom på at det koblede systemet fungerer annerledes. Forskjellene er følgende:

- ▶ Bolusråd kan brukes for å tilføre anbefalt bolus straks.
- ▶ Når apparatet beregner bolusråd, hentes maksimal bolusverdi fra pumpeinnstillingene.
- ▶ Boluser kan justeres med mye mindre mengder. For boluser på 10 enheter eller mer er insulintrinnet 0,1 U. For boluser på mindre enn 10 enheter er insulintrinnet 0,05 U. Dette gjelder også for bolusinformasjon som legges inn manuelt i nye loggbokoppføringer.
- ▶ Siden innstillinger for insulintrinn og maksimal bolus hentes fra pumpen, er ikke disse innstillingene tilgjengelige i menyen for apparatinnstillinger.
- ▶ **Basal** vises på [Pumpemeny](#) og ikke på skjermbildet [Bolusinformasjon](#) eller [Detaljert BS-resultat](#).
- ▶ Påminnelsen Basal injeksjon er ikke lenger tilgjengelig.
- ▶ **Basal** vises ikke lenger hvis du registrerer oppføringer i loggboken manuelt.

1.2 Hjem

Hjem-skjermbildet viser til skjermbildet som vises når apparatet slås på. Hjem kan være enten hovedmenyen eller statusskjermbildet. Hvis du vil endre standard Hjem-skjermbilde, se avsnittet **Standard Hjem-skjermbilde** i kapitlet **Endre apparatinnstillinger i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.

1.2.1 Hovedmenyskjerm

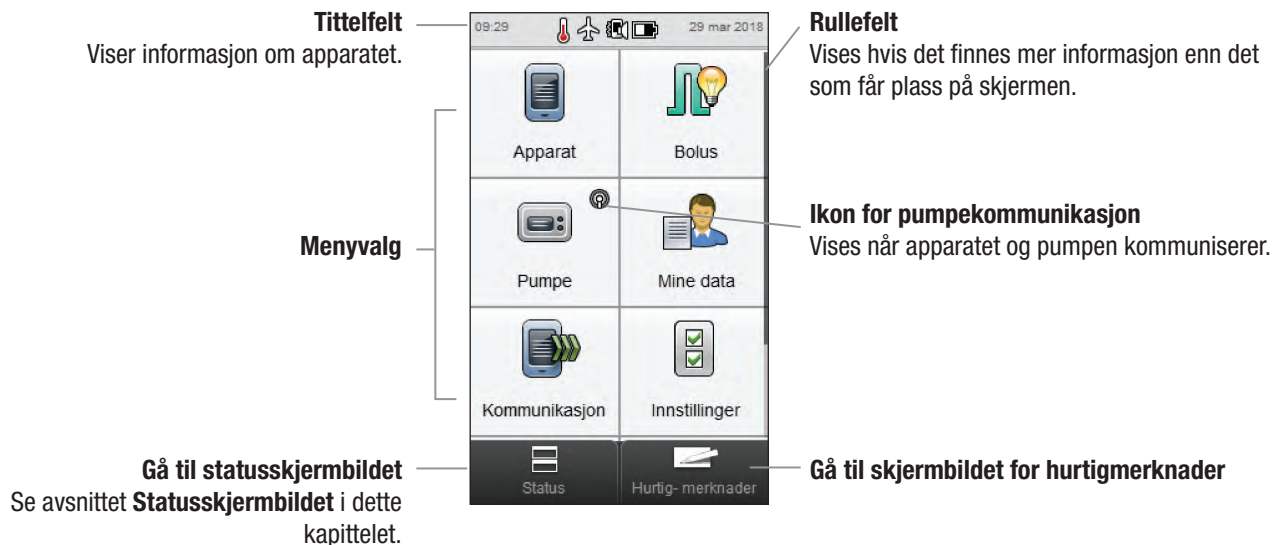


Tittelfeltet viser klokkeslett og dato. Du finner forklaringer på ikonene som vises på **tittelfeltet** i kapittelet **Bli kjent med din diabeteskontroller** i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller.

1.2.2 Statusskjerm bilde

Når apparatet er koblet med pumpen, viser Statusskjerm bildet pumpestatus og informasjon om den siste gyldige blodsukkermålingen.

Du finner en detaljert forklaring av blodsukkerstatusdelen av Statusskjerm bildet i kapittelet **Bli kjent med din diabeteskontroller i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.

Du kan vise en fullskjermversjon av enten Pumpestatus eller Blodsukkerstatus ved å berøre den aktuelle delen på Statusskjerm bildet.

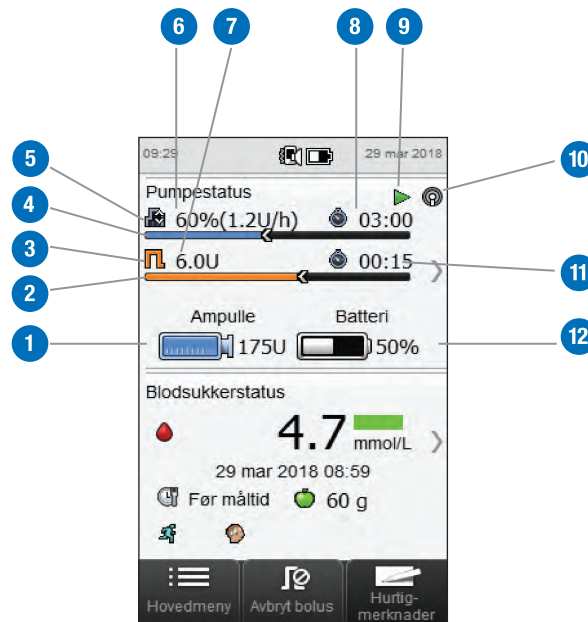

1	Ampullenivå Viser hvor mange insulinenheter som er igjen i ampullen.
2	Fremdriftsfelt for bolus Illustrerer mengde og varighet for aktiv bolus (vises ikke hvis ingen bolus tilføres).
3	Ikon for bolustype Viser den aktive bolusens bolustype.
4	Fremdriftsfelt for midlertidig basaldose Illustrerer mengde og varighet for aktiv midlertidig basaldose.
5	Ikon for basaldose Viser en aktiv basalprofil  eller midlertidig basaldose (MBD)  .
6	Basaldose Viser basaldosen i enheter per time (U/h). For midlertidige basaldoser vises også prosentverdien av den aktive tidsperioden for basalprofilen.

7	Gjenværende bolusinsulin Viser hvor mange enheter bolusinsulin som er igjen av den aktive bolusen.
8	Gjenværende tid for midlertidig basaldose Viser gjenværende tid av den aktive midlertidige basaldosen.
9	Pumpestatus Viser om pumpen kjører  eller er stoppet  .
10	Ikon for kommunikasjon Viser at apparatet og pumpen kommuniserer.
11	Gjenværende tid for bolus Viser hvor mye tid som er igjen av en utvidet bolus eller flerbølgebolus.
12	Pumpebatterinivå Viser ladestatus for pumpebatteriet.

2 Oppstart

2.1 Lade batteriet

Lad opp batteriet ved å sette inn USB-kabelen i et strømuttak eller en datamaskin. Bruk USB-kabelen og USB-adapteren som fulgte med apparatet, for å unngå problemer med lading av batteriet. Anbefalt ladingsmetode er å bruke et strømuttak, siden det er raskere og det tar ca. 3,5 timer å lade opp et helt utladet batteri. Det tar mye lenger tid å lade apparatet fra en datamaskin. Bruk et strømuttak hvis batteriet er veldig svakt eller ikke har vært ladet på en stund.

MERK

- ▶ Hvis batteriet blir helt utladet, reduseres batteriets evne til å holde på ladingen. Vi anbefaler at du lader opp batteriet regelmessig, for eksempel én gang per dag. Det skader ikke apparatet om du holder det tilkoblet for lading.
- ▶ Det er ikke mulig å utføre en blodsuktermåling mens apparatet er tilkoblet.



Lade batteriet via et strømuttak

1

Klart plastdeksel



Utløserknapp

Hvis strømadapteren allerede er montert, går du videre til trinn 4. For å montere strømadapteren tar du av det klare plastdekselet ved å trykke på midten av utløserknappen. Skyv det klare plastdekselet av i pilens retning.

2

Skyv på grenpluggen der hvor det klare plastdekselet var, til det klikker seg på plass. Ikke bruk makt for å få på plass grenpluggen. Den kan bare settes på én vei.

3



Sett inn den brede enden av USB-kabelen i strømadapteren.

4



Sett inn den smale enden av USB-kabelen i apparatet.

5

Sett inn strømadapteren i et strømuttak. Hvis batteriet er veldig svakt tar det flere minutter før apparatet slås på.



Når tilkoblingen er vellykket, viser apparatet batteriladingskjernbildet i 3 sekunder.

Det neste skjermbildet (enten hovedmenyen eller statusskjermbildet) viser batteriikonet  i lademodus.

6

Du kan trekke ut apparatet når batteriikonet vises som fulladet .

Lade batteriet via en datamaskin

1




Sett inn den smale enden av USB-kabelen i apparatet.

2



Sett inn den brede enden av USB-kabelen i en tilgjengelig USB-port på PC-en. Hvis batteriet er veldig svakt, slås ikke apparatet på. Lad batteriet via et strømuttak.

3

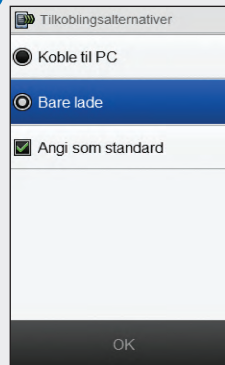

Velg **Bare lade**. Du kan alternativt velge **Angi som standard** for å hindre at dette skjermbildet vises hver gang du kobler USB-kabelen til en PC. Velg **OK**.

MERK

- ▶ Skjermbildet **Tilkoblingsalternativer** vises ikke hvis **Angi som standard** allerede er valgt.
- ▶ Du kan fjerne standardinnstillingen ved å gå til hovedmenyen og velge **Kommunikasjon > Innstillinger**. Velg **Varsle når USB tilkobles**. Velg **Lagre**.



MERK

PC-en må være påslått og ikke være i dvale- eller standbymodus når batteriet lades.



Når tilkoblingen er vellykket, viser apparatet batteriladingskjernbildet i 3 sekunder.

Det neste skjernbildet (enten hovedmenyen eller statusskjernbildet) viser batteriikonet  i lademodus.

**MERK**

Datamaskinen lader ikke batteriet hvis ikke apparatet viser batteriladingskjernbildet eller ikonet for batterilading, eller hvis informasjonsskjernbildet [Lad opp apparatet snart](#) vises. Lad opp batteriet via et strømuttak.

4

Du kan trekke ut apparatet når batteriikonet vises som fulladet .

2.2 Konfigurasjonsveiviser

Konfigurasjonsveiviseren aktiveres første gang du slår på apparatet. Du må fullføre konfigurasjonsveiviseren før du kan utføre en blodsukkermåling for første gang.

Konfigurasjonsveiviseren hjelper deg å velge innstillinger for:

- ▶ Apparatets språk
- ▶ Klokkeslett og dato
- ▶ Enheter (karbohydrater)
- ▶ Advarselsgrenser for hypo (lavt) og hyper (høyt) blodsukkernivå
- ▶ Tidsperioder
- ▶ Bolusråd (valgfritt)
- ▶ Påminnelser om blodsukkermåling (valgfritt)



ADVARSEL

Det er viktig at du snakker med legen eller diabetessykepleieren din om dine individuelle innstillinger for advarselsgrenser, tidsperioder, bolusråd og påminnelser om blodsukkermåling.

MERK

- ▶ Konfigurasjonsveiviseren aktiveres hver gang du slår på apparatet inntil du har fullført prosessen.
- ▶ Hvis du slår av apparatet når konfigurasjonsveiviseren er aktivert, må du bekrefte alle innstillingene på nytt for å kunne fullføre konfigurasjonsveiviseren.
- ▶ Velg **Tilbake** for å gå tilbake til forrige skjermbilde i konfigurasjonsveiviseren.
- ▶ Hvis du velger ikke å stille inn bolusråd og påminnelser om blodsuktermåling under konfigurasjonsveiviseren, kan du innstille disse funksjonene senere. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn disse funksjonene etter at konfigurasjonsveiviseren er fullført, i avsnittet **Stille inn bolusråd** i kapittelet **Endre innstillinger for bolusråd i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.
- ▶ Standardinnstillingene i apparatet og innstillingene som er illustrert i denne bruksanvisningen, er bare ment som eksempler.



2.3 Fullføre konfigurasjonsveiviseren

Se avsnittet **Viktig informasjon** i denne bruksanvisningen for detaljerte forklaringer av de ulike innstillingene i konfigurasjonsveiviseren.

1

På/Av-knapp




Start med apparatet avslått, og trykk på På/Av-knappen for å slå på apparatet.

2



Apparatet vibrerer og piper og viser dette velkomstbildet en liten stund (dette skjermbildet vises hver gang apparatet slås på).


3

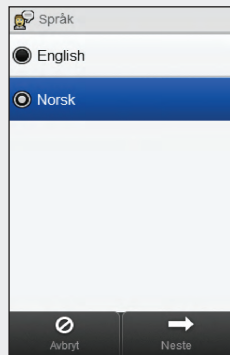

Velg ønsket språk fra listen.
Velg **Neste**.


4

Hvis du bruker Accu-Chek 360°-konfigurasjonsprogrammet: Tilkoble apparatet til PC-en, velg **PC-oppsett**, og velg deretter **Neste** for å fortsette oppsettet med programvaren. Du trenger ikke følge resten av trinnene i dette avsnittet.

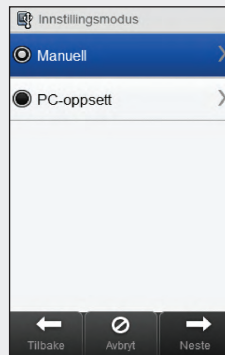

Velg **Manuell** for å fortsette å innstille apparatet.
Velg **Neste**.

5

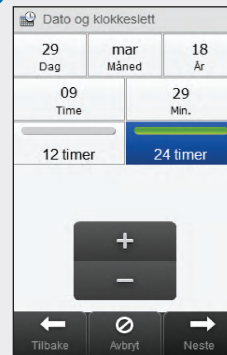

Velg **12 timer** eller **24 timer** for å stille inn tidsformatet ved behov.

6

Still inn dato og klokkeslett.
Velg **Neste**.

7

Velg den riktige
karbohydratenheten.
Velg **Neste**.


8

Still inn advarselsgrensene
for **Hyper** (øvre) og **Hypo**
(nedre). Velg **Neste**.

9

Velg **Ja** for å få bolusråd.
Velg **Nei** for ikke å få
bolusråd. Velg **Neste**.

10

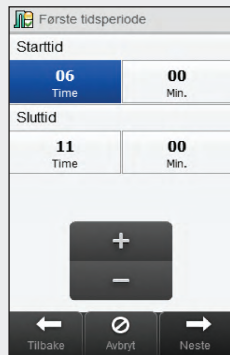

Første tidsperiode

Starttid

06 Time 00 Min.

Sluttid


11 Time 00 Min.

+
-

Tilbake Avbryt Neste

Still inn starttid og sluttid for første tidsperiode.
Velg **Neste**.

11

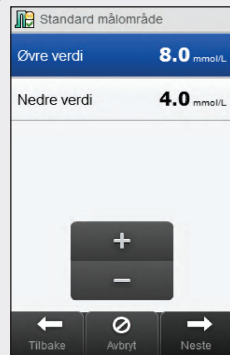

Standard målområde

Øvre verdi 8.0 mmol/L

Nedre verdi 4.0 mmol/L

+
-

Tilbake Avbryt Neste


Still inn målområdet.
Velg **Neste**.

MERK

Hvis du velger ikke å få bolusråd, hopper konfigurasjonsveiviseren over trinn 12.



12

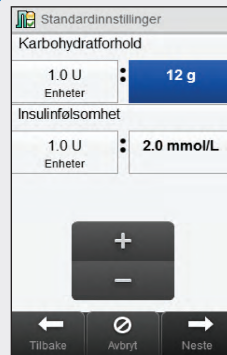

Standardinnstillinger

Karbohydratforhold

1.0 U Enheter 12 g

Insulinfølsomhet


1.0 U Enheter 2.0 mmol/L

+
-

Tilbake Avbryt Neste


Still inn **Karbohydratforhold** og **Insulinfølsomhet**.
Velg **Neste**.

13

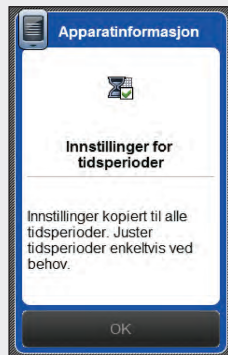

Velg **OK**.

14

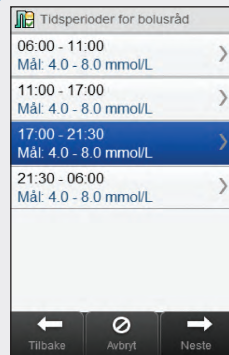


Velg eventuelt en annen tidsperiode for å redigere **Sluttid**, **Øvre verdi** og **Nedre verdi**. Velg **Neste** når du er ferdig med å redigere tidsperioder.

MERK

- ▶ Hvis bolusråd er slått på, kan du også stille inn karbohydratforhold og insulinfølsomhet for hver tidsperiode.
- ▶ Du kan tilbakestille alle redigerte tidsperioder til standardverdiene ved å velge **Avbryt** og deretter **Ja**. Dette starter apparatets konfigurasjonsprosess på nytt.
- ▶ Hvis du velger ikke å motta bolusråd, vises **Fullført** i stedet for **Neste** på skjermen. Velg **Fullført** for å fullføre konfigurasjonsveiviseren.



15

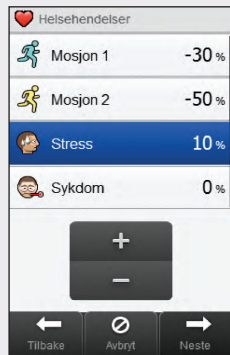


Helsehendelser	
Mosjon 1	-30 %
Mosjon 2	-50 %
Stress	10 %
Sykdom	0 %

Buttons: +, -

Navigation: Tilbake, Avbryt, Neste

Still inn prosentandelen for en ønsket helsehendelse. Bla for å vise flere alternativer. Velg **Neste**.

16

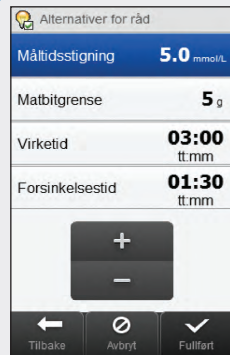

Alternativer for råd	
Måltidsstigning	5.0 mmol/L
Matbitgrense	5 g
Virketid	03:00 tt:mm
Forsinkelsestid	01:30 tt:mm

Buttons: +, -

Navigation: Tilbake, Avbryt, Fullført

Still inn **Måltidsstigning**, **Matbitgrense**, **Virketid** og **Forsinkelsestid**. Velg **Fullført** for å fullføre konfigurasjonsveiviseren.

MERK

Snakk med legen/ diabetessykepleieren din og les kapittelet **Bolusråd** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller** for å få hjelp med innstillingene i konfigurasjonsveiviseren.



2.4 Viktig informasjon

2.4.1 Karbohydratenhet

Du kan velge mellom ulike karbohydratenheter i apparatet etter dine behov. Følgende karbohydratenheter kan brukes:

Forkortelse	Måleenhet	Gramekvivalent
g	Gram	1 gram
KE	Karbohydratenhet	10 gram
BE	Brødekvivalent	12 gram
CC	Karbohydratvalg (Carbohydrate Choice)	15 gram

MERK

Gramekvivalentene for KE, BE og CC kan endres med Accu-Chek 360°-konfigurasjonsprogrammet. Standard gramekvivalenter vises i den forrige tabellen.

**2.4.2 Advarselsgrenser**

Du kan velge advarselsgrenser for hyper (høyt) og hypo (lavt) blodsukker etter dine behov.

Hvis blodsukkerresultatet er over grensen for hyperadvarsel eller under grensen for hypoadvarsel, viser apparatet en advarsel.

- ▶ Angi en hyperadvarselsgrense som er over målområdet for alle tidsperioder.
- ▶ Angi en hypoadvarselsgrense som er under målområdet for alle tidsperioder.

2.4.3 Tidsperioder

Hvis du stiller inn tidsperioder som er tilpasset din egen timeplan, blir det lettere for deg og legen eller diabetessykepleieren din å se hvordan blodsukkermønsteret ditt kan påvirkes av dine daglige aktiviteter og din livsstil.

Tidsperioder kombineres for å dekke en tidsperiode på 24 timer.

Apparatet leveres med 4 forhåndsinnstilte tidsperioder. Du kan stille inn opptil 8 tidsperioder. Du kan endre tidsperioden for alle standardtidsperiodene.

For å fullføre konfigurasjonsveiviseren må du fullføre og lagre standardinnstillingene for tidsperioder. Hver tidsperiode må være på minst 15 minutter og kan bare stilles inn i intervaller på 15 minutter. Når du stiller inn sluttiden for en tidsperiode, stiller apparatet automatisk denne sluttiden som starttiden for neste tidsperiode.

Du kan stille inn et forskjellig blodsuktermålområde for hver tidsperiode. Målområdet for hver tidsperiode må være innenfor advarselsgrensene for hypo- og hyperglykemi.

Hvis standardtidsperioder er innstilt, blir disse innstillingene brukt på alle de andre tidsperiodene. Hvis bolusråd er innstilt, må du også stille inn karbohydratforholdet og insulinfølsomhet for standardtidsperioden. Du kan stille inn forskjellig karbohydratforhold og insulinfølsomhet for hver tidsperiode.

Snakk med legen eller diabetessykepleieren din om hvordan du stiller inn tidsperioder.

2.4.4 Bolusråd

Funksjonen for bolusråd beregner en bolus for deg som er tilpasset tidspunktet på dagen og dine ulike situasjoner. Denne funksjonen blir bare aktivert hvis du har satt opp bolusråd i apparatet.

Bolusrådanbefalinger som gis av apparatet, er bare ment som råd.

Du finner detaljert informasjon om bolusråd i kapittelet **Bolusråd** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.

Karbohydratforhold

Karbohydratforholdet er den mengden insulin som trengs for et bestemt antall karbohydrater.

Snakk med legen eller diabetessykepleieren din for å finne karbohydratforholdet som er riktig for deg.

Insulinfølsomhet

Insulinfølsomheten er den mengden insulin som trengs for å redusere blodsukkeret ditt med en bestemt mengde.

Snakk med legen eller diabetessykepleieren din for å finne innstillingene for insulinfølsomhet som er riktige for deg.

Helsehendelser

Du kan velge helsehendelser for å angi hvordan du føler deg eller hva du gjør som kan påvirke ditt blodsukkernivå. Ved å stille inn bolusråd kan du stille inn en prosentandel for hver helsehendelse som justerer bolusrådanbefalingen.

Mulige helsehendelser i apparatet er:

- ▶ Mosjon 1
- ▶ Mosjon 2
- ▶ Stress
- ▶ Sykdom
- ▶ Premenstruell
- ▶ Egendefinert (1–3)

En positiv prosentandel øker bolusmengden, og en negativ prosentandel (-) reduserer bolusmengden. Snakk med legen eller diabetessykepleieren din for å finne prosentandelen for hver helsehendelse som er riktig for deg.

Alternativer for råd

Måltidsstigning, matbitgrense, virketid og forsinkelsestid er rådalternativer. Nedenfor finner du detaljerte beskrivelser av hver av disse innstillingene.

Måltidsstigning

Under eller etter måltider anses en økning i blodsukkernivået som normalt innenfor et bestemt område, selv om en bolus er tilført.

Angi den maksimale økningen i blodsukkernivå som skal tolereres etter et måltid uten at det tilføres en ekstra korreksjonsbolus.

Matbitgrense

Matbitgrensen definerer en grense for karbohydrater som utløser en måltidsstigning, hvis den overskrides.

Virketid

Tidsperioden fra begynnelsen på en bolus til blodsukkernivået forventes å gå tilbake til målverdien.

Du kan justere lengden på virketiden etter individuelle behov, innenfor et angitt tidsintervall (1 ½ time til 8 timer). Kontakt legen/diabetessykepleieren din hvis du er usikker på insulinets virketid.

Den totale virketiden inkluderer forsinkelsestiden.

Forsinkelsestid

Forsinkelsestiden er forventet tid før insulinet begynner å redusere blodsukkernivået i kroppen.

3

Kommunikasjon mellom apparatet og pumpen


3.1 Koble apparatet og pumpen

Før du kan kontrollere pumpen med apparatet, må apparatet og pumpen kobles. Hvis du mottok apparatet og pumpen som et sett, er de ferdig koblet som standard.

Når apparatet og pumpen er koblet, blir koblingsinnstillingene lagret i begge enhetene slik at du ikke trenger å gjenta koblingen. Hvis kommunikasjonen mellom apparatet og pumpen stoppes eller avbrytes, vil de automatisk begynne å kommunisere igjen når begge enhetene er innenfor kommunikasjonsområdet og pumpe-skjermen ikke er aktivert.


Hovedmeny > Kommunikasjon > Sett opp ny kobling > Enheter

1

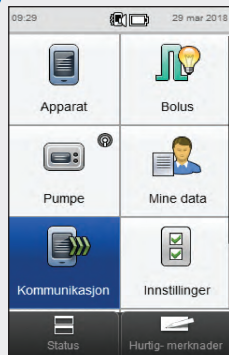


Velg **Kommunikasjon** fra apparatets hovedmeny.

2

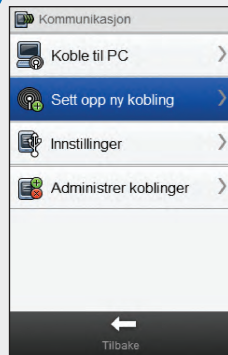


Velg **Sett opp ny kobling**.

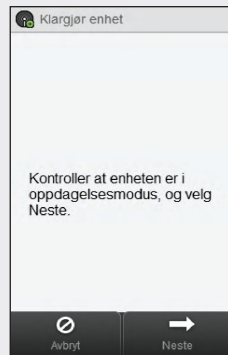

Apparatet viser skjermbildet **Klargjør enhet**.

3

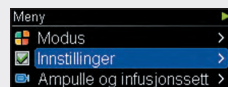


Velg **Innstillinger** på pumpen.

4




Velg **Kommunikasjon**.

5

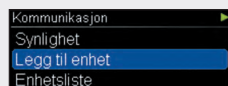


Velg **Legg til enhet**.

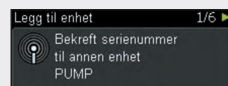


Pumpen viser skjermbildet **Legg til enhet**, som viser pumpens serienummer.

6

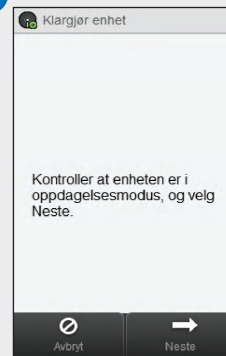

Velg **Neste** på apparatet.

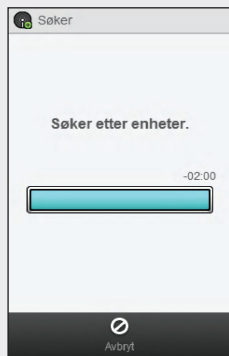


Apparatet viser skjermbildet **Søker** mens apparatet søker etter Bluetooth-enheter.

MERK

- ▶ Apparatet kan bare kobles med 1 pumpe av gangen. Hvis en av enhetene tidligere var koblet med en annen enhet (hvis du for eksempel har byttet apparat eller pumpe), må du først fjerne den forrige koblingen. Se avsnittet **Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen** i dette kapittelet for instruksjoner om å fjerne koblingen mellom enhetene.
- ▶ Når pumpen er i modusen Legg til enhet, sender pumpen et signal som andre enheter kan oppdage for å koble seg til pumpen.
- ▶ Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn pumpen i modusen Legg til enhet, i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.




7

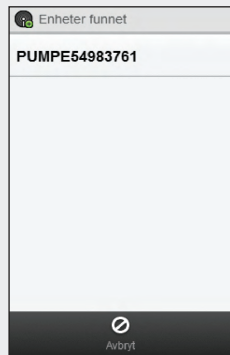

Velg serienummeret som samsvarer med serienummeret som vises på pumpeskjermen, fra listen.




Apparatet prøver å koble seg til pumpen og viser skjermbildet [Kobling](#).

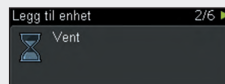


Pumpen viser skjermbildet [Legg til enhet](#).

8

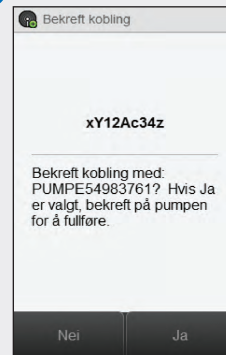

Kontroller at apparatets PIN-kode samsvarer med PIN-koden som vises på pumpen. Velg [Ja](#) på apparatet.

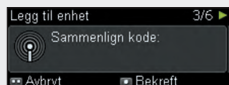

Bekreft på pumpen.

MERK

- ▶ Hvis PIN-koden og serienummeret ikke stemmer med de som vises på enheten du skal koble med apparatet, velger du **Nei**.
- ▶ Hvis apparatet ikke klarer å koble seg til den valgte enheten, vises skjermbildet **Enhet ikke koblet**. Velg **OK** for å gå tilbake til menyen **Kommunikasjon**.



9



Velg **OK**.

MERK


- ▶ Bluetooth trådløs kommunikasjon må være aktivert, og apparatet må være koblet til pumpen for at det skal være mulig å utføre pumpefunksjoner med apparatet.
- ▶ Når apparatet er koblet med pumpen, endres apparatets Hjem-skjerm bilde fra [Hovedmeny](#) til skjermbildet [Status](#). For informasjon om [Status](#)-skjermbildet, se avsnittet **Hjem** i kapittelet **Oversikt** i denne bruksanvisningen.
- ▶ Hvis kommunikasjonen mellom apparatet og pumpen brytes, eller hvis det oppstår en feil i pumpen, vises ikke feilmeldingen på apparatet. Hvis du slår på apparatet og kobler til pumpen på nytt, vises feilmeldingen på apparatet.



3.2 Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen

Hovedmeny > Kommunikasjon > Administrer koblinger


1

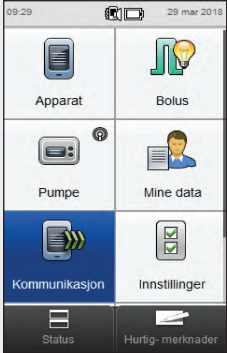

Velg **Kommunikasjon** fra hovedmenyen.

The screenshot shows a main menu with a grid of icons: 'Apparat' (device), 'Bolus' (bolus), 'Pumpe' (pump), 'Mine data' (my data), 'Kommunikasjon' (communication), and 'Innstillinger' (settings). The 'Kommunikasjon' icon is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are two more icons: 'Status' and 'Hurtig-merknader' (quick notes).


2

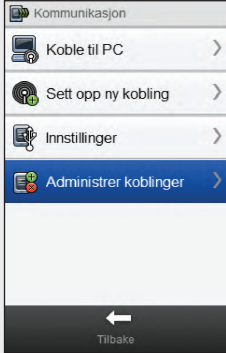

Velg **Administrer koblinger**.

The screenshot shows the 'Kommunikasjon' menu with options: 'Koble til PC', 'Sett opp ny kobling', 'Innstillinger', and 'Administrer koblinger'. The 'Administrer koblinger' option is highlighted with a blue bar. A 'Tilbake' (back) button is at the bottom.


3

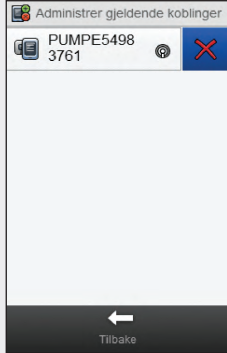

Velg **X** ved siden av pumpens navn.

The screenshot shows the 'Administrer gjeldende koblinger' screen. It displays a pump name 'PUMPE5498 3761' next to a red 'X' icon. A 'Tilbake' (back) button is at the bottom.

4

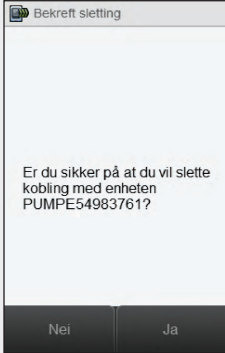

Velg **Ja**.

The screenshot shows a confirmation dialog titled 'Bekreft sletting'. The text asks: 'Er du sikker på at du vil slette kobling med enheten PUMPE54983761?'. There are two buttons at the bottom: 'Nei' and 'Ja'.

MERK

Denne prosessen fjerner koblingen fra apparatet og avslutter kommunikasjon mellom apparatet og pumpen. Du finner instruksjoner om hvordan du sletter koblingsinformasjonen fra pumpen i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.



4

Kontrollere pumpen med apparatet

ADVARSEL

Kontroller blodsukkernivået og erstatt det manglende insulinet umiddelbart hvis insulintilførselen blir avbrutt, uansett grunn.

For eksempel:

- ▶ Du stopper pumpen.
- ▶ Det er et teknisk problem med pumpen.
- ▶ Ampullen og/eller infusjonssettet lekker.
- ▶ Infusjonssettet er tilstoppet.
- ▶ Kanylen har glidd ut av infusjonssettet.


ADVARSEL

Hvis kommunikasjonen mellom pumpen og apparatet brytes eller ikke er mulig av en annen grunn, viser apparatet vedlikeholdsmeldingen **M-68 Forbindelsen er brutt**. I så fall må du bruke pumpen som en frittstående enhet.

4.1 Tilgang til pumpemenyen

Når apparatet er koblet med pumpen, blir det aktivert flere fjernstyringsfunksjoner på apparatet, som ikke var tilgjengelige før. Du får tilgang til disse funksjonene fra [Pumpemeny](#).


Hovedmeny > Pumpe

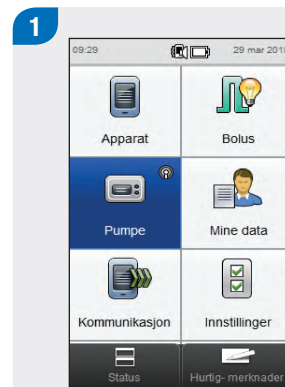

Fra hovedmenyen velger du [Pumpe](#).

4.2 Forstå pumpemenyskjerm bildene på apparatet

Pumpemeny inneholder følgende alternativer:

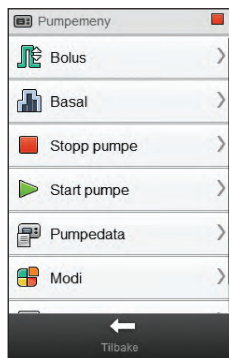

Menyalternativ	Beskrivelse
Bolus	Programmere og tilføre boluser, samt opprette og endre egendefinerte boluser
Basal	Programmere, opprette og endre midlertidige basaldoser (MBD), samt programmere og aktivere basalprofiler
Stopp pumpe	Avbryte insulintilførsel
Start pumpe	Starte insulintilførsel
Pumpedata	Vise rapporter om Hendelses-, Bolus- og MBD-data, samt Total døgndose, Driftstid og informasjon om programvareversjon.
Modi	Justere signalmodi og slå flymodus på og av
Innstillinger	Programmere pumpepåminnelser, og få tilgang til innstillinger for enhet, behandling og klokkeslett og dato

Ikon	Beskrivelse
 Pumpe stoppet-ikonet	Indikerer at pumpen har stoppet. Pumpen er aktivert- og Pumpe på pause-ikonene kan også vises her
 Pumpen er aktivert-ikonet	(vises ikke) Indikerer at pumpen er aktivert
 Pumpe på pause-ikonet	(vises ikke) Indikerer at pumpen er satt på pause


MERK

Hvis det utløses en advarsel eller feilmelding i pumpen mens pumpen kommuniserer med apparatet, vises advarselen eller feilmeldingen på apparatet. Hvis du trykker OK på apparatskjermen, avvises advarselen/feilmeldingen på både pumpen og apparatet. Du må fremdeles foreta handlingene som anbefales i meldingen. Ved å trykke OK utføres ikke disse handlingene automatisk.



4.3 Stoppe pumpen


Hovedmeny > Pumpe > Stopp pumpe

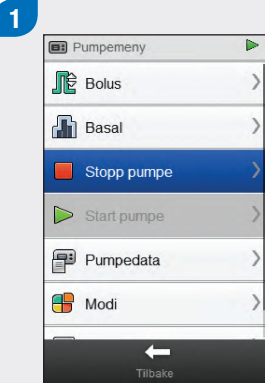

Velg **Stopp pumpe** fra **Pumpemeny**. Stopper insulintilførsel fra pumpen.



Velg **Ja**.

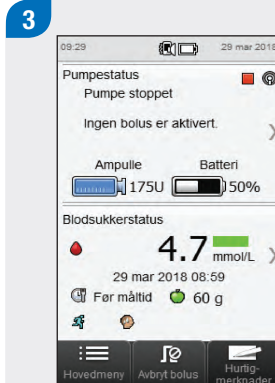


Apparatet viser statusskjermbildet, som viser at pumpen har stoppet.

4.4 Starte pumpen

Hovedmeny > Pumpe > Start pumpe

1

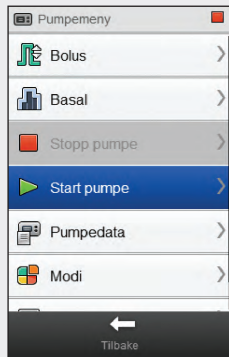


Velg **Start pumpe** fra **Pumpemeny**. Starter insulintilførsel fra pumpen.

2



Velg **Ja**.

3

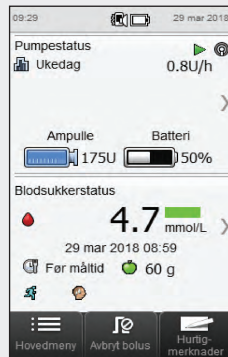

Apparatet viser statusskjermbildet, som viser at pumpen har startet.

5 Blodsuktermåling

5.1 Utføre en blodsuktermåling

MERK

- ▶ Du trenger apparatet, en teststrimmel, en blodprøvetaker og en lansett.
- ▶ Innstill apparatet før du utfører en blodsuktermåling for første gang.
- ▶ Det er ikke mulig å utføre en blodsuktermåling mens apparatet er tilkoblet.
- ▶ Ordet "blodsukker" blir av og til forkortet til BS, men det betyr det samme.




1



Vask og tørk hendene.
Klargjør blodprøvetakeren.

2

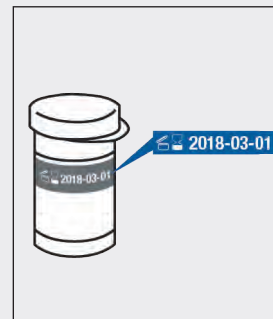

Kontroller utløpsdatoen på
teststrimmelboksen. Ikke
bruk teststrimler som har
gått ut på dato.



Sett en teststrimmel inn i apparatet i pilenes retning. Apparatet slås på.


MERK

- ▶ Ikke før bloddråpen inntil teststrimmelen før skjermbildet **Tilfør dråpe** vises.
- ▶ Vær forsiktig så det ikke kommer væske inn i sporet for teststrimmelen.
- ▶ Hvis det oppstår en teststrimmelfeil, må du ta ut og kaste teststrimmelen. Gjenta målingen med en ny teststrimmel.
- ▶ Ikke tilfør blod på teststrimmelen før du har satt den inn i apparatet.
- ▶ Når det er en teststrimmel i apparatet, er knappene, valgene på berøringsskjermen og På/Av-knappen deaktivert. Knappene aktiveres når du tar ut teststrimmelen, eller når målingen er fullført.
- ▶ Andre måter å starte en blodsuktermåling på:
 - Fra hovedmenyen, velg **Apparat** > **Blodsuktermåling**, eller velg **Bolus** > **Blodsuktermåling**. Sett inn en teststrimmel i apparatet.
 - Når en påminnelse om blodsuktermåling vises, sett inn en teststrimmel i apparatet.



Et bilde av teststrimmelboksen vises i noen sekunder. Gå videre til neste trinn.

4

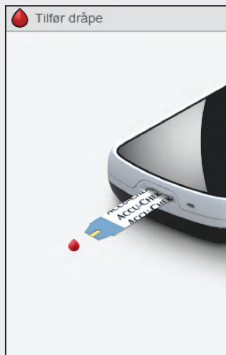

Skjermbildet **Tilfør dråpe** vises. Stikk deg i fingeren med blodprøvetakeren.

5



Trykk forsiktig på fingeren for å øke blodtilførselen. Dette hjelper deg å få frem en bloddråpe.


6



Før bloddråpen inntil **kanten** av det gule feltet på teststrimmelens **front**. Ikke påfør blod på teststrimmelens overside.



Skjermbildet **Analyserer** vises når teststrimmelen har fått nok blod.

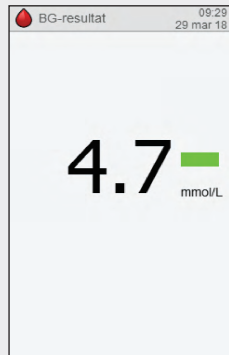


Resultatet vises på skjermen.

MERK

- ▶ Du finner mer informasjon om blodsukkerresultater i avsnittene **Forstå blodsukkerresultatene** og **Uventede blodsukkerresultater** i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller.
- ▶ Blodsukkerresultatet må brukes innen 10 minutter for bolusråd.



7

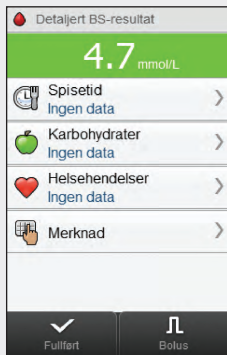

Etter ca. 3 sekunder vises skjermbildet **Detaljert BS-resultat**. Fjern og kast den brukte teststrimmelen. Gjør ett av følgende:


- ▶ Fullføre blodsuktermålingen uten å legge til informasjon eller tilføre en bolus: Velg **Fullført**.

- ▶ Hvis bolusråd er aktivert: Gå til avsnittet **Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd** i kapittelet **Administrere boluser** i denne bruksanvisningen.

- ▶ Hvis bolusråd ikke er aktivert:
 - Legge til informasjon som skal lagres sammen med blodsukkerresultatet: Fortsett til neste avsnitt **Legge til informasjon for et blodsukkerresultat**. En bolus kan tilføres etter at informasjonen er lagt til.
 - Tilføre en bolus uten å legge til informasjon: Velg **Bolus** og gå til avsnittet **Tilføre en bolus uten bolusråd** i dette kapittelet.

5.2 Legge til informasjon for et blodsukkerresultat

Å legge til informasjon i registreringsfeltene gir deg en liste over omstendighetene rundt blodsukkerresultatene. Denne informasjonen vil være nyttig senere, for å finne mønstre i dine blodsukkernivåer. Trinnene i dette avsnittet gjelder bare hvis funksjonen for bolusråd ikke brukes. Hvis bolusråd er aktivert, gå til avsnittet **Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd** i kapittelet **Administrere boluser** i denne bruksanvisningen.

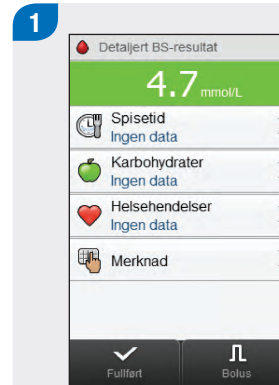

Du legger til en oppføring ved å velge oppføringen og følge instruksjonene på den neste siden.


Skjermbilder for å legge til data om detaljerte blodsukkerresultater

Spisetid




Velg spisetiden. Velg **Lagre**.

Karbohydrater

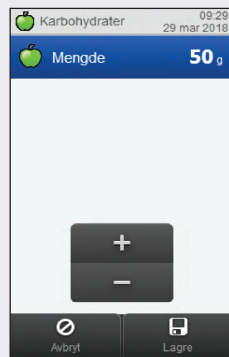

Still inn mengden karbohydrater du har spist. Velg **Lagre**.

Helsehendelser

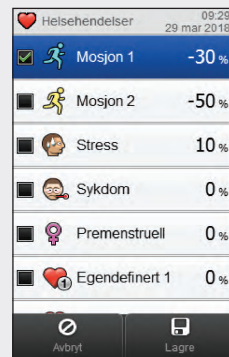

Du kan velge opptil 4 helsehendelser. Velg **Lagre**.

MERK

Hvis bolusråd er slått på og det er valgt flere helsehendelser, viser apparatets "Justering"-skjerm bilde "---%". Du må angi en summert prosentandel for helsehendelser, selv om denne prosentandelen er på null.



Merknad


Skriv en merknad (opptil 60 tegn) som skal lagres sammen med denne oppføringen. Velg ✓.

2

Gjør ett av følgende:

- ▶ Lagre dataene og fortsette med bolustilførsel: Velg **Bolus** og fortsett.
- ▶ Lagre dataene uten å fortsette med bolustilførsel: Velg **Fullført**.

5.3 Tilføre en bolus uten bolusråd

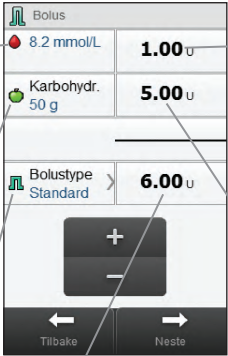

Blodsukkerresultat
Ingen måling vises hvis det har gått 10 minutter eller mer siden det siste blodsukkerresultatet ble innhentet.

Mengde karbohydrater
Ingen data vises hvis det ikke er angitt noen mengde.

Bolustype
Se den følgende tabellen.

Total bolus
Summen av korreksjonsbolus og måltidsbolus.

Korreksjonsbolus
Insulin for å korrigere et blodsukkernivå som var utenfor målområdet, til å være innenfor målområdet.

Måltidsbolus
Insulin for å takle maten du spiser.

MERK

Første gang skjermbildet **Bolus** vises, er det ingen bolusmengder. Det er du som angir bolusmengdene.




Bolustype

Hvis du programmerer en bolus uten å bruke bolusråd, vil standardbolustypen som vises på apparatet, variere avhengig av kommunikasjonsstatusen med pumpen.

Betingelse	Bolustype
Apparatet kommuniserer med pumpen, og standardbolus er tilgjengelig fra pumpen.	Bolustypen er først stilt til Standard. Du kan endre bolustypen.
Apparatet kommuniserer med pumpen, og standardbolus er ikke tilgjengelig fra pumpen.	Bolustypen er først stilt til Manuelt på pumpe. Du kan endre bolustypen.
Apparatet er koblet med en pumpe, men kommuniserer ikke med pumpen.	Bolustypen er først stilt til Manuelt på pumpe. Du kan endre bolustypen.
Apparatet er koblet med en pumpe og kommuniserer med pumpen, men pumpen er satt på pause eller stoppet.	Bolustypen er først stilt til Penn/sprøyte. Du kan endre bolustypen.
Apparatet er ikke koblet med en pumpe.	Knappen Bolustype vises ikke. Bolustypen er stilt til Penn/sprøyte og kan ikke endres.

5.3.1 Tilføre en standardbolus uten bolusråd

1

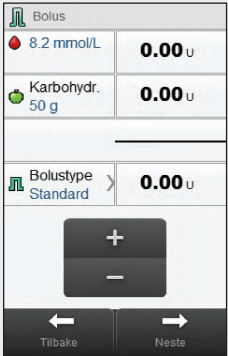


Bolus

8.2 mmol/L	0.00 u
Karbohydr. 50 g	0.00 u
Bolustype Standard	0.00 u
+ -	
Tilbake	Neste

Du kan om nødvendig endre til **Standard**bolus ved å velge **Bolustype**. Hvis ikke, gå videre til trinn 3.

2

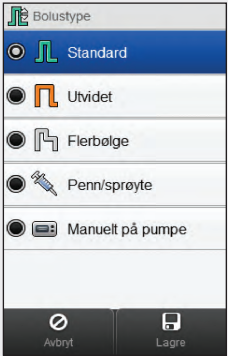


Bolustype

- ☒ Standard
- ☐ Utvidet
- ☐ Flerbølge
- ☐ Penn/sprøyte
- ☐ Manuelt på pumpe

Avbryt Lagre

Velg **Standard**. Velg **Lagre**.

3

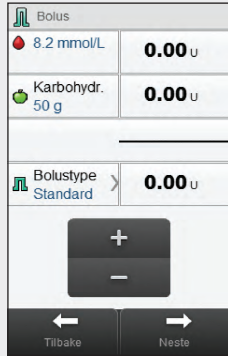

Bolus

8.2 mmol/L	0.00 u
Karbohydr. 50 g	0.00 u
Bolustype Standard	0.00 u
+ -	
Tilbake	Neste

Angi bolusmengder etter behov. Du angir en bolusmengde ved å velge registreringsfeltet for korreksjonsbolus, måltidsbolus eller total bolus og angi mengden.

MERK

- ▶ Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.



4

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 u
Karbohydr. 50 g	5.00 u
Bolustype Standard	6.00 u
+ -	
← → TilbakeNeste	


Velg **Neste**.

5


Standardbolus	
Still umiddelb. mengde	6.0 u
+ -	
← → TilbakeNeste	

Velg **Neste**.

6

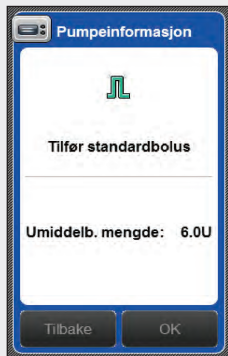

Velg **Tilbake** for å justere bolusen, eller velg **OK** for å tilføre bolusen.

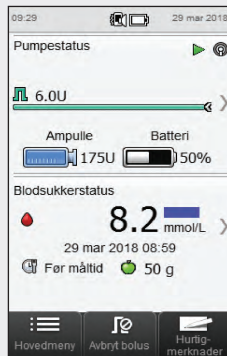

Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

5.3.2 Tilføre en utvidet bolus uten bolusråd

1

Bolus	
8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Standard	
0.00 U	
+	
-	
Tilbake	Neste

Velg **Bolustype**.

2

Bolustype	
☐ Standard	
☒ Utvidet	
☐ Flerbolge	
☐ Penn/sprøyte	
☐ Manuelt på pumpe	
Avbryt	
Lagre	

Velg **Utvidet**. Velg **Lagre**.

MERK

Utvidet bolus er kun tilgjengelig hvis en måltidsbolus er angitt.



3

Bolus	
8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Utvidet	
0.00 U	
+	
-	
Tilbake	Neste

Angi bolusmengder etter behov. Du angir en bolusmengde ved å velge registreringsfeltet for korreksjonsbolus, måltidsbolus eller total bolus og angi mengden.

4

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Bolustype Utvidet	6.00 U
+ -	
← Tilbake	→ Neste

Velg **Neste**.

5

Utvidet bolus	
Still forsinket mengde	6.0 U
Still forsinket varighet	04:00 tt:mm
+ -	
← Tilbake	→ Neste

Innstill **forsinket varighet**.
Velg **Neste**.

6

Pumpeinformasjon

n

Tilfør utvidet bolus

Forsinket mengde: 6.0U
Forsinket varighet: 04:00

Tilbake
OK

Velg **Tilbake** for å justere en innstilling, eller velg **OK** for å tilføre bolusen.

08:29 29 mar 2018

Pumpestatus

n 6.0U
 04:00

Ampulle 175U
Batteri 50%

Blodsukkerstatus

● 8.2 mmol/L

29 mar 2018 08:59

Før måltid
● 50 g

⋮ Hovedmeny
⌂ Åbryt bolus
📄 Husk-merknader

Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

5.3.3 Tilføre en flerbølgebolus uten bolusråd

1

Bolus	
8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Standard	
0.00 U	
+	
-	
Tilbake	Neste

Angi bolusmengder etter behov. Du angir en bolusmengde ved å velge registreringsfeltet for korreksjonsbolus, måltidsbolus eller total bolus og angi mengden.

2

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Bolustype Standard	
6.00 U	
+	
-	
Tilbake	Neste

Velg **Bolustype**.

MERK

Flerbølgebolus er kun tilgjengelig hvis en måltidsbolus er angitt.



3

Bolustype	
☐	Standard
☐	Utvidet
☒	Flerbølge
☐	Penn/sprøyte
☐	Manuelt på pumpe
Avbryt	
Lagre	

Velg **Flerbølge**. Velg **Lagre**.

MERK

- ▶ Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen mengde for karbohydrater (**Karbohydrater** viser **Ingen data** i trinn 2), bør du vurdere å angi en mengde for karbohydrater. Velg **Tilbake** for å angi en mengde. Du trenger ikke angi en mengde, men jo mer fullstendige dataene er, jo mer nøyaktige vil fremtidige bolusrådbefalinger bli når du bruker bolusråd.



4


Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 u
Karbohydr. 50 g	5.00 u
Bolustype Flerbølge	
	6.00 u
+ -	
← Tilbake	Neste →

Velg **Neste**.


5

Flerbølgebolus	
Still umiddelb. mengde	2.0 u
Still forsinket mengde	4.0 u
Still forsinket varighet	2:30 tt:mm
+ -	
← Tilbake	Neste →

Innstill **umiddelbar mengde**, **forsinket mengde** og **forsinket varighet**.
Velg **Neste**.

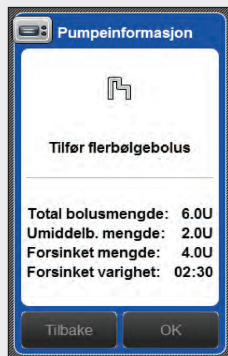

Velg **Tilbake** for å justere en innstilling, eller velg **OK** for å tilføre bolusen.

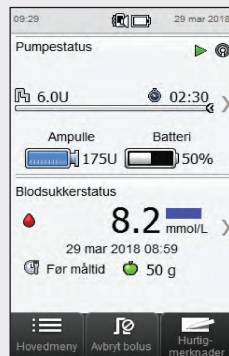

Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

5.3.4 Tilføre en penn-/sprøytebolus uten bolusråd

1

Bolus	
8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Standard	
0.00 U	
+ —	
← Tilbake Neste →	

Du kan om nødvendig endre til **Penn/sprøyte**-bolus ved å velge **Bolustype**. Hvis ikke, gå videre til trinn 3.

2

Bolustype	
☐ Standard	
☐ Utvidet	
☐ Flerbølge	
☒ Penn/sprøyte	
☐ Manuelt på pumpe	
↻ Avbryt Lagre	

Velg **Penn/sprøyte**.
Velg **Lagre**.

3

Bolus	
8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Penn/sprøyte	
0.00 U	
+ —	
← Tilbake Neste →	

Angi bolusmengder etter behov. Du angir en bolusmengde ved å velge registreringsfeltet for korreksjonsbolus, måltidsbolus eller total bolus og angi mengden.

MERK

- ▶ Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.



4

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Bolustype Penn/sprøyte	6.00 U

+

-

← TilbakeNeste →

Velg **Neste**.

5

Apparatinformasjon



Tilfør penn/sprøyte-bolus


Bruk penn eller sprøyte
for å tilføre 6.0 U.

TilbakeOK

Velg **Tilbake** for å justere bolusmengden, eller velg **OK**.
Tilfør bolusen med penn eller sprøyte.

5.3.5 Tilføre en Manuelt på pumpe-bolus uten bolusråd

1

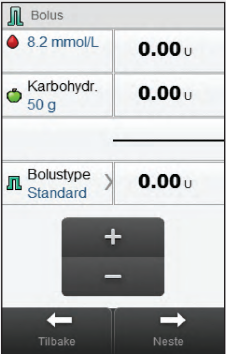

Bolus

8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Standard	0.00 U


+

-

Tilbake Neste

Du kan om nødvendig endre til **Manuelt på pumpe**-bolus ved å velge **Bolustype**. Hvis ikke, gå videre til trinn 3.

2

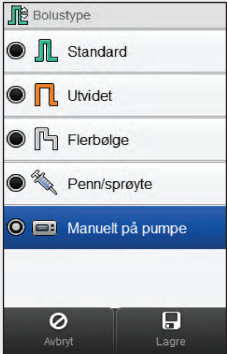


Bolustype

- ☐ Standard
- ☐ Utvidet
- ☐ Flerbølge
- ☐ Penn/sprøyte
- ☒ Manuelt på pumpe

Avbryt Lagre

Velg **Manuelt på pumpe**.
Velg **Lagre**.

3

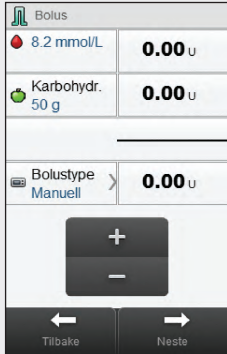

Bolus

8.2 mmol/L	0.00 U
Karbohydr. 50 g	0.00 U
Bolustype Manuell	0.00 U

+

-

Tilbake Neste

Angi bolusmengder etter behov. Du angir en bolusmengde ved å velge registreringsfeltet for korreksjonsbolus, måltidsbolus eller total bolus og angi mengden.

MERK

- ▶ Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.



4

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Bolustype Manuell	6.00 U
+ -	
← → TilbakeNeste	

Velg **Neste**.

5

Pumpeinformasjon	
Tilfør bolus manuelt på pumpen	
Programmer bolus på pumpen for å tilføre 6.0 U.	
Tilbake OK	

Velg **Tilbake** for å justere bolusmengden, eller velg **OK** for å registrere bolusen. Programmerer pumpen til å tilføre bolusen.

6 Administrere boluser

MERK


- ▶ Se **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen** for en detaljert forklaring på standardbolus, utvidet bolus og flerbølgebolus.
- ▶ Funksjoner relatert til forsinkelsestid vises på apparatet kun hvis du har aktivert forsinkelsestid på pumpen.



6.1 Programmere og tilføre en standardbolus


Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Standardbolus

1

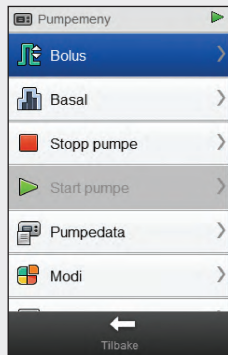


Velg **Bolus** fra Pumpemeny.

2

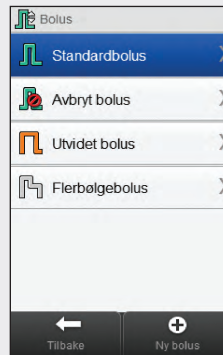


Velg **Standardbolus**.

3

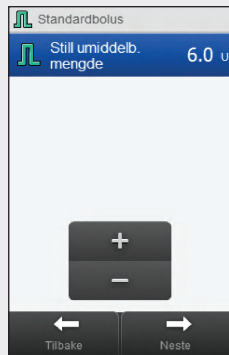

Innstill **umiddelbar mengde**.
Velg **Neste**.

4

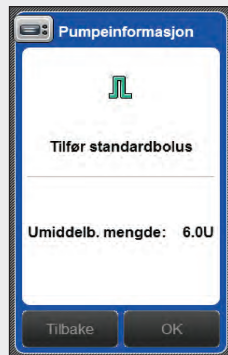


Velg **OK**.

MERK

Hvis du velger **Tilbake**,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
det tilføres noen bolus.



5

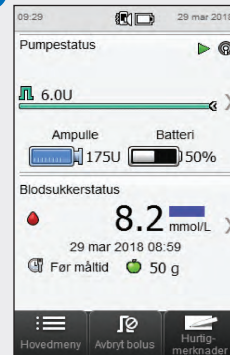


Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.

6.2 Programmere og tilføre en utvidet bolus


Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Utvidet bolus

1

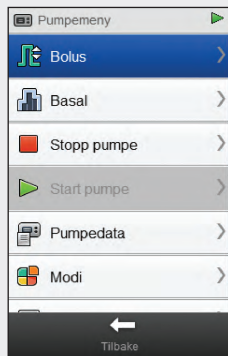


Velg **Bolus** fra Pumpemeny.

2

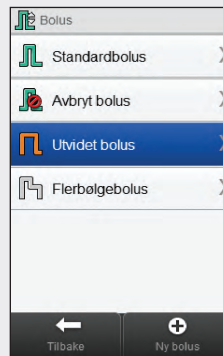


Velg **Utvidet bolus**.

3

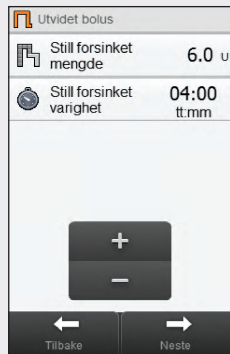

Innstill **forsinket mengde** og **forsinket varighet**.
Velg **Neste**.

4

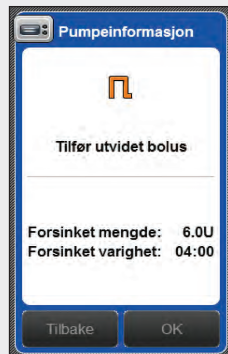


Velg **OK**.

MERK

Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at det tilføres noen bolus.



5

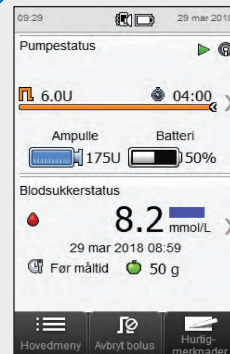


Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

6.3 Programmere og tilføre en flerbølgebolus


Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Flerbølgebolus

1

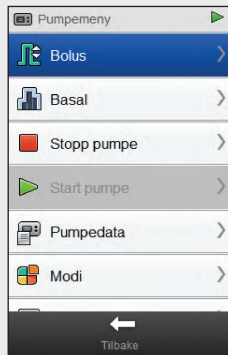


Velg **Bolus** fra Pumpemeny.

2

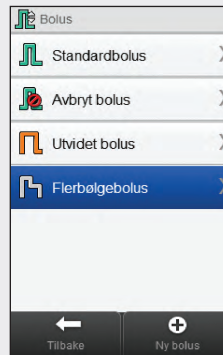


Velg **Flerbølgebolus**.

3

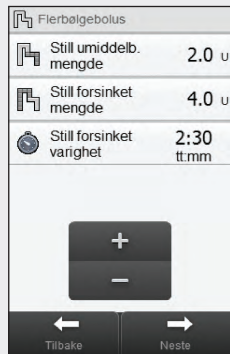

Innstill **umiddelbar mengde**, **forsinket mengde** og **forsinket varighet**.
Velg **Neste**.

4

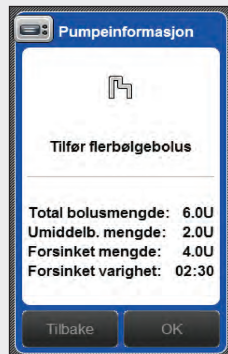


Velg **OK**.

MERK

Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at det tilføres noen bolus.



5

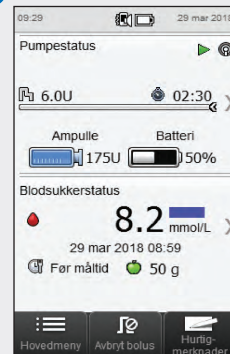

Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

6.4 Programmere og tilføre en egendefinert bolus


Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Egendefinert bolus

MERK

- ▶ Hvis du har aktivert funksjonen for forsinkelsestid på pumpen, kan du justere **forsinkelsestid** for hver bolustype når du oppretter en egendefinert bolus.
- ▶ Når forsinkelsestid er innstilt, blir det bare brukt på den gjeldende bolustilførselen og blir ikke lagret med de andre innstillingene for en egendefinert bolus.




1

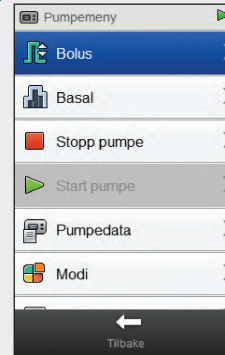


Velg **Bolus** fra **Pumpemeny**.

2

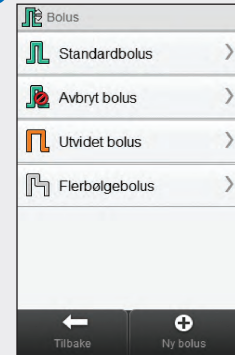


Velg **+** **Ny bolus**.

3

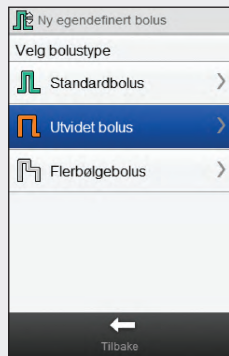

Velg bolustypen for den egendefinerte bolusen (Standardbolus, Utvidet bolus eller Flerbølgebolus).


4

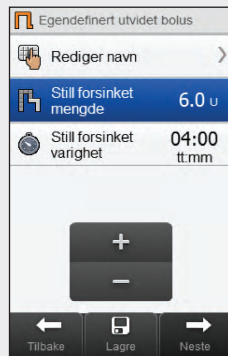

Endre innstillingene for den valgte bolustypen.


Bolustype	Innstillinger
Egendefinert standardbolus	Still umiddelbar mengde.
Egendefinert utvidet bolus	Still forsinket mengde og Still forsinket varighet.
Egendefinert flerbølgebolus	Still umiddelbar mengde, Still forsinket mengde og Still forsinket varighet.

5

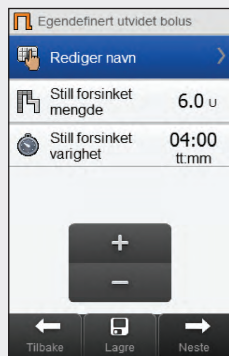


Velg **Rediger navn**.

6

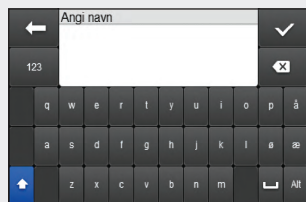

Skriv inn navnet du vil bruke på egendefinert bolus. Velg ✓.

7

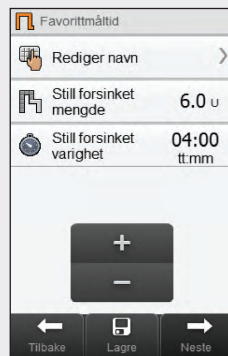

Velg **Neste** for å tilføre bolusen, eller **Lagre** for å lagre bolusen for fremtidig bruk uten å tilføre den med det samme.

MERK

- ▶ Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at det tilføres noen bolus.
- ▶ Lagrede egendefinerte boluser vises i listen over tilgjengelige boluser i menyen **Bolus** og på pumpen.




8



Velg **OK** for å tilføre bolusen.

9

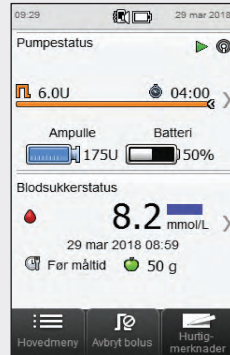


Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser **Status**-skjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

6.5 Slette en egendefinert bolus


Hovedmeny > Pumpe > Bolus

1

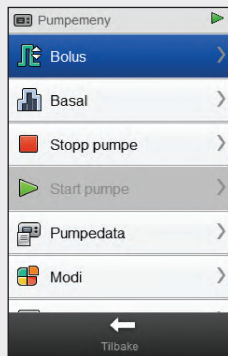


Velg **Bolus** fra Pumpemeny.

2

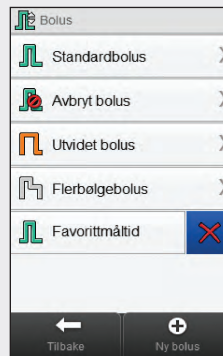

Velg **X** ved siden av den egendefinerte bolusen du vil slette.

3

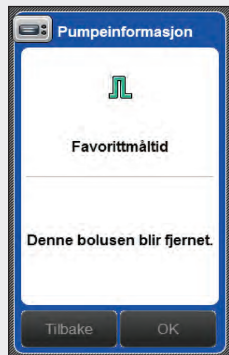


Velg **OK**.

6.6 Avbryte en bolus

6.6.1 Avbryte en bolus fra statusskjermbildet


Hovedmeny > Status

1

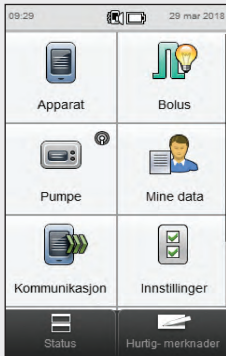


Fra hovedmenyen velger du  **Status**.

2

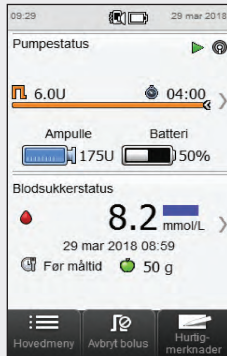

Velg  **Avbryt bolus**.

3

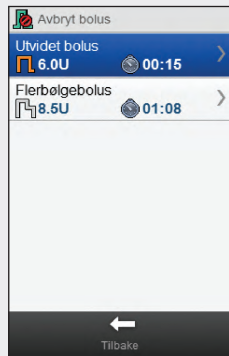

Velg bolusen du vil avbryte.



MERK

Hvis kun én bolus tilføres, hopper apparatet over trinn 3. Gå videre til trinn 4.

4



Velg **OK**. Bolustilførselen blir avbrutt.




MERK


Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at bolusen avbrytes.

6.6.2 Avbryte en bolus fra Pumpemeny

Hovedmeny > Pumpe > Bolus

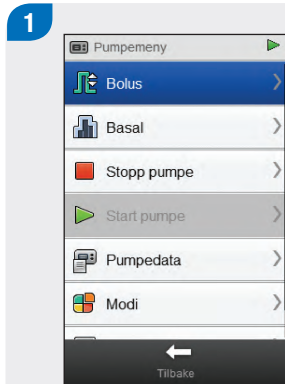


Velg **Bolus** fra Pumpemeny.

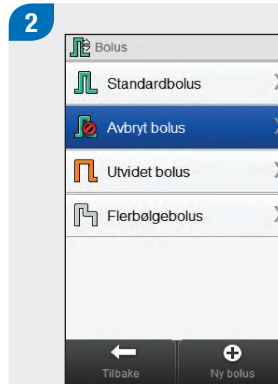

Velg **Avbryt bolus**.

3

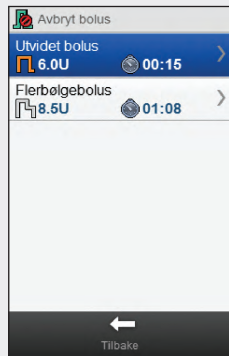

Velg bolusen du vil avbryte.



MERK

Hvis kun én bolus tilføres, hopper apparatet over trinn 3. Gå videre til trinn 4.

4



Velg **OK**. Bolustilførselen blir avbrutt.



MERK

Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at bolusen avbrytes.

6.7 Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd

Når apparatet og pumpen er koblet og bolusråd slått på, kan du programmere og tilføre boluser med pumpen direkte fra menyen **Bolusråd** på apparatet.

Følgende betingelser må være oppfylt før du kan tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd:

- ▶ Apparatet må være koblet med pumpen.
- ▶ Pumpen må være i RUN-modus.
- ▶ Bolusråd må være aktivert på apparatet.

MERK

- ▶ Når apparatet er koblet med pumpen, blir bolusråd beregnet ut fra insulinfølsomheten som er definert i apparatinnstillingene.
- ▶ Hvis du tilfører en bolus direkte på pumpen uten å bruke apparatet, blir den samlede bolusinformasjonen tatt i betraktning ved fremtidige bolusråd. Hvis denne bolusen brukes for matinntak, kan du redigere bolusen i loggboken for å tilordne den andelen av bolusen som ble brukt til karbohydratkorreksjon. Dette sikrer at fremtidige bolusrådanbefalinger beregnes ved bruk av den mest fullstendige informasjonen.
- ▶ Vær tålmodig når du venter på resultater for bolusråd; apparatet behandler mange inndata.
- ▶ Bekreftelsestrinnene er viktige, siden de gjør det mulig for deg å kontrollere nøyaktigheten av informasjonen du la inn for bolusråd.
- ▶ Du finner informasjon om bolusråd i kapittelet **Bolusråd i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.



1




Sett inn en teststrimmel og utfør en blodsuktermåling.

MERK

Du finner informasjon om hvordan du utfører en blodsuktermåling og angir bolusinformasjon fra menyen **Bolusinformasjon** i avsnittet **Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd** i kapittelet **Bolusråd** i bruksanvisningen for **Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.




2

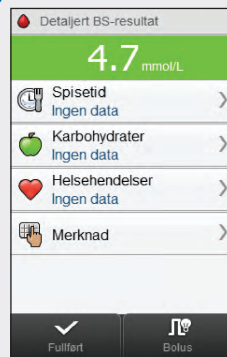

Legg inn informasjonen slik du vanligvis gjør. Velg **Bolus**.

3

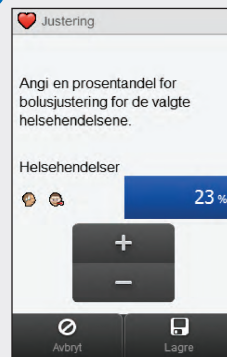

Hvis flere helsehendelser er valgt, viser dette skjermbildet "--- %"; ellers fortsetter du til neste trinn. Du må angi en summert prosentandel for helsehendelser, selv om denne prosentandelen er på null. Velg **Lagre**.

4

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
-1.50 U	
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Helse 23 %	
Bolustype Standard	6.00 U
+ -	
← Tilbake Neste →	

Foreta eventuelle ønskede justeringer av korreksjonsbolusen, karbohydratandelene av bolusen eller den totale bolusen.

MERK

- ▶ Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen mengde for karbohydrater (**Karbohydrater** viser **Ingen data** i trinn 2), bør du vurdere å angi en mengde for karbohydrater. Velg **Tilbake** for å angi en mengde. Du trenger ikke angi en mengde, men jo mer fullstendige dataene er, jo mer nøyaktige vil fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du bruker bolusråd.
- ▶ Hvis du justerer enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
- ▶ Hvis du justerer total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert.
 - Hvis total bolus økes: Korreksjonsbolusen økes tilsvarende.
 - Hvis total bolus reduseres: Måltidsbolusen reduseres tilsvarende. Når måltidsbolusen blir 0, reduseres korreksjonsbolusen tilsvarende.



5

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
-1.50 U	
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Helse 23 %	
Bolustype Standard	6.00 U
+ -	
Tilbake	Neste

Velg **Bolustype** for å endre den valgte bolustypen ved behov, og gå videre til trinn 6. Hvis ikke, gå videre til trinn 7.

6

Bolustype	
☒ Standard	
☐ Utvidet	
☐ Flerbølge	
☐ Penn/sprøyte	
☐ Manuelt på pumpe	
Avbryt Lagre	

Velg ønsket bolustype (standardbolus, utvidet bolus eller flerbølgebolus).

Velg **Lagre**.

MERK

Penn-/sprøyteboluser krever ikke kobling med pumpen og må tilføres manuelt. Du finner mer informasjon om hvordan du tilfører penn-/sprøyteboluser i bruksanvisningen for pennen/sprøyten.




7

Bolus	
8.2 mmol/L	1.00 U
-1.50 U	
Karbohydr. 50 g	5.00 U
Helse 23 %	
Bolustype Standard	6.00 U
+ -	
Tilbake	Neste

Velg **Neste**.

8

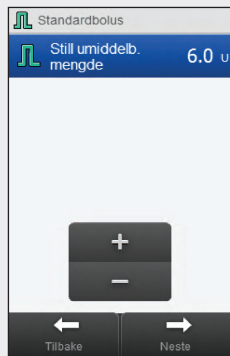


Velg **Neste**.



MERK

Når du stiller inn en flerbølgebolus kan du justere balansen mellom den umiddelbare mengden og den forsinkede mengden, så lenge samlet mengde insulin som tilføres, er lik enhetene som er angitt i det forrige trinnet. Den umiddelbare mengden må heller ikke være under anbefalt korreksjonsbolus fra bolusråd.

9

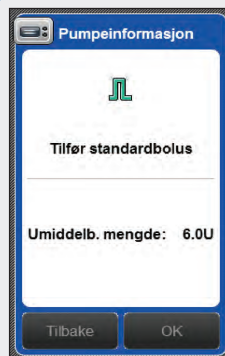


Velg **OK** for å tilføre bolusen.



MERK

Hvis du velger **Tilbake**, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet uten at det tilføres noen bolus.

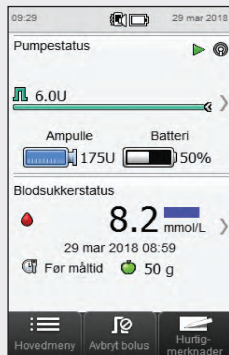

Pumpen tilfører bolusen, og apparatet viser statusskjermbildet, som viser informasjon om gjeldende bolus.

MERK

- ▶ Hvis du valgte bolustypen **Manuelt på pumpe** og apparatet viser **Advarsel W-89** "En manuell bolusverdi er stilt til null", ble ikke den valgte bolusmengden tilført innen 15 minutter, og loggbokoppføringen endres til null enheter tilført insulin. Sjekk om de nyeste loggbokdataene stemmer, og rediger om nødvendig.
- ▶ Hvis du tilførte den valgte **Manuelt på pumpe**-bolusmengden etter mer enn 15 minutter, **eller** hvis du tilførte en annen **Manuelt på pumpe**-bolusmengde, vil apparatet opprette en ny loggbokoppføring neste gang apparatet og pumpen kommuniserer med hverandre. Den nye oppføringen inneholder ikke tidligere informasjon om bolusråd (f.eks. helsehendelser eller mengde karbohydrater). Det er anbefalt å redigere den nye oppføringen for å omfatte denne informasjonen, fordi det kan virke inn på fremtidige bolusrådberegninger.




7 Midlertidig basaldose

7.1 Programmere en primær midlertidig basaldose (MBD)


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose > Primær midlertidig basaldose

1

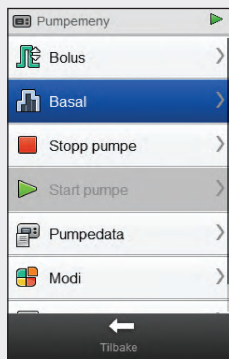


Velg **Basal** fra Pumpemeny.

2

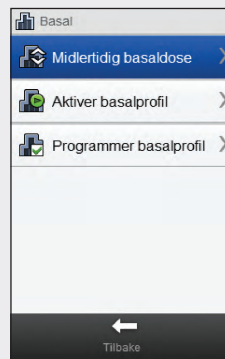


Velg **Midlertidig basaldose**.

3

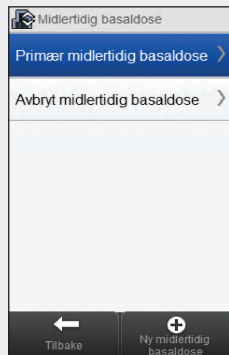


Velg **Primær midlertidig basaldose**.

4

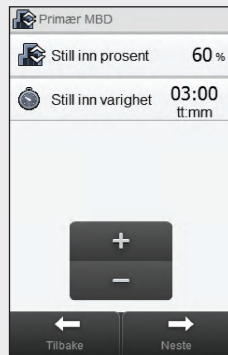


Still inn prosentandelen og varigheten for den primære midlertidige basaldosen.
Velg **Neste**.

5

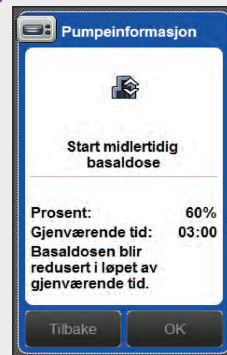

Velg **OK**.

6

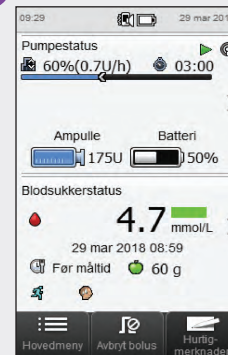


Apparatet viser statusskjembildet med informasjon om gjeldende midlertidige basaldose.

7.2 Programmere eller redigere en egendefinert midlertidig basaldose


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose > Egendefinert midlertidig basaldose

1

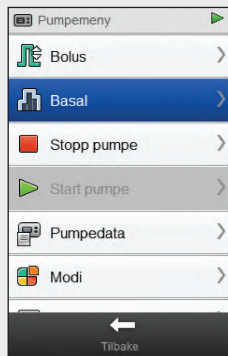


Velg **Basal** fra **Pumpemeny**.

2

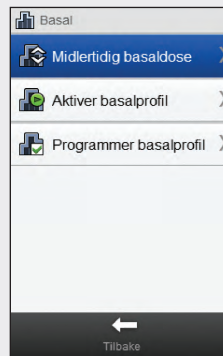

Velg **Midlertidig basaldose**.

3

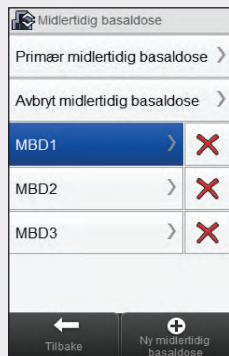


Velg **+** **Ny midlertidig basaldose**, eller velg en eksisterende egendefinert midlertidig basaldose som du vil redigere.

MERK

Egendefinerte midlertidige basaldoser som du allerede har programmert, vises på dette skjermbildet.




4

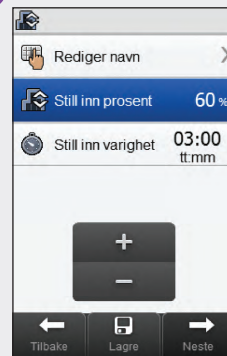


Still inn prosentandelen og varigheten for den egendefinerte midlertidige basaldosen.

5

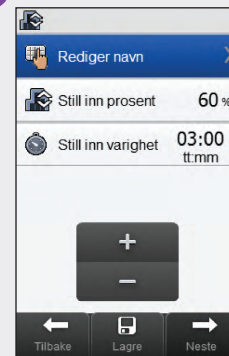


Velg **Rediger navn**.

6

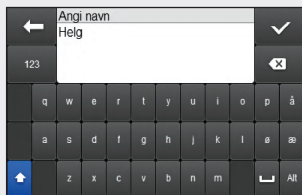


Skriv inn navnet du vil bruke på egendefinert midlertidig basaldose. Velg ✓.

7

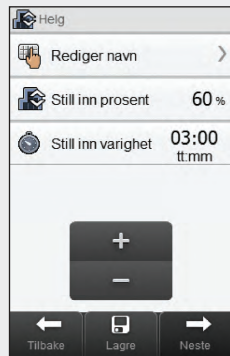


Du kan lagre innstillingene for den egendefinerte midlertidige basaldosen uten å starte den, ved å velge **Lagre**. Hvis ikke, velger du **Neste**.

8

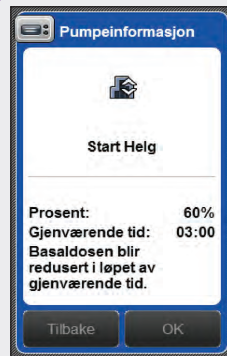

Velg **OK**.

9

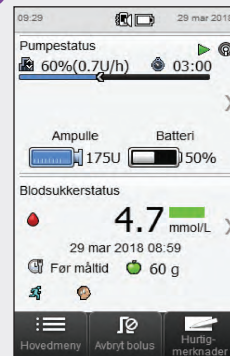


Apparatet viser statusskjembildet med informasjon om gjeldende midlertidige basaldose.

7.3 Avbryte en aktivert midlertidig basaldose


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose

1

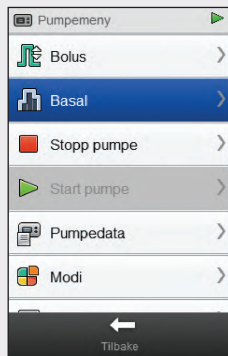

Velg **Basal** fra **Pumpemeny**.

2

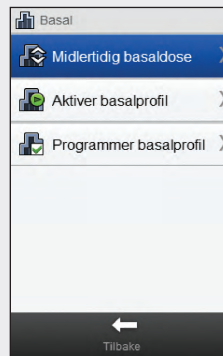


Velg **Midlertidig basaldose**.

3



Velg **Avbryt midlertidig basaldose**.

4

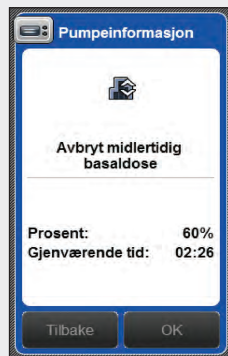


Velg **OK**. Den aktiverte midlertidige basaldosen blir avbrutt.

7.4 Slette en egendefinert midlertidig basaldose


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose

1

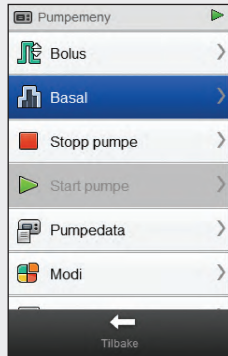

Velg **Basal** fra **Pumpemeny**.

2

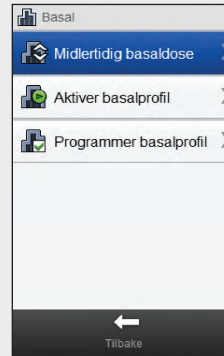

Velg **Midlertidig basaldose**.

3



Velg **X** ved siden av navnet til den midlertidige basaldosen du vil slette.

4



Velg **OK**. Den midlertidige basaldosen slettes.

7.5 Mer informasjon om funksjonen for midlertidig basaldose

Pumpen varsler deg når en midlertidig basaldose er fullført. Du kan deaktivere varslingen hvis du ønsker det.

Hvis ingen midlertidig basaldose er aktivert, settes MBD-prosentsen til 100 %.

Når en midlertidig basaldose er aktivert, fortsetter den å være aktivert selv om basalprofilen endres.

En midlertidig basaldose kan bare programmeres når pumpen er i RUN-modus.

Når en midlertidig basaldose er aktivert, piper og vibrerer pumpen hver time.

Hvis pumpen settes i STOP-modus, avbrytes tilførsel av midlertidig basaldose samt eventuelle andre boluser som tilføres.


Du finner mer informasjon om pumpemeldinger, advarsler og feilmeldinger i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.

8 Basalprofiler

8.1 Programmere en basalprofil


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Programmer basalprofil

1

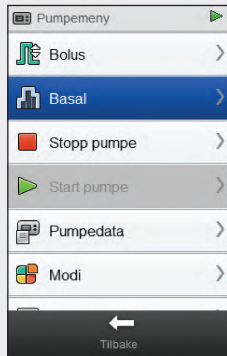

Velg **Basal** fra Pumpemeny.

2

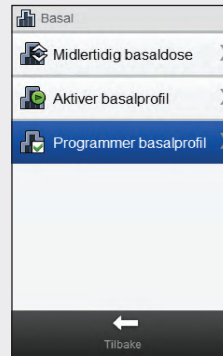


Velg **Programmer basalprofil**.

3




Velg basalprofilen du vil programmere.

4

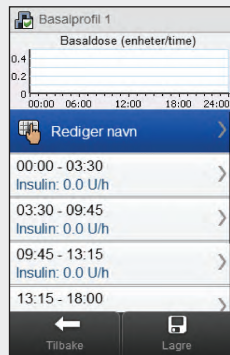


Velg **Rediger navn**.

5

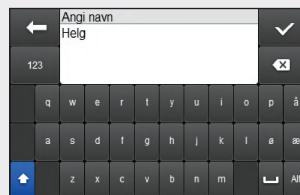

Skriv inn navnet du vil bruke på basalprofilen. Velg ✓.

6

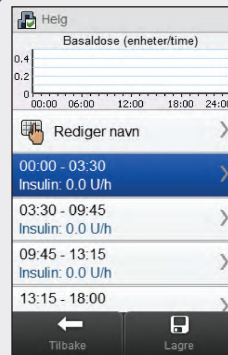

Velg tidsperioden du vil redigere.

7


Still inn **Sluttid** og **Menge** for basaldosen. Velg **Lagre**.
Gjenta dette trinnet for hver tidsperiode du vil redigere.

MERK


- ▶ Du kan bare redigere sluttiden for tidsperioder for basaldoser. Starttiden for hver tidsperiode er lik sluttiden for forrige tidsperiode.
- ▶ Tidsperioder for basaldoser er ikke identiske med og blir ikke delt med tidsperioder for bolusråd.
- ▶ Du kan legge til en ny tidsperiode ved å stille inn sluttiden for siste tidsperiode til ønsket starttid for den nye tidsperioden.
- ▶ Du kan slette en tidsperiode ved å stille inn sluttiden for tidsperioden slik at den blir lik starttiden for tidsperioden.



8

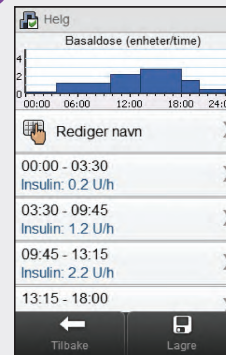

Velg **Lagre**.

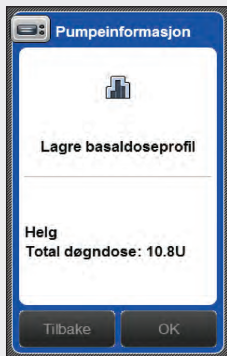

Velg **OK**. Apparatet lagrer endringene i basalprofilen.

MERK


- ▶ Å velge **OK** for å lagre endringene aktiverer **ikke** basalprofilen.
- ▶ Hvis du velger **Tilbake** på et hvilket som helst tidspunkt, går du tilbake til skjermbildet **Tidsperioder for basalprofil**, hvor du kan fortsette å justere innstillingene av den valgte basalprofilen
- ▶ Du finner mer informasjon om basaldoser i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.



8.2 Aktivere en basalprofil


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Aktiver basalprofil

1

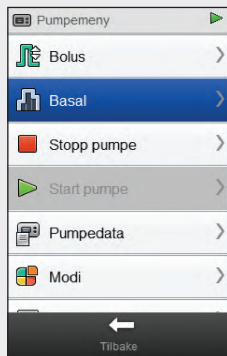


Velg **Basal** fra Pumpemeny.

2

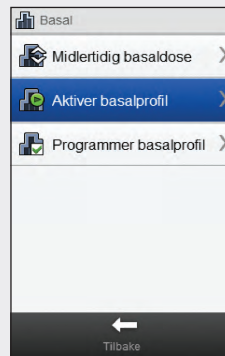


Velg **Aktiver basalprofil**.

3

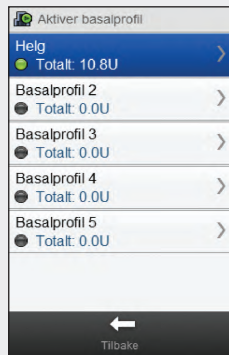

Velg basalprofilen du vil aktivere.

4

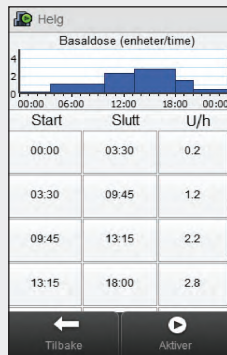

Bla om nødvendig i skjermbildet for å vise alle tidsperiodene for basalprofilen. Velg ► **Aktiver**.

5



Velg **OK**. Den valgte basalprofilen aktiveres umiddelbart.

MERK


Hvis du velger **Tilbake**, avbrytes aktiveringen av den valgte basalprofilen, og du kommer tilbake til det forrige skjermbildet. Den forrige basalprofilen som var aktivert, forblir fortsatt aktivert.



8.3 Fjerne en basalprofil


Hovedmeny > Pumpe > Basal > Programmer basalprofil

1

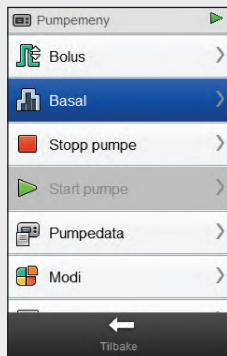

Velg **Basal** fra Pumpemeny.

2

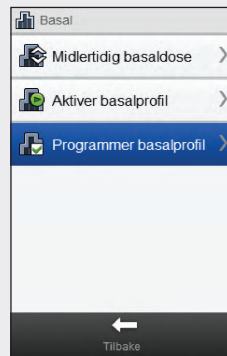


Velg **Programmer basalprofil**.

3



Velg  ved siden av basalprofilen du vil fjerne.

4

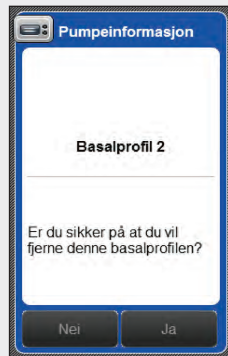

Velg **OK**. Apparatet fjerner alle lagrede innstillinger for den valgte basalprofilen, og du kommer tilbake til skjermbildet Programmer basalprofil.

MERK

Ved å velge **Tilbake** på et hvilket som helst tidspunkt går du tilbake til skjermbildet **Programmer basalprofil** uten å fjerne den valgte basalprofilen.




9 Bruke modi

9.1 Endre pumpens signalmodus


Hovedmeny > Pumpe > Modi > Signalmodus

1

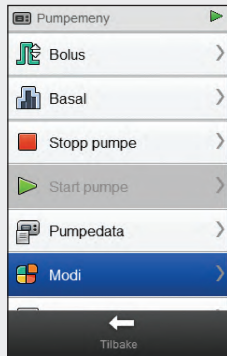


Velg **Modi** fra Pumpemeny.

2

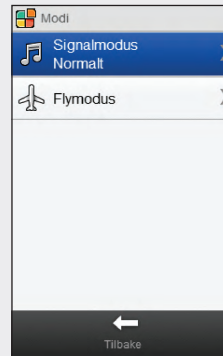

Velg **Signalmodus**.

3

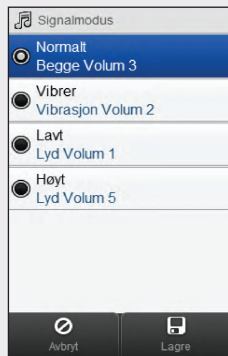

Trykk på alternativknappen på venstre side av skjermen for å aktivere en modus.

Trykk på modusens navn for å endre innstillingene for den.


MERK

Du finner informasjon om pumpens ulike signalmodi i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen.**




9.2 Slå på flymodus

Hovedmeny > Flymodus

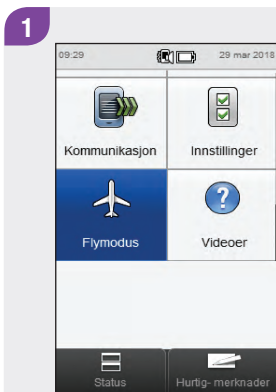

Velg **Flymodus** fra hovedmenyen.

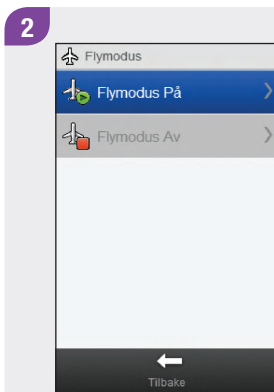

Velg **Flymodus På**.



Velg **OK**. Kommunikasjon blir deaktivert på både apparatet og pumpen. Kontroller at symbolet ✈ vises på pumpen.

MERK


Du kan ikke slå av flymodus igjen på pumpen ved å bruke apparatet. Se **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen** for instruksjoner om hvordan du slår av flymodus på pumpen.



9.3 Slå av flymodus


Hovedmeny > Flymodus

1

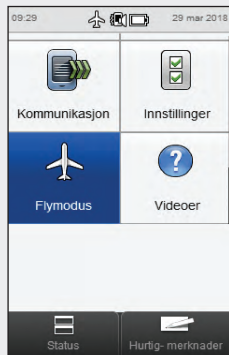


Velg **Flymodus** fra hovedmenyen.

2

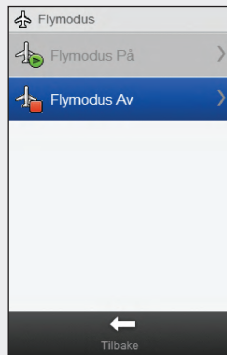

Velg **Flymodus Av**.

3

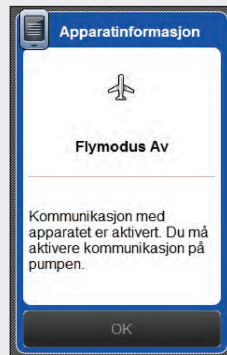

Velg **OK**.

MERK

Se bruksanvisningen for **Accu-Chek Insight-insulinpumpen** for instruksjoner om hvordan du slår av flymodus på pumpen.



10 Pumpeinnstillinger

Du kan endre mange av pumpeinnstillingene med apparatet. Dette er de samme innstillingene som vises i menyen Innstillinger på pumpen. Disse innstillingene er:

- ▶ Påminnelser
- ▶ Enhetsinnstillinger
- ▶ Behandlingsinnstillinger
- ▶ Dato og klokkeslett

Disse innstillingene lagres på pumpen og forblir aktivert selv om apparatet og pumpen er frakoblet eller apparatet er slått av.

Du finner detaljerte forklaringer på pumpepåminnelser, enhetsinnstillinger og behandlingsinnstillinger i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.

10.1 Pumpepåminnelser

Du kan stille inn pumpepåminnelser med apparatet. Det er 4 typer pumpepåminnelser:

- ▶ Tilfør bolus
- ▶ Manglende bolus
- ▶ Alarmklokke
- ▶ Bytte infusjonssett

Hver av påminnelsestypene Tilfør bolus, Manglende bolus og Alarmklokke har opptil 5 påminnelser. Påminnelsestypen Bytte infusjonssett inneholder bare 1 påminnelse om å bytte pumpens infusjonssett til et angitt tidspunkt.

MERK


- ▶ Påminnelser lagres på pumpen og vises på pumpen selv om apparatet og pumpen er frakoblet.
- ▶ Påminnelser vil ikke automatisk slå på apparatet og vise påminnelsen. Pumpen varsler deg om en påminnelse. Slå på apparatet eller pumpen for å vise påminnelsen og slå av varselet.
- ▶ Når en pumpepåminnelse vises på apparatet, kan du trykke på **Demp** for å dempe påminnelsen i 60 sekunder. Trykk på **Avvis** for å avvise påminnelsen permanent.



10.1.1 Stille inn pumpepåminnelser


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Påminnelser

1

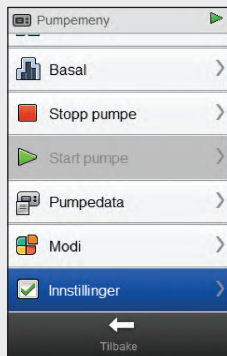


Fra **Pumpemenyen** blar du i skjermbildet og velger **Innstillinger**.

2

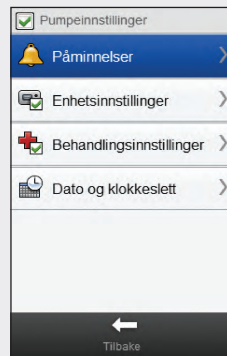


Velg **Påminnelser**.

3

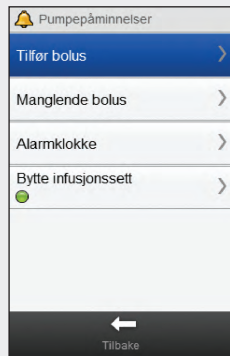


Velg påminnelsestypen du vil stille inn.

4

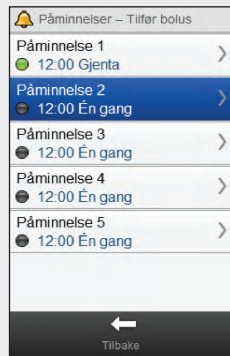


Velg en påminnelse.

5

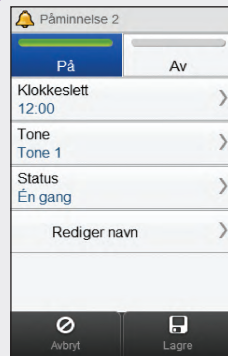


Velg **På** for å slå på påminnelsen.

6

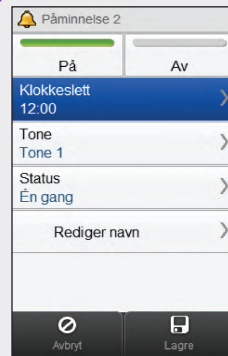


Velg **Klokkeslett**.

7

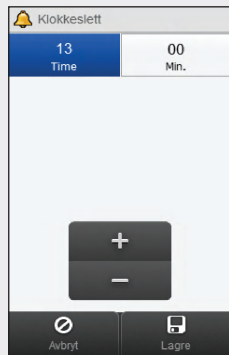

Still inn klokkeslettet.
Velg **Lagre**.

8

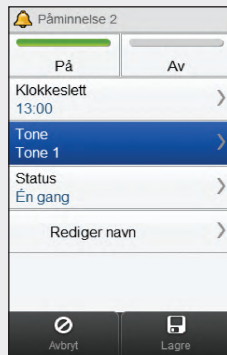

Velg **Tone**.

9




Velg tonen som skal brukes
for påminnelsen. Velg **Lagre**.

MERK

Du kan lytte til en
påminnelsestone ved å
velge 🎵 ved siden av den.




10

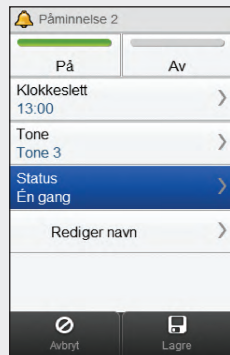

Velg **Status**.


11

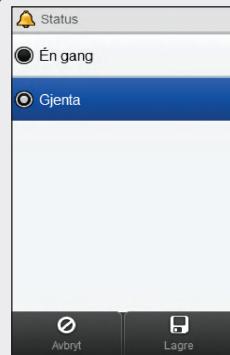

Velg ønsket status.
Velg **Lagre**.


Alternativ	Beskrivelse
En gang	Pumpen spiller påminnelsestonen med start på et valgt tidspunkt inntil påminnelsen dempes, hvoretter pumpen så spiller påminnelsestonen igjen etter 60 sekunder, eller avvises, hvoretter påminnelsestonen i så fall ikke spilles igjen med mindre du slår på påminnelsen igjen fra menyen Pumpepåminnelser.
Gjenta	Pumpen spiller påminnelsestonen med start på et valgt tidspunkt inntil påminnelsen dempes, hvoretter pumpen så spiller påminnelsestonen igjen etter 60 sekunder, eller avvises, hvoretter påminnelsen gjentas hver dag på det valgte tidspunktet inntil påminnelsen slås av fra menyen Pumpepåminnelser.

12

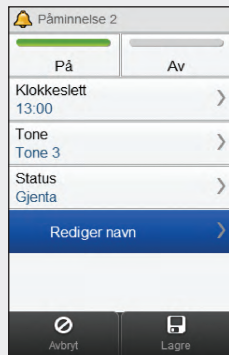


Velg **Rediger navn**.

13

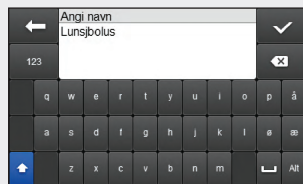

Skriv inn navnet du vil bruke
på påminnelsen.
Velg ✓.

14

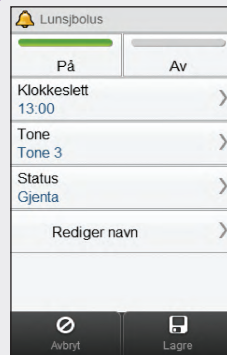


Velg **Lagre**.

10.1.2 Stille inn påminnelsen om å bytte infusjonssett


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Påminnelser > Bytte infusjonssett

1

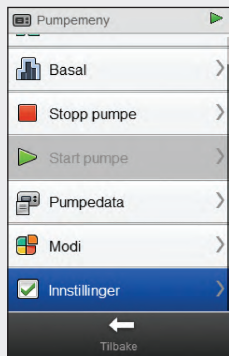


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

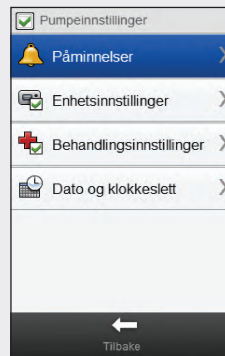

Velg **Påminnelser**.

3

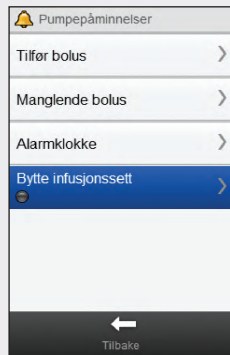


Velg **Bytte infusjonssett**.

4




Velg **På** for å slå på påminnelsen om å bytte infusjonssett.

5

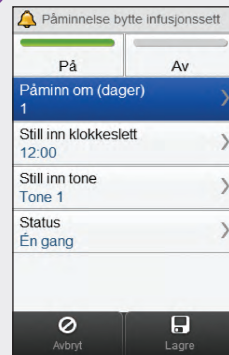

Velg **Påminn om (dager)**.

6

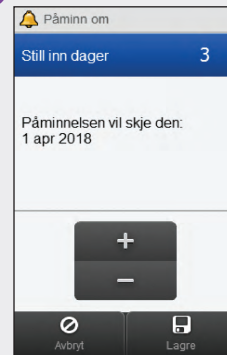

Angi hvor mange dager påminnelsen skal forekomme. Velg **Lagre**.

MERK

Påminnelsen kan stilles inn for 1 dag, 2 dager eller 3 dager.



7

Påminneise bytte infusjonssett

På Av

Påminn om (dager) 3

Still inn klokkeslett 12:00

Still inn tone Tone 1

Status En gang

Avbryt Lagre

Velg **Still inn klokkeslett**.

8

Klokkeslett

13 Time 00 Min.

+

-

Avbryt Lagre

Still inn tidspunktet på dagen når påminnelsen skal forekomme. Velg **Lagre**.

9

Påminneise bytte infusjonssett

På Av

Påminn om (dager) 3

Still inn klokkeslett 13:00

Still inn tone Tone 1

Status En gang

Avbryt Lagre

Velg **Still inn tone**.

10




Velg tonen som skal brukes for påminnelsen. Velg **Lagre**.

MERK

Du kan lytte til en påminnelsetone ved å velge  ved siden av den.




11

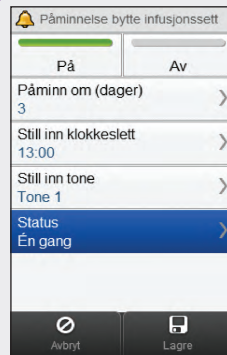

Velg **Status**.

12

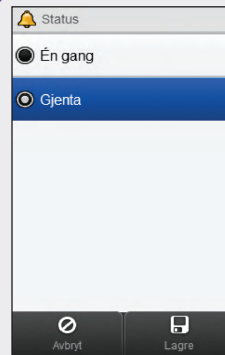

Velg ønsket status.
Velg **Lagre**.

13

 Påminnelse bytte infusjonssett

På

Av

Påminn om (dager)

3

>

Still inn klokkeslett

13:00

>

Still inn tone

Tone 1

>

Status

Gjenta

>

 Avbryt

 Lagre

Velg **Lagre**.

10.2 Behandlingsinnstillinger

Du kan endre pumpens behandlingsinnstillinger fra apparatet.
Disse innstillingene er:

- ▶ Automatisk Av
- ▶ Bolus
- ▶ Infusjonssett
- ▶ Varselnivå for ampulle




ADVARSEL

Det er svært viktig at du bruker riktige behandlingsinnstillinger. Hvis ikke kan du få feil mengde insulin, med risiko for hypo- eller hyperglykemi. Du får behandlingsinnstillingene av legen/ diabetessykepleieren din, og du bør rådføre deg med dem før du foretar endringer.


10.2.1 Stille inn tidtakeren for Automatisk Av

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Automatisk Av

Automatisk Av er en sikkerhetsfunksjon som stopper insulintilførselen og utløser en vedlikeholdsmelding hvis det ikke er trykket på noen pumpetaster eller ikke er sendt noen kommandoer til pumpen fra apparatet i løpet av en innstilt tidsperiode. Du finner mer informasjon om funksjonen Automatisk Av i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.

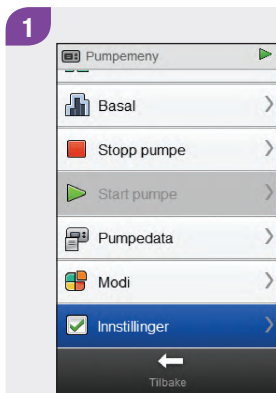


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

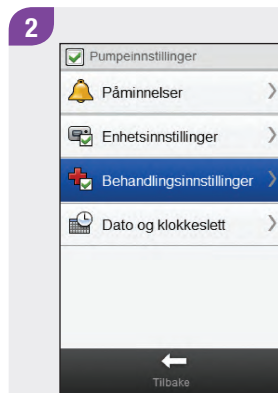

Velg **Behandlingsinnstillinger**.

3

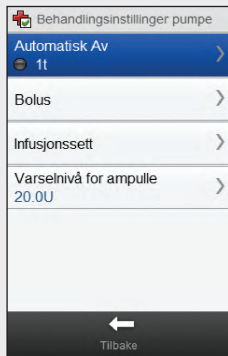

Velg **Automatisk Av**.

4



Velg **På** for å slå på
tidtakeren for Automatisk Av.

5



Still inn tiden.
Velg **Lagre**.


10.2.2 Bolusinnstillinger

Du kan endre bolusinnstillingene på pumpen med apparatet. Disse innstillingene er:

- ▶ Bolustrinn for hurtig bolus
- ▶ Tilførselshastighet
- ▶ Maksimal bolusmengde
- ▶ Forsinkelsesinnstilling


Se avsnittene **Stille inn bolustrinn for hurtig bolus**, **Stille inn tilførselshastighet**, **Stille inn maksimal bolusmengde** og **Endre forsinkelsesinnstilling** hvis du trenger anvisninger om endring av bolusinnstillinger.

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger >
Behandlingsinnstillinger > Bolus

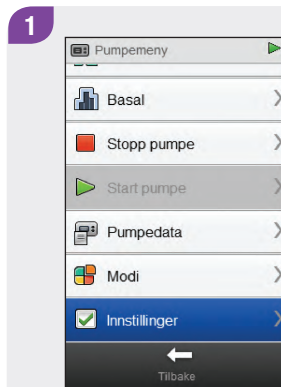


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

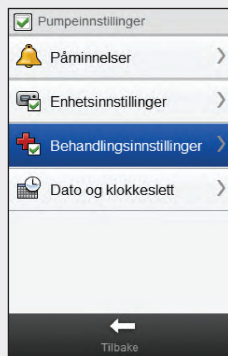

Velg **Behandlingsinnstillinger**.

3

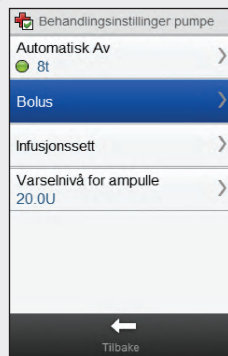

Velg **Bolus**.

Stille inn bolustrinn for hurtig bolus


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Bolustrinn for hurtig bolus

MERK

Innstillingen Bolustrinn for hurtig bolus endrer hvor mye insulin som legges til den totale mengden for en hurtig bolus ved hvert trykk på pumpetastene.



1

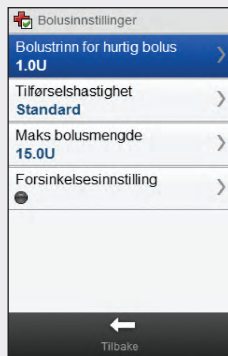

Velg **Bolustrinn for hurtig bolus** fra menyen **Bolusinnstillinger**.



ADVARSEL

Forsikre deg om at du kjenner til og bruker riktig bolustrinn. Bruk av feil bolustrinn vil tilføre feil insulindose.

2




Velg det riktige bolustrinnet for hurtig bolus. Velg **Lagre**.

Stille inn tilførselshastighet


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Tilførselshastighet

1

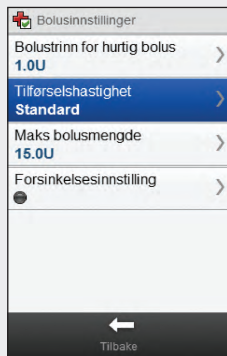

Velg **Tilførselshastighet** fra menyen **Bolusinnstillinger**.

2

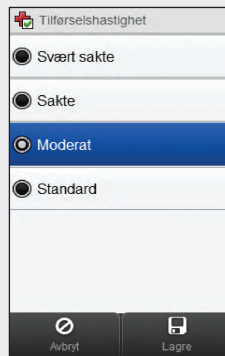


Velg den riktige tilførselshastigheten.
Velg **Lagre**.

Stille inn maksimal bolusmengde


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Maks bolusmengde

1

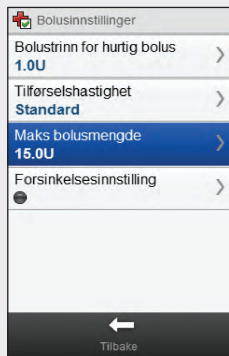

Velg **Maks bolusmengde** fra menyen **Bolusinnstillinger**.

2

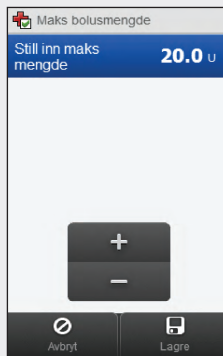


Still inn den maksimale mengden. Velg **Lagre**.

Endre forsinkelsesinnstillingen


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Forsinkelsesinnstilling

1

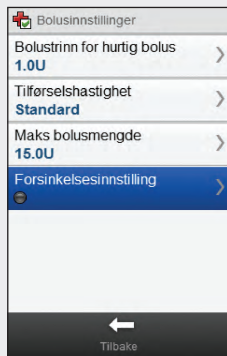

Velg **Forsinkelsesinnstilling** fra menyen **Bolusinnstillinger**.


2

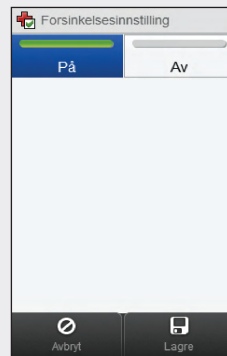

Velg **På** eller **Av** etter behov.
Velg **Lagre**.

MERK

Når forsinkelsestid er slått på, kan du stille inn forsinkelsestiden hver gang du programmerer en ny bolus.

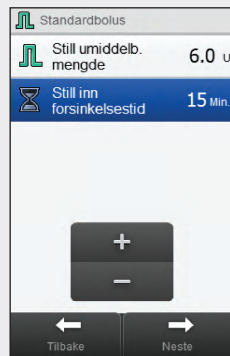

Når du programmerer bolusmengde (for standardbolus) eller bolusmengde og forsinket varighet (utvidet bolus eller flerbølgebolus), vises også **Still inn forsinkelsestid**.


Juster standard forsinkelsestid ved å bruke **Still inn forsinkelsestid**.

Velg **Neste**.

10.2.3 Endre innstillinger for infusjonssett


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Infusjonssett

1

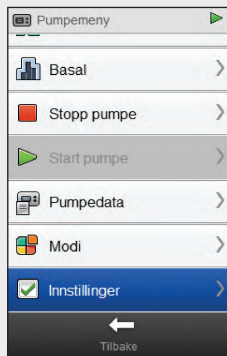


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

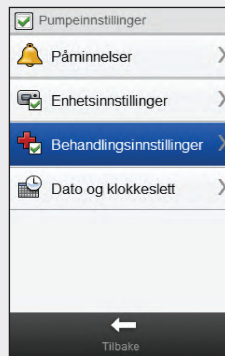


Velg **Behandlingsinnstillinger**.

3

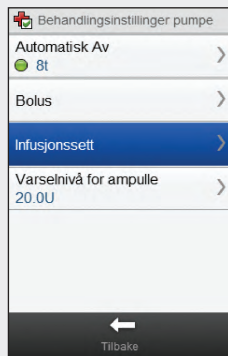

Velg **Infusjonssett**.

4

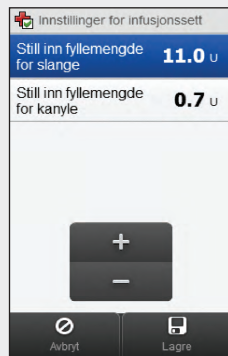


Innstill fyllemengde for slange og fyllemengde for kanyle. Velg **Lagre**.

10.2.4 Stille inn varselnivå for ampulle


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Varselnivå for ampulle

1

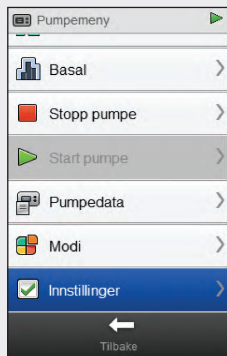


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

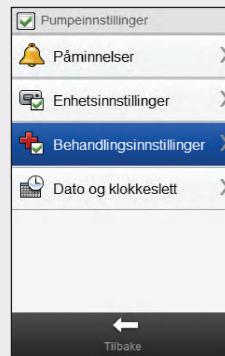


Velg **Behandlingsinnstillinger**.

3

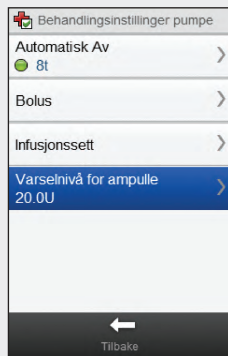

Velg **Varselnivå for ampulle**.

4

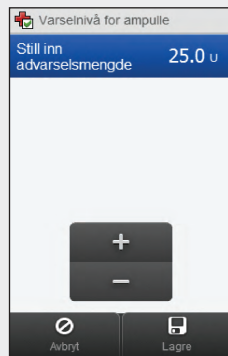

Still inn advarselmengden.
Velg **Lagre**.

10.3 Enhetsinnstillinger

Du kan endre pumpens enhetsinnstillinger fra apparatet. Disse innstillingene er:


- ▶ Modusinnstillinger
- ▶ Tastelås
- ▶ Språk

10.3.1 Pumpesignalmodi: Lyd og vibrasjon

Du kan bruke apparatet for å velge om du vil at pumpen skal signalisere med lyd, vibrasjon eller begge deler samtidig når det oppstår en hendelse (for eksempel en påminnelse). Du kan justere lydvolumet.


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Modusinnstillinger

1

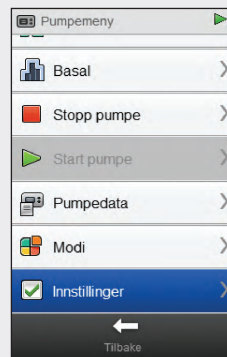


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

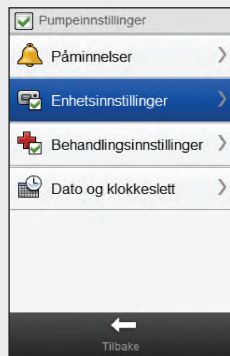


Velg **Enhetsinnstillinger**.

3

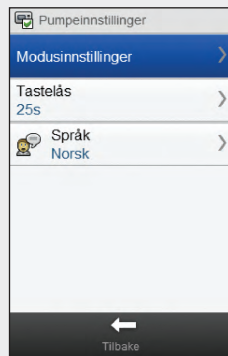


Velg **Modusinnstillinger**.

4

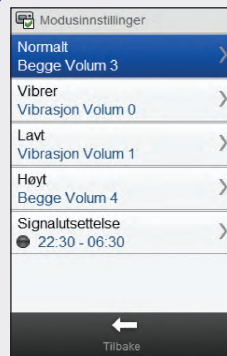


Velg en modus.

5

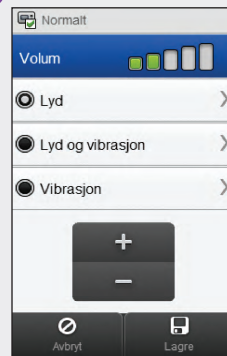

Velg ønsket modusinnstilling.
Still inn volumet. Velg **Lagre**.

6

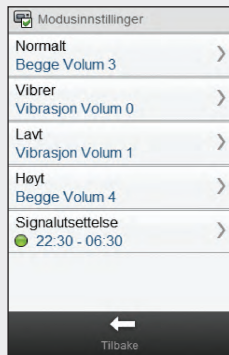

Gjenta trinn 4 og 5 for å endre innstillinger for flere modi etter behov. Velg **Tilbake** når du er ferdig.

10.3.2 Pumpesignalmodi: Signalutsettelse

Du kan utsette signalene for advarsler for en bestemt tidsperiode. Men siden feilmeldinger og vedlikeholdsmeldinger krever din oppmerksomhet straks, kan du ikke utsette hendelsessignaler for feil eller vedlikehold. Og påminnelser du har programmert, blir ikke utsatt.

En signalutsettelse kan stilles inn til å forekomme én gang, eller den kan stilles inn for å gjentas samtidig hver dag.


MERK

Eventuelle advarsler som forekommer i perioden når signalutsettelse er aktivert, vises når apparatet slås på.




Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Modusinnstillinger > Signalutsettelse

1

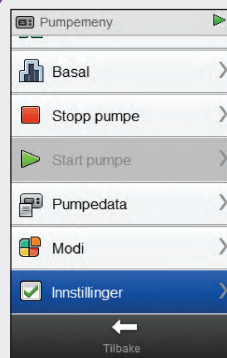


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.


2

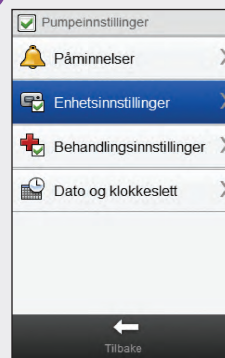


Velg **Enhetsinnstillinger**.

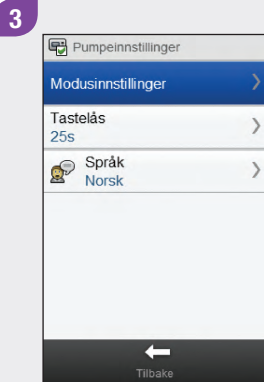

Velg **Modusinnstillinger**.

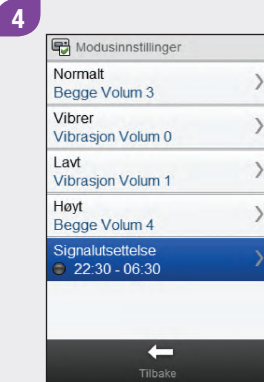

Velg **Signalutsettelse**.

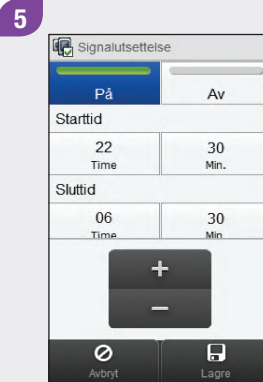

Velg **På** eller **Av**. Still inn **Starttid** og **Sluttid**. Bla gjennom skjermbildet og velg enten **Én gang** eller **Gjenta**. Velg **Lagre**.




Velg **Tilbake**.

10.3.3 Stille inn tid for tastelås


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Tastelås

1

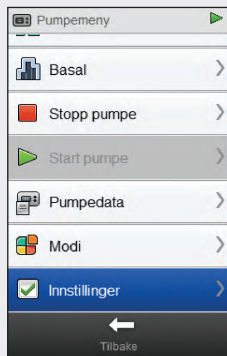


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

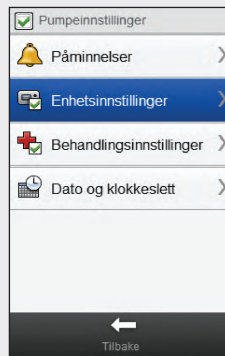


Velg **Enhetsinnstillinger**.

3

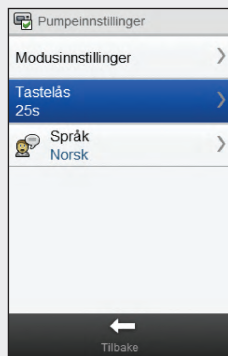

Velg **Tastelås**.

4

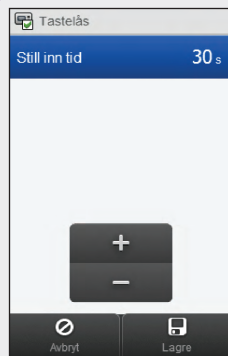

Still inn tiden for tastelås.
Velg **Lagre**.

MERK


- ▶ Pumpens taster låses automatisk hvis de ikke har vært brukt i løpet av tiden som er angitt med tastelås-innstillingen.
- ▶ Tastelåsen påvirker kun manuell bruk av pumpen, selv om tiden for tastelås er innstilt med apparatet.



10.3.4 Stille inn pumpespråk


Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Språk

1

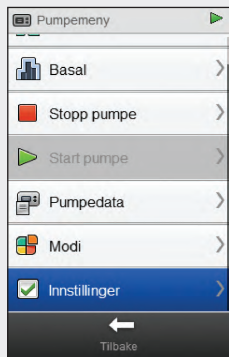


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.


2

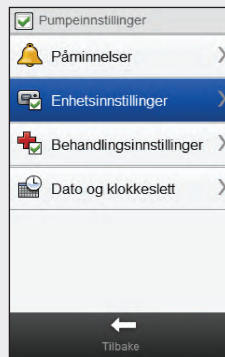

Velg **Enhetsinnstillinger**.

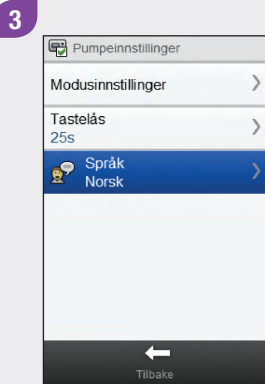

Velg **Språk**.

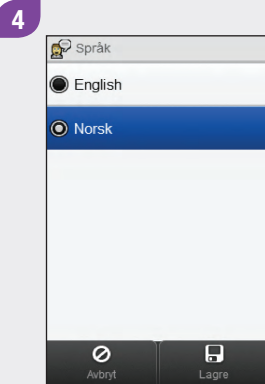

Velg ønsket språk.
Velg **Lagre**.

10.4 Stille inn pumpens dato og klokkeslett

Du kan stille inn pumpens dato og klokkeslett med apparatet.

MERK

Det er veldig viktig at du stiller inn riktig dato og klokkeslett. Hvis ikke, vil du kanskje ikke motta riktig mengde insulin til riktig tid.


Når apparatet er koblet med pumpen, endres dato og klokkeslett automatisk på pumpen når dato og klokkeslett endres på apparatet.

Når du har endret dato eller klokkeslett, viser apparatet en melding om at dato og klokkeslett er blitt oppdatert på både apparatet og pumpen. Velg **OK**.




Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Dato og klokkeslett

1

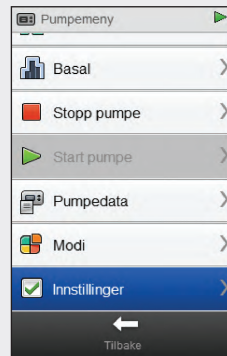


Velg **Innstillinger** fra Pumpemeny.

2

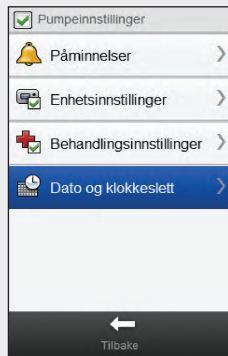


Velg **Dato og klokkeslett**.

3

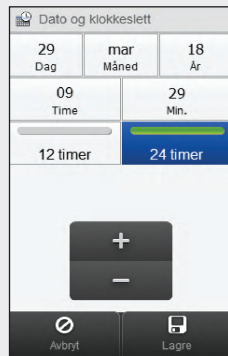

Velg ønsket tidsformat
(12 timer eller 24 timer).

4

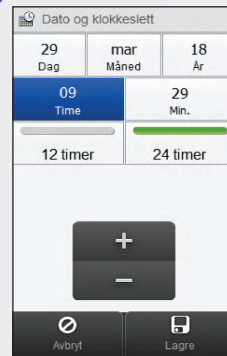

Still inn dato og klokkeslett.
Velg **Lagre**.

11

Mine data

11.1 Oversikt

Ved å analysere informasjonen som er lagret i apparatet, får du og legen/diabetessykepleieren din en effektiv metode for å finne ut hvor godt du kontrollerer din diabetes. Denne analysen er et verdifullt verktøy for å gi deg bedre kontroll over din diabetes. Rapportene fra apparatet gir deg optimalt utbytte av din Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller.

Apparatet genererer grafer og rapporter for å hjelpe deg å analysere informasjonen som er lagret i apparatet. Grafer kan være nyttige for å vise blodsukkerresultater. Apparatet kan vise en linjegrav for å illustrere trendene for blodsukkerresultatene sammenlignet med annen informasjon, som din boluslogg, en graf som viser resultatområder for en standard dag eller en standard uke, og et sektordiagram med ulike farger som illustrerer antallet måleresultater innenfor, over eller under ditt blodsuktermålområde.

MERK

- ▶ Gjennomgang av rapporter bruker mye batteristrom. Du anbefales å koble apparatet til adapteren mens du gjennomgår rapporter.
- ▶ Ordet "blodsukker" blir av og til forkortet til BS, men det betyr det samme.



11.2 Loggboken

Fra loggbokoppføringene i apparatet kan du vise et bestemt blodsukkerresultat med tilhørende attributter (f.eks. spisetid, karbohydrater, helsehendelser og bolus). Og du kan også endre eller legge til attributter for en bestemt loggbokoppføring.

MERK

- ▶ Loggboken i apparatet erstatter den fysiske dagboken for blodsukkerresultater som du kanskje har hatt tidligere.
- ▶ Loggbokdata som er brukt for å beregne bolusråd, kan ikke endres.



Apparatet lagrer automatisk opptil 2000 loggbokoppføringer med klokkeslett og dato. Du kan gjennomgå opptil 250 loggbokoppføringer på apparatet eller opptil 2000 loggbokoppføringer ved hjelp av en datamaskin med kompatibel programvare. Loggbokoppføringer lagres i kronologisk rekkefølge, fra den nyeste til den eldste.

Hver loggbokoppføring kan inneholde:


- ▶ Dato og klokkeslett
- ▶ Blodsukkerresultat
- ▶ Spisetid (hendelser)
- ▶ Karbohydratinntak
- ▶ Helsehendelse
- ▶ Bolustype
- ▶ Bolusmengde
- ▶ Merknad
- ▶ Hurtigmerknader

MERK

- ▶ **Du må ikke endre behandlingen bare på grunn av én enkel oppføring eller et enkelt måleresultat i loggboken.**
- ▶ Dette kapittelet viser skjermbildeeksempler. Skjermbildene som vises, kan se litt annerledes ut enn skjermbildene på apparatet ditt. Hvis du har spørsmål om skjermbildene på apparatet, kontakt Roche.
- ▶ Informasjonen i loggboken lagres når du bytter batteriet i apparatet. Du bør kontrollere klokkeslett og dato etter at du har byttet batteriet. Du finner mer informasjon om batteribytte i kapittelet **Håndtering og vedlikehold** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.
- ▶ Det er veldig viktig at klokkeslett og dato er riktig innstilt. Riktig innstilling av klokkeslett og dato vil hjelpe deg og legen/diabetessykepleieren din å tolke informasjonen.
- ▶ Når det er lagret 2000 oppføringer i loggbokens minne, slettes den eldste oppføringen når en ny oppføring lagres.
- ▶ Kontrollresultatene er lagret i apparatet, men de kan ikke vises i loggboken. Kontrollresultater kan vises ved hjelp av en datamaskin med kompatibel programvare.
- ▶ Før du kan gjennomgå loggbokoppføringer eller kontrollresultater på en PC, må de lagrede loggbokoppføringene overføres til en PC som kjører en kompatibel programvare. Ta kontakt med Roche for å få informasjon om tilgjengelige produkter.
- ▶ Kontrollresultater blir ikke brukt i rapporter eller grafer på apparatet.



11.2.1 Bli kjent med loggboken

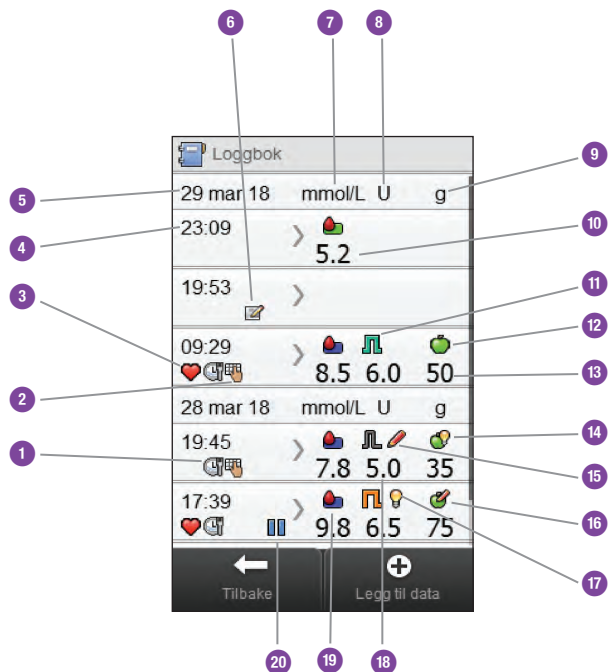

1	Ikon for spisetid
2	Ikon for merknad
3	Ikon for helsehendelse
4	Klokkeslett for oppføring
5	Dato for oppføring
6	Ikon for hurtigmerknader
7	Indikerer kolonnen for blodsukker
8	Indikerer kolonnen for bolus
9	Indikerer kolonnen for karbohydrater
10	Blodsukkerresultat

11	Ikon for bolustype
12	Ikon for karbohydrater
13	Mengde karbohydrater
14	Ikon for godkjent karbohydratråd
15	Ikon for ikke godkjent bolusråd
16	Ikon for ikke godkjent karbohydratråd
17	Ikon for godkjent bolusråd
18	Bolusmengde
19	Ikon for blodsukerverdiområde
20	Pumpe på pause-ikonet

MERK

Skjermbildet [Loggbok](#) viser oppføringene i den rekkefølgen de oppsto, og den nyeste oppføringen vises øverst.



Beskrivelse av ikonene

Ikon	Ikonnavn	Beskrivelse
	Ikon for blodsukerverdiområde	Ikonets bakgrunnsfarge indikerer hvor blodsukkerresultatet faller i forhold til målområdet. Bakgrunnsfargen for dette ikonet representerer: ▶ Grønt: innenfor målområdet ▶ Gult: under målområdet ▶ Rødt: hypo ▶ Blått: over målområdet eller hyper
	Spisetid	Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om spisetid for denne oppføringen.
	Karbohydrater	Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om karbohydrater for denne oppføringen.
	Karbohydratråd godkjent	Dette ikonet vises hvis karbohydratmengden fra bolusrådanbefalingen fra skjermbildet for hypoadvarsel ble brukt.

Ikon	Ikonnavn	Beskrivelse
	Karbohydratråd ikke godkjent	Dette ikonet vises hvis karbohydratmengden fra bolusrådanbefalingen fra skjermbildet for hypoadvarsel ble endret.
	Helsehendelse	Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om helsehendelser for denne oppføringen.
	Standardbolus ikke bekreftet	Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.
	Standardbolus bekreftet	Tilførsel er bekreftet av pumpen.
	Utvidet bolus ikke bekreftet	Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.
	Utvidet bolus bekreftet	Tilførsel er bekreftet av pumpen.
	Flerbølgebolus ikke bekreftet	Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.
	Flerbølgebolus bekreftet	Tilførsel er bekreftet av pumpen.


Ikon	Ikonnavn	Beskrivelse
	Bolusråd godkjent	Bolusråd fra apparatet er godkjent.
	Bolusråd ikke godkjent	Bolusråd fra apparatet ble endret før tilførsel.
	Manuelt på pumpe	Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.
	Bolus tilført manuelt med penn/sprøyte	Bolus tilført med penn/sprøyte. Bolus ble ikke tilført av pumpen.
	Pumpe på pause	Pumpen ble satt på pause under en bolus og startet deretter å fullføre bolustilførselen igjen.
	Hurtigmerknader	Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om hurtigmerknader for denne oppføringen.
	Merknad	Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om en merknad for denne oppføringen.

11.2.2 Vise og justere loggbokdata


Hovedmeny > Mine data > Loggbok

MERK

- ▶ Loggbokdata som er brukt til bolusråd (med unntak av merknader), kan ikke justeres.
- ▶ Blodsukkerresultater kan ikke justeres.
- ▶ Når du begynner å tilføre en bolus ved hjelp av pumpen, vil ikke eventuelle endringer du gjør i loggbokoppføringen i Mine data på apparatet føre til at bolusen som tilføres av pumpen, blir endret.

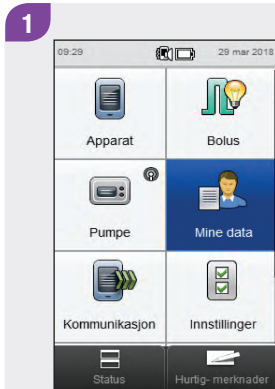

Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

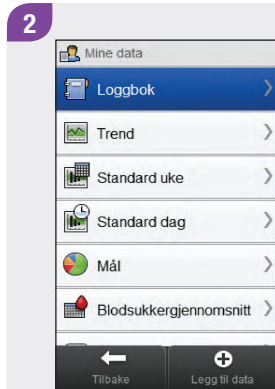

Velg **Loggbok**.

3

Loggbok				
29 mar 18	mmol/L	U	g	
23:09	>	5.2		
19:53	>			
09:29	>	8.5	6.0	50
28 mar 18	mmol/L	U	g	
19:45	>	7.8	5.0	35
17:39	>	9.8	6.5	75
Tilbake Legg til data				

Velg ønsket loggbokoppføring. Hvis du ønsker en loggbokoppføring med bare hurtigmerknader, går du til trinn 5.

MERK

- ▶ Du kan rulle nedover for å se eventuelle flere oppføringer.
- ▶ Loggbokoppføringer som har vært brukt til bolusråd, har enten ikonet for Bolusråd godkjent:  eller ikonet for Bolusråd ikke godkjent: . Slike oppføringer er låst og kan vises, men ikke justeres.
- ▶ For låste loggbokoppføringer vises ikke knappen **Lagre** nederst på de enkelte dataelementskjerm bildene. Kun knappen **Tilbake** vises.



4

BG-oppføring		09:29 29 mar 18
8.5 mmol/L		
	Spisetid Før måltid	>
	Karbohydrater 50 g	>
	Helsehendelser Mosjon 1, Mosjon 2, Str...	>
	Bolus 6.0 U	>
	Merknad	>
Tilbake		

Du kan vise eller justere en oppføring ved å velge den og følge instruksjonene på de neste sidene. Velg **Tilbake** når du er ferdig for å komme tilbake til menyen **Mine data**.


Skjermbilder for visning og justering av oppføringer i loggboken

Spisetid




Velg en passende spisetid.
Velg **Lagre**.

Karbohydrater

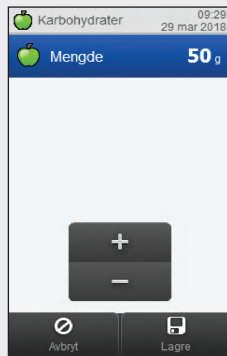


Still inn mengden
karbohydrater du har spist.
Velg **Lagre**.

Helsehendelser

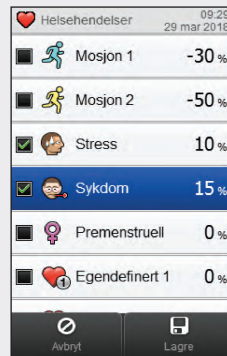


Du kan velge opptil 4
helsehendelser.
Velg **Lagre**.

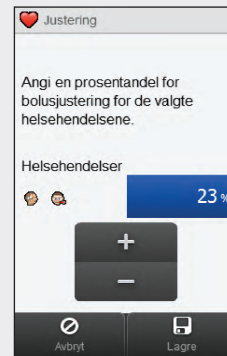

Hvis bolusråd er slått på og flere helsehendelser er valgt, viser dette skjermbildet "--- %". Du må angi en summert prosentandel for de valgte helsehendelsene, selv om denne prosentandelen er på null. Velg **Lagre**.

Bolus

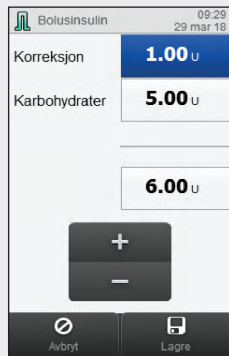


Innstill bolusmengder.
Velg **Lagre**.

MERK

Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen mengde for karbohydrater (**Karbohydrater** viser **Ingen data** på skjermbildet **BG-oppføring** i trinn 4), blir du bedt om å angi en mengde for karbohydrater. Du trenger ikke angi en mengde, men jo mer fullstendige dataene er, jo mer nøyaktige vil fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du bruker bolusråd.




Merknad

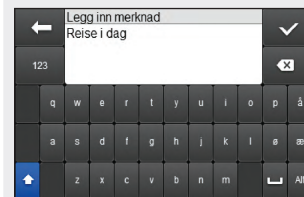

Skriv en merknad som skal lagres sammen med denne oppføringen. Velg ✓.

5

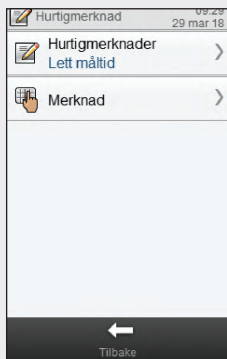


Velg **Hurtigmerknader** for å foreta en oppdatering. Velg **Merknad** for å skrive en merknad med tastaturet. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til trinn 3.

11.2.3 Legge til data i loggboken


Hovedmeny > Mine data > Legg til data

1

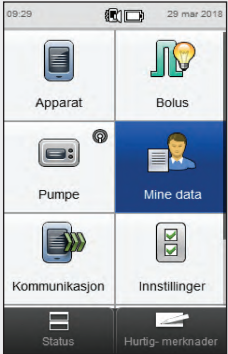


Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

2

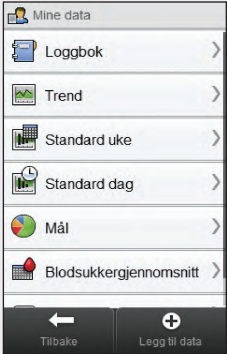

Velg **+** Legg til data.

3

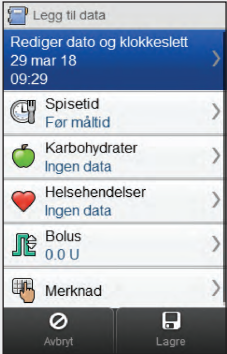

Velg hvilke som helst av alternativene på skjermbildet **Legg til data**, i samsvar med instruksjonene på de neste sidene.

Velg **Lagre** når du er ferdig for å lagre oppføringen og komme tilbake til menyen **Mine data**.

Skjermbilder for å legge til nye data

Dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett.
Velg **Lagre**.

Spisetid

Velg en passende spisetid.
Velg **Lagre**.

Karbohydrater

Still inn mengden
karbohydrater du har spist.
Velg **Lagre**.

Helsehendelser

Helsehendelser		09:29 29 mar 2018
☐	Mosjon 1	-30 %
☐	Mosjon 2	-50 %
☒	Stress	10 %
☒	Sykdom	15 %
☐	Premenstruell	0 %
☐	Egendefinert 1	0 %

Avbryt Lagre



Justering

Angi en prosentandel for bolusjustering for de valgte helsehendelsene.

Helsehendelser 23 %

+ -

Avbryt Lagre

Du kan velge opptil 4 helsehendelser. Velg **Lagre**.

Hvis bolusråd er slått på og flere helsehendelser er valgt, viser dette skjermbildet "--- %". Du må angi en summert prosentandel for de valgte helsehendelsene, selv om denne prosentandelen er på null. Velg **Lagre**.

Bolus

Bolusinsulin

09:29
29 mar 18

Korreksjon 1.00 u

Karbohydrater 5.00 u

6.00 u

+ -

Avbryt Lagre

Innstill bolusmengder. Velg **Lagre**.

MERK

Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen mengde for karbohydrater (Karbohydrater viser **Ingen data** i trinn 3), blir du bedt om å angi en mengde for karbohydrater. Du trenger ikke angi en mengde, men jo mer fullstendige dataene er, jo mer nøyaktige vil fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du bruker bolusråd.



Merknad


A screenshot of a mobile keyboard interface. At the top, there is a text input field with the placeholder text "Legg inn merknad". To the left of the field is a back arrow icon, and to the right is a checkmark icon. Below the input field is a numeric keypad with the numbers 1 through 9, 0, and a clear (X) button. Below the numeric keypad is a QWERTY keyboard layout. The bottom row of the keyboard includes a blue arrow icon, the letters z, x, c, v, b, n, m, and an "Alt" key.

Skriv en merknad som skal lagres sammen med denne oppføringen. Velg ✓.

11.3 Trendgrafen

Med trendgrafen viser apparatet blodsukkertrender og annen informasjon basert på loggbokdata for tidsskalaen og spisetiden du velger.

11.3.1 Bli kjent med trendgrafen

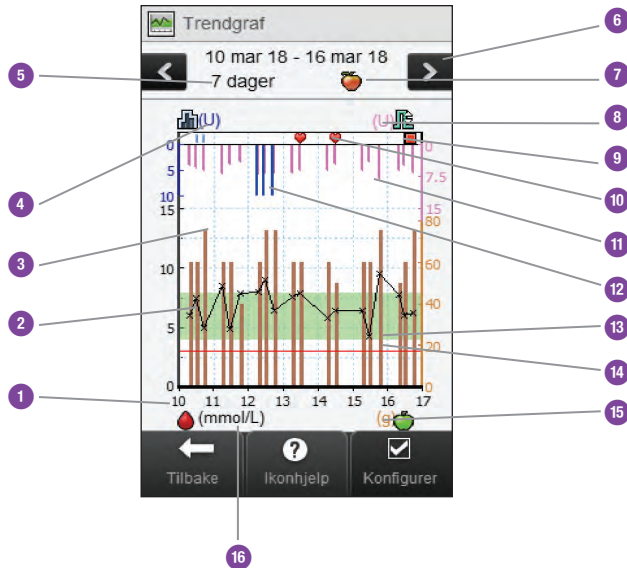

1	Tidspunkter på dagen eller dager i måneden	
2	Blodsukkerresultat	Vises som X-er som er sammenknyttet med linjer
3	Karbohydratverdi	Brun linje: Høyden vises i forhold til karbohydratmengden
4	Måleenhet for basaldose	
5	Tidsskala	

6	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
7	Valgt spisetid	
8	Måleenhet for bolus	
9	Pumpe stoppet-ikonet	Indikerer at pumpen har stoppet.
10	Helsehendelse	Indikerer at det finnes en helsehendelse for oppføringen
11	Bolus	Rosa linje: Høyden vises i forhold til bolusinsulinmengden

12	Basalverdi	Blå linje: viser basalinsulinmengden
13	Grønt område	Indikerer blodsuktermålområdet
14	Advarselsgrense for hypoglykemi	Rød vannrett linje
15	Måleenhet for karbohydrater	
16	Måleenhet for blodsukker	
17	Pil	(Vises ikke) Indikerer at blodsukkerdataene går utenfor skjermen
18	Pumpe på pause-ikonet	(Vises ikke) Indikerer når pumpen ble satt på pause under insulintilførsel

MERK

- ▶ Hvis ingen data er tilgjengelig, vises skjermbildet **Ingen data tilgjengelig**.
- ▶ Trendgrafer inkluderer ikke gale resultater eller kontrollresultater.
- ▶ På øvre høyre side av grafen er indikatoren for maksimal bolusmengde den rosa avmerkingen som står ved den høyeste verdien (på eksempelskjermbildet: 15 U). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den øverste delen av grafen basert på den største enkeltstående bolusinsulinmengden (bildeforklaring 11) som er tilført i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5). Indikatorverdiene for maksimal bolusmengde på apparatet er 1, 5, 15, 30 og 60 U. Hvis for eksempel den største enkeltstående bolusinsulinmengden er 8 U, skalerer apparatet den øvre grafen til mellom 0 og 15 U.



MERK


- ▶ På nedre høyre side av grafen er indikatoren for maksimal karbohydratmengde den brune avmerkingen som står ved den høyeste verdien (på eksempelskjermbildet: 80 g). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den nedre delen av grafen basert på den største enkeltstående karbohydratmengden (bildeforklaring 3) i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5). Indikatorverdiene for maksimal karbohydratmengde på apparatet er 40, 80, 120, 160, 200 og 240 g, eller tilsvarende skala for BE, KE eller CC. Hvis for eksempel den største enkeltstående karbohydratmengden er 76 g, skalerer apparatet den nedre grafen til mellom 0 og 80 g.
- ▶ På øvre venstre side av grafen er indikatoren for maksimal basalmengde den blå avmerkingen som står ved den høyeste verdien (på eksempelskjermbildet: 10 U). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den øverste delen av grafen basert på den største enkeltstående basalinsulinmengden (bildeforklaring 12) som er tilført i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5). Indikatorverdiene for maksimal basalmengde på apparatet er 1, 2, 5, 10, 20 og 40 U. Hvis for eksempel den største enkeltstående basalinsulinmengden er 9 U, skalerer apparatet den øvre grafen til mellom 0 og 10 U.



11.3.2 Vis trendgrafen


Hovedmeny > Mine data > Trend

1

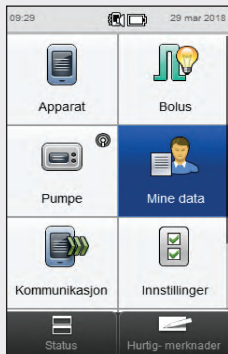


Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

2

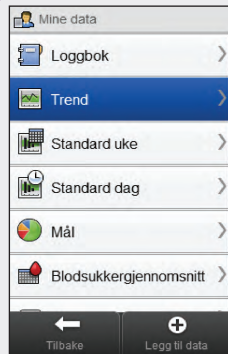

Velg **Trend**.

3

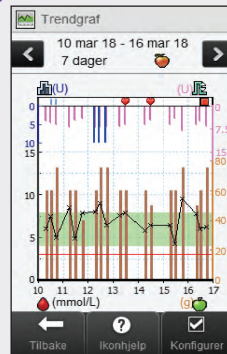


Velg ☒ **Konfigurer** for å endre hvordan trendgrafen viser trenddata.

MERK

Velg **?** for å vise en liste over trendikoner og deres forklaringer.




4

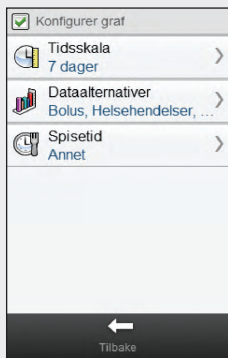

Velg hvilke som helst av alternativene på skjermbildet **Konfigurer graf**, i samsvar med instruksjonene i resten av dette avsnittet. Velg **Tilbake** når du er ferdig for å komme tilbake til trendgrafen, som viser dataene slik du valgte.


Skjermbilder for konfigurasjon av trendgrafen

Tidsskala

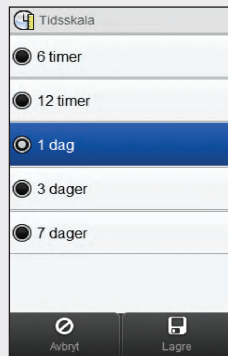

Velg tidsskalaen. Velg **Lagre**.

Dataalternativer

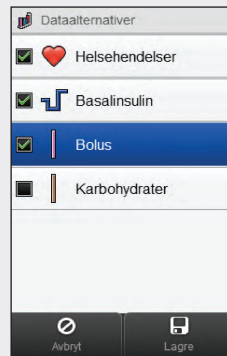

Velg 1 eller flere dataalternativer. Velg **Lagre**.

Spisetid



Velg spisetiden. Velg **Lagre**.

11.4 Standard uke

Med grafen for standard uke viser apparatet dine blodsukkergjennomsnitt, antallet målinger og standardavvik for hver dag i en gjennomsnittlig uke. Verdiene beregnes ut fra loggbokdata fra tidsskalaen og spisetiden du har valgt.


MERK

Standardavviket måler hvor stor spredning det er i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret.




11.4.1 Bli kjent med grafen og tabellen for standard uke

Graf for standard uke

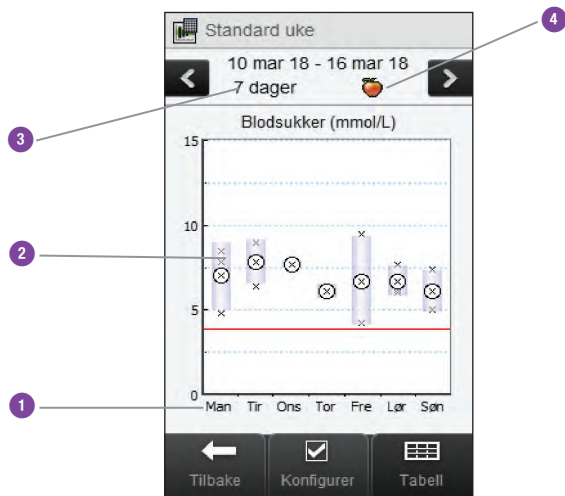

1	Ukedager	
2	Boks for hver dag	▶ Toppen av boksen indikerer standardavviket over gjennomsnittet, og bunnen av boksen indikerer standardavviket under gjennomsnittet. Boksen vises ikke hvis det ikke er nok data til å bestemme standardavvik. ▶ Toppen av boksen er åpen hvis standardavviket er utenfor toppen av grafen. ▶ Boksen og "X" vises ikke for en dag hvis det ikke blir funnet noen data.
3	Tidsskala	
4	Valg av spisetid	

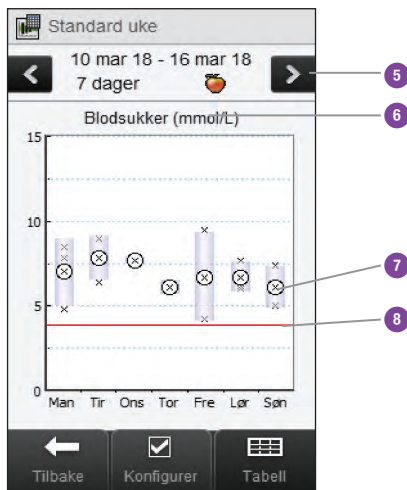

5	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
6	Måleenhet for blodsukker	
7	X	Indikerer hvert blodsukkerresultat. "X" i midten av en sirkel indikerer gjennomsnittet av alle blodsukkerresultater for de valgte kriteriene.
8	Advarselsgrense for hypoglykemi	Rød vannrett linje
9	Pil	(Vises ikke) Indikerer at det er data utenfor toppen av grafen.

Tabell for standard uke

Velg **Tabell** for å bytte til tabellen for standard uke. Tabellen for standard uke viser de samme dataene som grafen for standard uke i tabellformat. Velg **Graf** hvis du vil gå tilbake til grafen for standard uke fra tabellen for standard uke.

Standard uke

10 mar 18 - 16 mar 18
7 dager

	mmol/L					
	Min.	Gj.snitt	Maks	SD	Antall	
Man	4.8	7.0	8.4	2.9	4	
Tir	6.8	7.7	8.2	1.4	3	
Ons	7.5	7.6	7.8	0.9	2	
Tor	5.9	6.1	6.3	0.8	3	
Fre	3.4	7.0	8.6	4.8	3	
Lør	5.7	7.2	7.7	1.5	3	
Søn	4.9	6.7	7.4	2.3	2	

Tilbake Konfigurer Graf

Numbered callouts in the image:


- 1: Søn row
- 2: Fre row
- 3: Ons row
- 4: Tir row
- 5: Left arrow button
- 6: Right arrow button
- 7: SD column header
- 8: Antall column header

- | | |
|---|--|
| 1 | Høyeste blodsukkerresultat for hver dag i uken |
| 2 | Blodsukkergjennomsnitt for hver dag i uken |
| 3 | Laveste blodsukkerresultat for hver dag i uken |
| 4 | Ukedag |
| 5 | Tidsskala |
| 6 | Valg av spisetid |
| 7 | Standardavvik (SD) for hver dag i uken |
| 8 | Antall målinger for hver dag i uken |

11.4.2 Vise data for standard uke


Hovedmeny > Mine data > Standard uke

1

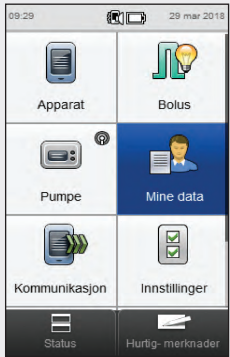

Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

2

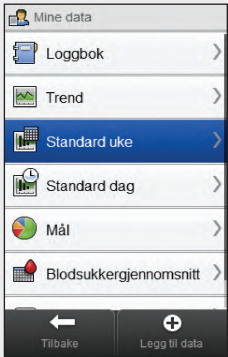


Velg **Standard uke**.

MERK

- ▶ Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise grafen og tabellen for standard uke for valgt tidsskala eller spisetid, vises skjermbildet **Ingen data tilgjengelig**.
- ▶ Grafen og tabellen for standard uke inkluderer ikke gale resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-verdier.




3

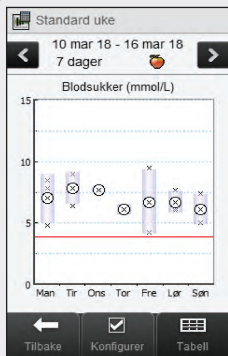

Du kan endre tidsskalaen og spisetiden som vises for standard uke, ved å velge **Konfigurer**.


4

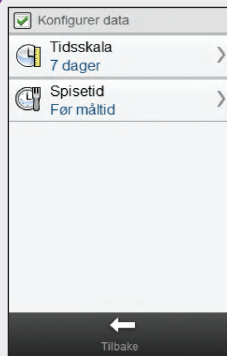

Velg et av alternativene på skjermbildet **Konfigurer data**, i samsvar med instruksjonene i resten av dette avsnittet. Velg **Tilbake** når du er ferdig for å komme tilbake til grafen eller tabellen for standard uke.

Skjermbilder for konfigurasjon av data for standard uke

Tidsskala

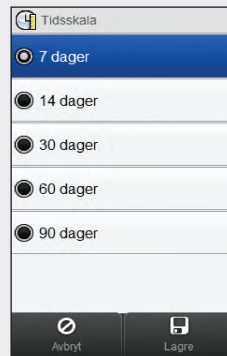

Velg en tidsskala. Velg **Lagre**.

Spisetid



Velg en spisetid. Velg **Lagre**.

11.5 Standard dag

Med grafen for standard dag viser apparatet dine blodsukkergjennomsnitt, antallet målinger og standardavvik for hver tidsperiode. Verdiene beregnes ut fra loggbokdata fra tidsskalaen og spisetiden du har valgt.

MERK

Se kapittelet **Endre apparatinnstillinger** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller** for instruksjoner om hvordan du stiller inn tidsperioder.




MERK

Standardavviket måler hvor stor spredning det er i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret.




11.5.1 Bli kjent med grafen og tabellen for standard dag

Graf for standard dag

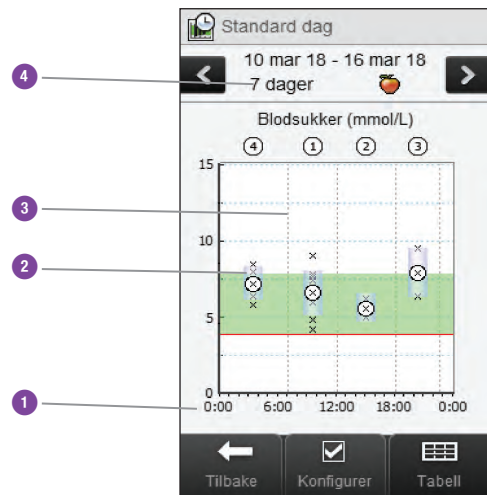

1	Klokkeslett	
2	Boks for hver tidsperiode	▶ Toppen av boksen indikerer 1 standardavvik over gjennomsnittet, og bunnen av boksen indikerer 1 standardavvik under gjennomsnittet. Boksen vises ikke hvis det ikke er nok data til å bestemme standardavvik. ▶ Toppen av boksen er åpen hvis standardavviket er utenfor toppen av grafen. ▶ Boksen og "X" vises ikke for en tidsperiode hvis det ikke blir funnet noen data.
3	Tidsperioder	Atskilt av den loddrette stiplede linjen
4	Tidsskala	

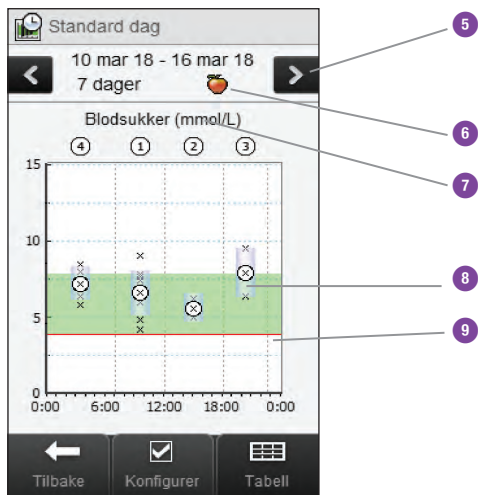

5	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
6	Valg av spisetid	
7	Måleenhet for blodsukker	
8	X	▶ Indikerer hvert blodsukkerresultat. ▶ "X" i midten av en sirkel indikerer gjennomsnittet av alle blodsukkerresultater for de valgte kriteriene.
9	Advarselsgrense for hypoglykemi	Rød vannrett linje
10	Pil	(Vises ikke) Indikerer at det er data utenfor toppen av grafen.

Tabell for standard dag

Velg **Tabell** for å bytte til tabellen for standard dag. Tabellen for standard dag viser de samme dataene som grafen for standard dag i tabellformat. Velg **Graf** hvis du vil gå tilbake til grafen for standard dag fra tabellen for standard dag.


The screenshot shows a mobile application interface for a 'Standard dag' (Standard day) table. The table displays blood sugar data for a 7-day period from March 10 to March 16, 2018. The table has columns for time period (Tidsperiode), minimum (Min.), average (Gj.snitt), maximum (Maks.), standard deviation (SD), and count (Antall). The data is shown for four time periods: 07:00, 12:00, 18:00, and 23:00. Below the table is a large empty space for a graph. At the bottom are three buttons: 'Tilbake' (Back), 'Konfigurer' (Configure), and 'Graf' (Graph). Numbered callouts point to various UI elements: 1 points to the empty graph area, 2 points to the 18:00 time period row, 3 points to the 12:00 time period row, 4 points to the left arrow navigation button, 5 points to the right arrow navigation button, 6 points to the 'Maks' (Maximum) column, 7 points to the 'SD' (Standard deviation) column, and 8 points to the 'Antall' (Count) column.

Tidsperiode	Min.	Gj.snitt	Maks	SD	Antall
07:00	4.2	6.8	9.2	1.2	10
12:00	5.2	6.4	8.1	0.8	7
18:00	6.7	7.7	9.6	1.9	7
23:00	5.5	7.0	8.6	1.0	9


- | | |
|---|---|
| 1 | Blodsukkergjennomsnitt for hver tidsperiode |
| 2 | Laveste blodsukkerresultat for hver tidsperiode |
| 3 | Tidsperiode |
| 4 | Tidsskala |
| 5 | Valg av spisetid |
| 6 | Høyeste blodsukkerresultat for hver tidsperiode |
| 7 | Standardavvik (SD) for hver tidsperiode |
| 8 | Antall målinger for hver tidsperiode |

11.5.2 Vis data for standard dag

Hovedmeny > Mine data > Standard dag

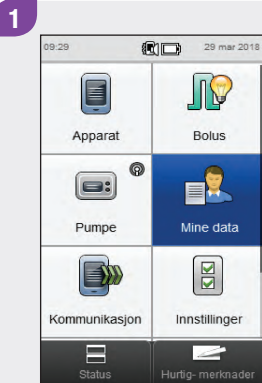


Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

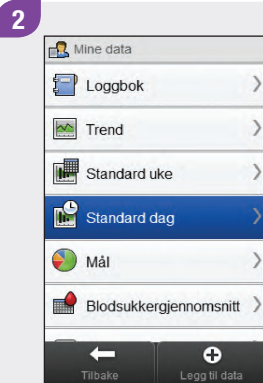

Velg **Standard dag**.


MERK

- ▶ Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise grafen og tabellen for standard dag for valgt tidsskala eller spisetid, vises skjermbildet **Ingen data tilgjengelig**.
- ▶ Grafen og tabellen for standard dag inkluderer ikke gale resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-verdier.

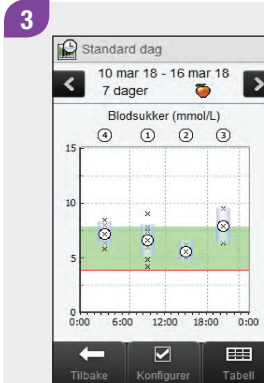

Du kan endre tidsskalaen og spisetiden som vises, ved å velge **Konfigurer**.

4

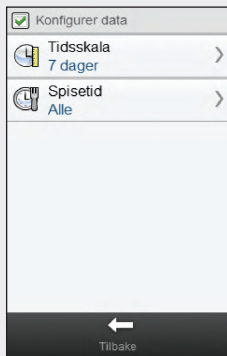

Velg et av alternativene på skjermbildet **Konfigurer data**, i samsvar med instruksjonene i resten av dette avsnittet. Velg **Tilbake** når du er ferdig for å lagre endringene og komme tilbake til grafen eller tabellen for standard dag.

Skjermbilder for konfigurasjon av data for standard dag

Tidsskala



Velg en tidsskala. Velg **Lagre**.

Spisetid




Velg en spisetid. Velg **Lagre**.

11.6 Måldata

Apparatet viser et sektordiagram og en tabell som illustrerer blodsukkerresultatene som "Over", "Innenf.", "Under" og "Hypo" for valgt tidsskala og spisetid.

11.6.1 Bli kjent med diagrammet og tabellen for måldata

Diagrammet for måldata

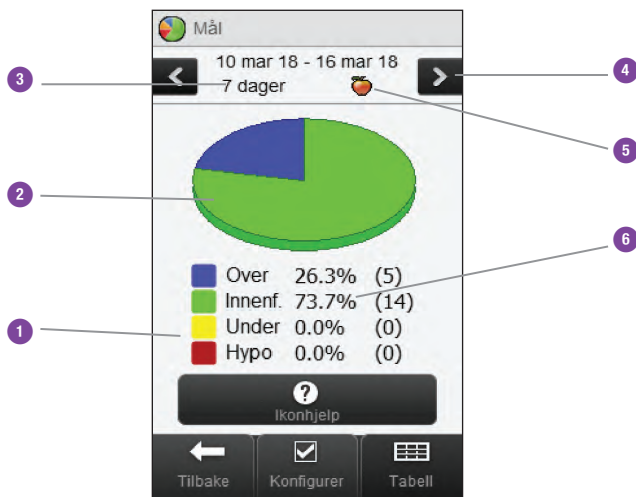


1	Forklaring	Kategorier for blodsukkerresultater
2	Diagrammet for måldata	Representerer prosentandelene for kategoriene for blodsukkerresultater
3	Tidsskala	
4	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
5	Valg av spisetid	
6	Prosentandel av forekomst	(Tallet som vises i parentes, representerer antallet forekomster)

Tabell for måldata

Velg **Tabell** for å bytte til tabellen for måldata. Tabellen for måldata viser de samme dataene som diagrammet for måldata i tabellformat.

Velg **Diagram** for å komme tilbake til diagrammet for måldata fra tabellen for måldata.

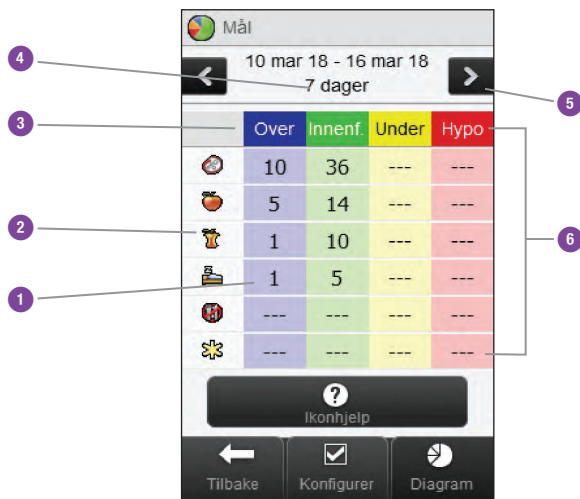


1	Antall forekomster	
2	Valg av spisetid	
3	Forklaring	Kategorier for blodsukkerresultater
4	Tidsskala	
5	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
6	Tabell for måldata	

11.6.2 Vise måldata


Hovedmeny > Mine data > Mål

1

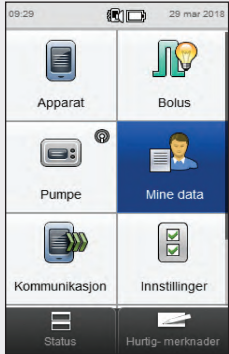

Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

2

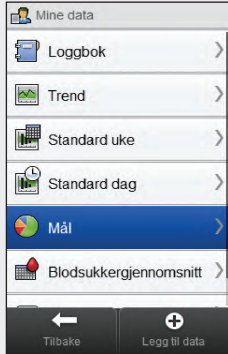


Velg **Mål**.

MERK

- ▶ Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise målgrafene og -tabellen for valgt tidsskala eller spisetid, vises skjermbildet **Ingen data tilgjengelig**.
- ▶ Diagrammet og tabellen for måldata inkluderer ikke gale resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-resultater.



3

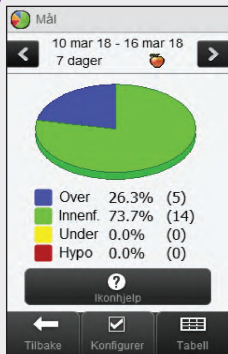

Du kan endre tidsskalaen og spisetiden som vises, ved å velge **Konfigurer**.


4



Velg et av alternativene på skjermbildet Konfigurer data, i samsvar med instruksjonene i resten av dette avsnittet. Velg **Tilbake** når du er ferdig for å lagre endringene og komme tilbake til diagrammet eller tabellen for måldata.

Skjermbilder for konfigurasjon av måldata

Tidsskala

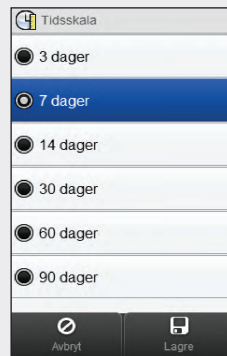

Velg en tidsskala. Velg **Lagre**.

Spisetid



Velg en spisetid. Velg **Lagre**.

11.7 Tabellen Blodsukkergjennomsnitt

Tabellen Blodsukkergjennomsnitt viser gjennomsnittlige blodsukkerverdier og standardavvik for tidsskalaene og spisetidene du velger.

MERK

Standardavviket måler hvor stor spredning det er i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige blodsukkeret.



11.7.1 Bli kjent med tabellen Blodsukkergjennomsnitt

Tabellen Blodsukkergjennomsnitt


	mmol/L	SD	Antall
Annet	6.8	1.4	55
Fastende	6.9	1.4	20
Sengetid	6.4	1.1	11
Etter måltid	6.5	1.6	5
Før måltid	6.8	1.4	6
Alle	6.9	1.4	13

1	Ikon for Annet	Data for alle måleresultater merket som Annet
2	Ikon for Fastende	Data for alle måleresultater merket som Fastende
3	Ikon for Sengetid	Data for alle måleresultater merket som Sengetid
4	Ikon for Etter måltid	Data for alle måleresultater merket som Etter måltid
5	Ikon for Før måltid	Data for alle måleresultater merket som Før måltid
6	Ikon for Alle	Kombinerte data fra alle spisetider
7	Tidsskala	


8	Knapper for å rulle mot venstre/høyre	Flytter fremover eller tilbake i tid med skalaen som er valgt. Eksempel: For en tidsskala på 7 dager viser rull venstre-ikonet data fra de 7 dagene før datoene som vises for øyeblikket.
9	Standardavvik for blodsukker	Beregnes for spisetid
10	Antall målinger	Brukes for å beregne gjennomsnittsverdier og standardavvik for hver spisetid
11	Blodsukker-gjennomsnitt	Beregnes for spisetid

11.7.2 Vise tabellen Blodsukkerjennomsnitt

Hovedmeny > Mine data > Blodsukkerjennomsnitt

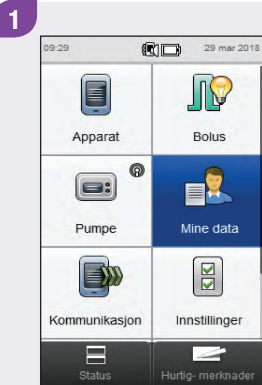


Velg **Mine data** fra hovedmenyen.

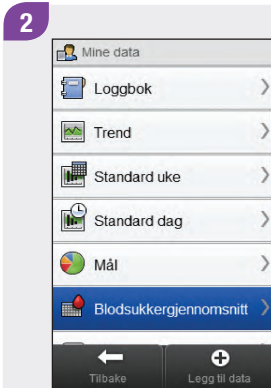

Velg **Blodsukkerjennomsnitt**.

MERK

- ▶ Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise tabellen Blodsukkerjennomsnitt for valgt tidsskala eller spisetid, vises skjermbildet **Ingen data tilgjengelig**.
- ▶ Beregningene inkluderer ikke gale resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-verdier.

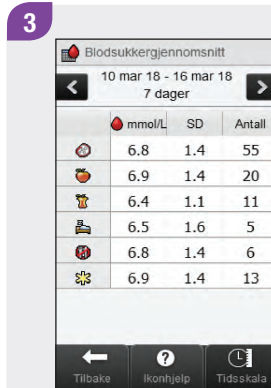

Velg **Tidsskala** for å justere tidsskalaen for tabellen Blodsukkerjennomsnitt.

MERK

Velg  for å vise en liste over ikoner for spisetider og deres forklaringer.



4

 A screenshot of a mobile app interface titled 'Tidsskala'. It shows a list of time intervals: '7 dager' (selected), '14 dager', '30 dager', '60 dager', and '90 dager'. At the bottom are two buttons: 'Avbryt' (Cancel) and 'Lagre' (Save).

Velg en tidsskala. Velg **Lagre**.

5

 A screenshot of a mobile app interface titled 'Blodsukkerjennomsnitt'. It shows a table of blood sugar data for the period '10 mar 18 - 16 mar 18' over '7 dager'. The table has columns for 'mmol/L', 'SD', and 'Antall'. Below the table are three buttons: 'Tilbake' (Back), 'Ikonhjelp' (Icon help), and 'Tidsskala' (Time scale).

	mmol/L	SD	Antall
	6.8	1.4	55
	6.9	1.4	20
	6.4	1.1	11
	6.5	1.6	5
	6.8	1.4	6
	6.9	1.4	13

Velg **Tilbake** når du er ferdig for å komme tilbake til menyen **Mine data**.

12

Teknisk informasjon

RF-kanalen som brukes til kommunikasjon, er ikke en åpen kanal. Apparatet kan bare kommunisere med enheten det er koblet med. Derfor kan ikke andre trådløse Bluetooth-teknologienheter (f.eks. mobiltelefoner, skrivere osv.) kobles med, kommunisere med eller få tilgang til din personlige informasjon i apparatet.

Samsvarserklæring

Roche erklærer herved at Accu-Chek Insight-diabetesbehandlingssystemet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i det europeiske direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen kan finnes på følgende internettadresse: <http://declarations.accu-chek.com>

Maksimal utgangseffekt

Accu-Chek Aviva Insight-apparat: 30 mW

Samsvar med IEC- eller ISO-standardene

Annet utstyr som er koblet til medisinsk elektrisk utstyr, må oppfylle den respektive IEC- eller ISO-standard (f.eks. IEC 60950 eller IEC 62368 for databehandlingsutstyr). I tillegg må alle konfigurasjoner oppfylle kravene til medisinsk elektrisk utstyr (se paragraf 16 i den siste gyldige versjonen av IEC 60601-1). Alle som kobler annet utstyr til medisinsk elektrisk utstyr, konfigurerer et medisinsk system, og har derfor ansvaret for å sikre at systemet oppfyller kravene til medisinske elektriske systemer. Kontakt din lokale representant eller teknisk service hvis du er i tvil.

Referanser til standarder/direktiver:

- ▶ IEC 60601-1:2012: 7.9.2.3, 7.9.2.5, 8.1.a, 8.2.1, 14.13, 16, 16.1, 16.2.d
- ▶ MDD 93/42/EØF: Tillegg I paragraf 13.6.c

12.1 Symbolforklaring

Disse symbolene kan vises på emballasjen, på typeskiltet og i bruksanvisningen for apparatet.

	Se bruksanvisningen
	Forsiktig, les sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen som følger med dette produktet.
	Temperaturbegrensning (oppbevares ved)
	Produsent
	Katalognummer
	Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
	Artikkelnummer for global handel

	Dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 98/79/EF om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.
	Dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr (R&TTE).
	Spesielt oppladbart litiumbatteri
	Lotnummer
	Serienummer
	Utløpsdato
	Produksjonsdato

12.2 Liste over ikoner

Den følgende tabellen viser ikoner og ikonnavn som kan vises på apparatet når apparatet er koblet med en pumpe. Alle de andre ikonene er å finne i kapittelet **Teknisk informasjon** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**.

Ikonnavn	Ikon
Aktiver	
Alarmdata	
Ampulle (pumpe)	
Avbryt bolus	
Basalprofil (aktiver)	
Basalprofil (programmer)	

Ikonnavn	Ikona
Batteri (pumpe)	
Behandlingsinnstillinger	
Bolusdata	
Data om midlertidig basaldose	
Driftstid	
Flerbølgebolus	

Ikonnavn	Ikona
Flerbølgebolus forsinket mengde	
Flerbølgebolus ikke bekreftet	
Flerbølgebolus på pause	
Flerbølgebolus umiddelbar mengde	
Forsinkelsestid	
Forsinket varighet	

Ikonnavn	Ikon
Midlertidig basaldose	
Pumpe kjører eller Start pumpe	
Pumpe på pause	
Pumpe stoppet eller Stopp pumpe	
Pumpe- eller Manuelt på pumpe-bolus	
Pumpedata	

Ikonnavn	Ikon
Pumpeinnstillinger	
Pumpemodus	
Standardbolus eller Bolus	
Standardbolus ikke bekreftet	
Standardbolus på pause	
Total døgndose	

Ikonnavn	Ikon
Utvidet bolus	
Utvidet bolus ikke bekreftet	
Utvidet bolus på pause	
Versjon	
Video	

13 Feilsøking

Dette kapittelet omhandler spesifikt problemer som kan oppstå med kobling av apparatet og pumpen. Du finner generell informasjon om feilsøking i kapittelet **Feilsøking** i **bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller**. Du finner informasjon om pumpemeldinger som vises på apparatet, i **bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen**.

MERK

Kontakt Roche hvis du har problemer med å koble apparatet og pumpen som ikke beskrives i dette kapittelet.



Problem	Mulige årsaker	Mulig løsning
Informasjonsmeldingen Fant ingen enheter	Ingen Bluetooth-aktivert enhet innenfor apparatets rekkevidde.	▶ Sørg for at maksimal avstand mellom pumpen og apparatet er 2 meter. ▶ Velg OK for å gå tilbake til menyen Sett opp ny kobling. Plasser pumpen i modusen Legg til enhet og prøv å koble på nytt.
Informasjonsmeldingen Koblet pumpe	Apparatet er allerede koblet med en pumpe.	Velg OK for å gå tilbake til menyen Kommunikasjon og se avsnittet Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen i kapittelet Kommunikasjon mellom apparatet og pumpen i denne bruksanvisningen for å fjerne gjeldende kobling.
Skjermbildet Enhet ikke koblet vises med meldingen Apparatet kunne ikke koble med: [pumpenavn] .	▶ Pumpebatteriet er utladet. ▶ Pumpen og apparatet er utenfor kommunikasjonsrekkevidde. ▶ Det er en hindring mellom pumpen og apparatet.	▶ Bytt pumpebatteriet. ▶ Sørg for at maksimal avstand mellom pumpen og apparatet er 2 meter. ▶ Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom pumpen og apparatet.

Problem	Mulige årsaker	Mulig løsning
Skjermbildet Enhet ikke koblet vises med meldingen [Pumpenavn] er allerede koblet med et apparat. Koble først pumpen fra apparatet.	► Pumpen er allerede koblet med et annet apparat.	► Fjern den gjeldende koblingen fra pumpen. Se bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen for instruksjoner om hvordan du fjerner koblingen mellom apparat og pumpe.
	► Pumpen og apparatet er allerede koblet med hverandre.	► Du trenger ikke gjøre noe.
Informasjonsmeldingen Maksimalt ant. koblede enheter	Apparatet er koblet med maksimalt antall enheter.	Velg OK for å gå tilbake til menyen Kommunikasjon , velg Administrer koblinger , og fjern en av de koblede enhetene.
Vedlikeholdsmelding M-68: Forbindelsen er brutt	► Pumpebatteriet er utladet. ► Pumpen og apparatet er utenfor kommunikasjonsrekkevidde. ► Det er trykket på en tast på pumpen, slik at kommunikasjonen mellom apparatet og pumpen er midlertidig deaktivert.	► Bytt pumpebatteriet. ► Sørg for at maksimal avstand mellom apparatet og pumpen er 2 meter. ► Vent til pumpeskjermen tidsavbrytes og apparatet og pumpen gjenopptar kommunikasjonen automatisk.

Problem	Mulige årsaker	Mulig løsning
Vedlikeholdsmelding M-27: Kommunikasjon tapt	Apparatet og pumpen ble tidsavbrutt mens de ventet på koblingsbekreftelse.	Gjenta trinnene i avsnittet Koble apparatet og pumpen i denne bruksanvisningen og følg anvisningene på skjermen for begge enheter.
Vedlikeholdsmelding M-83: Pumpen kan ikke fullføre oppgaven	Kommunikasjonen er tapt mellom apparatet og pumpen.	Hvis denne meldingen vises når pumpen forsøker å tilføre bolusinsulin, gjør du følgende: 1. Trykk på "OK" på M-83-meldingen for å bekrefte den. 2. Slå av apparatet. 3. Kontroller pumpen for å fastslå mengden insulin som faktisk ble tilført av pumpen. 4. Gjenopprett kommunikasjon mellom apparatet og pumpen ved å vente til pumpeskjermen tidsavbrytes, og slå deretter på apparatet. Hvis apparatet ikke kobles til pumpen, kan apparatet tilbakestilles ved å trykke ned På/Av-knappen i 5 sekunder. 5. Se til at du ikke programmerer en dobbel bolus. Men hvis den opprinnelige bolusmengden ikke ble tilført av pumpen, programmerer du bolusmengden som ikke ble levert.

Begrep	Definisjon
Advarsel	Informasjon om elementer og forhold som kan utgjøre en risiko og medføre personskaade.
Advarselsgrense	Se Advarselsgrense for hyperglykemi eller Advarselsgrense for hypoglykemi
Advarselsgrense for hyperglykemi	En grense som er innstilt i apparatet. Hvis blodsukkerresultatet er over grensen for hyperadvarsel, vises en advarsel. Rådfør deg med legen/diabetessykepleieren din angående innstilling av grensen for hyperadvarsel.
Advarselsgrense for hypoglykemi	En grense som er innstilt i apparatet. Hvis blodsukkerresultatet er under grensen for hypoadvarsel, vises en advarsel. Rådfør deg med legen/diabetessykepleieren din angående innstilling av grensen for hypoadvarsel.
Aktivt insulin	En beregnet verdi som representerer den effektive mengden insulin som for øyeblikket finnes i kroppen, som fungerer for å redusere blodsukkeret. Denne mengden inkluderer ikke eventuelt insulin som fungerer for å takle karbohydratinntak. Mengden inkluderer heller ikke basalinsulin.
Alarm	Lydsignal eller vibrasjon (stille) som melder om en påminnelse, advarsel, feilmelding eller vedlikeholdsmelding.

Begrep	Definisjon
Alternativer for råd	Faktorer som påvirker bolusrådanbefalingene, inkludert måltidsstigning, matbitgrense, virketid og forsinkelsestid.
am	Ante Meridiem (12-timers tidsformat for "før middag")
Apparat	Blodsukkerapparat
Avvis	Avslutter en påminnelse.
Basaldose	Mengden insulin tilført hver time som er nødvendig for å dekke ditt grunnleggende, måltidsuavhengige insulinbehov.
BE	Brødekvivalent
Berøringsskjerm	En skjerm som kan berøres for å kommunisere med enheten.

Begrep	Definisjon
Blodsukker (BS)	Mengden glukose (sukker) i blodet.
Blodsukkerterskel	En innstilling for påminnelse om blodsukkermåling: øvre grense er for blodsukkeret for en påminnelse ved høyt blodsukker, og nedre grense er for blodsukkeret for en påminnelse ved lavt blodsukker.
Bolus	Mengden av tilført insulin (i tillegg til basaldose) for å dekke matinntak og for å korrigere høye blodsukkernivåer. Bolusmengden bestemmes av legens/diabetssykepleierens retningslinjer, blodsukkernivå, matinntak, ditt aktivitetsnivå og andre faktorer.
Bolusråd	Når bolusråd er aktivert, gir det en anbefaling om hvor mye insulin som skal tilføres for et måltid og/eller for å korrigere for et blodsukkernivå.
°C	Grader Celsius
CC	Karbohydratvalg (Carbohydrate Choice)

Begrep	Definisjon
Demp	Demper midlertidig en pumpepåminnelse. Påminnelsen kommer tilbake om 60 sekunder med mindre du velger Avvis.
Etter høyt blodsukker-påminnelse	En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter en måling med høyt blodsukkerresultat.
Etter lavt blodsukker-påminnelse	En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter en måling med lavt blodsukkerresultat.
Etter måltid-påminnelse	En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter et måltid. For at denne påminnelsen skal bli aktivert, må du angi spisetiden for en blodsukkermåling til Før måltid.
°F	Grader Fahrenheit
FCC	Federal Communications Commission (USA)

Begrep	Definisjon
Flerbølgebolus	Kombinerer en umiddelbar bolustilførsel etterfulgt av en utvidet bolustilførsel. En flerbølgebolus kan være nyttig ved måltider som inneholder både hurtige og langsomme karbohydrater.
Flymodus	Denne innstillingen deaktiverer all trådløs kommunikasjon i apparatet, for å overholde forskrifter for flytrafikk.
Forsinkelsestid (alternativer for råd)	Tiden som går før tilførsel av en programmert bolus starter.
Forsinkelsestid (bolustilførsel)	Hvor lang tid det tar før insulinet begynner å redusere blodsukknivået.
Forsinket mengde	Mengden insulin som tilføres over en tidsperiode med en utvidet bolus eller etter en første mengde med en flerbølgebolus.
Forsinket varighet	Tidsperioden når en utvidet bolus eller flerbølgebolus tilføres.
g	Gram

Begrep	Definisjon
Galt resultat	Et tidligere resultat som ikke kan vises av apparatet på grunn av en feil.
GHz	Gigahertz
Gjeldende klokkeslett	Klokkeslettet du stiller inn i menyen Innstillinger og deretter på skjermbildet Dato og klokkeslett.
Helsehendelse	Informasjon om din aktuelle helsestatus eller dine aktuelle aktiviteter (Mosjon 1, Mosjon 2, Stress, Sykdom, Premenstruell eller Egendefinert). Opptil 4 helsehendelser kan velges og lagres sammen med et blodsukkerresultat. Hver status eller aktivitet (helsehendelse) tilordnes en bestemt prosentandel ut fra innstillingene dine, og brukes for å justere bolusrådanbefalinger.
HI	Vises på apparatskjermen når måleresultatet er over apparatets måleområde.
Hurtig bolus	En bolustilførsel på pumpen ved bruk av pumpens Hurtig bolus-taster. Ett tastetrykk tilsvarer ett bolustrinn (dvs. 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 eller 2,0 enheter insulin). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til pumpen.

Begrep	Definisjon
Hurtigmerknader	En loggbokoppføring som raskt kan lagres fra hovedmenyen eller statusskjermbildet.
Hyper	Hyperglykemi: En tilstand som oppstår når blodsukkernivået er for høyt.
Hypo	Hypoglykemi: En tilstand som oppstår når blodsukkernivået er for lavt.
IC	Industry Canada
Insulinfølsomhet	Mengden insulin som trengs for å redusere blodsukkeret ditt med en bestemt mengde.
Insulinpumpe	Et apparat som kan tilføre kroppen en kontinuerlig mengde insulin.
Insulintrinn	Antallet enheter (U) som insulindosen justeres med når du programmerer en bolus eller angir en manuell loggbokoppføring.

Begrep	Definisjon
ISO	International Organization for Standardization (Organisasjon for internasjonale standarder)
Karbohydrater	Karbohydrater omfatter sukker og stivelse. Karbohydrater kan føre til en langsom eller rask økning i blodsukkernivået. Karbohydrater blir vanligvis telt for å beregne en bolusinsulinmengde.
Karbohydratforhold	Mengden insulin som trengs for en bestemt mengde karbohydrater.
KE	Karbohydratenhet
Koblet	Apparatet og en annen enhet kommuniserer seg i mellom og utveksler informasjon med hverandre når de er koblet. Pumpen og apparatet kommuniserer seg i mellom og utveksler informasjon med hverandre når de er koblet.
Kontrollmåling	En apparattest med bruk av en kontrolløsning for å kontrollere at apparatet og teststrimlene virker som de skal.
Kontrollresultat	Verdi som vises på apparatet etter en kontrollmåling. Når kontrollresultatet er innenfor området som er angitt på teststrimmelboksens etikett, virker teststrimlene og apparatet som de skal.

Begrep	Definisjon
Lanyard	En snor som du har rundt handledet eller halsen for å bære en gjenstand i.
LCD	Liquid Crystal Display
LO	Vises på apparatskjermen når måleresultatet er under apparatets måleområde.
Maksbolus	Maksbolus fungerer som et sikkerhetstiltak mot utilsiktet høye boluser. Det er en innstilling i både apparatet og pumpen, som angir en maksimal bolusmengde. For penn-/sprøyteboluser krever en bolus som er større enn maksbolus, ytterligere bekreftelse. På pumpen kan ingen bolus som er større en maksbolus, tilføres.
Manuelt på pumpe-bolus	En bolus som tilføres ved å bruke kontrollene på pumpen i stedet for på apparatet.
Matbitgrense	Matbitgrensen definerer en grense for karbohydrater som utløser en måltidsstigning, hvis den overskrides.
Merknad	Tilleggsinformasjon

Begrep	Definisjon
mmol/L	Millimol per liter
Målområde	Ønsket øvre og nedre grenser for blodsukkernivå som anses som akseptable under faste eller før et måltid, som angitt av legen eller diabetessykepleieren.
Måltidsstigning	Økningen i blodsukkernivået under eller etter måltider som anses som normal innenfor et bestemt område, selv om en bolus er tilført.
N/A	Ikke relevant
Oppdagelsesmodus	Når apparatet eller pumpen er i "oppdagelsesmodus", kan andre Bluetooth-enheter oppdage det eller koble seg med det.
Påminn etter	En innstilling for påminnelse om blodsukkermåling. Hvor lang tid etter et høyt blodsukkerresultat, etter et lavt blodsukkerresultat, eller etter et måltid du vil få en påminnelse.
Påminnelse	Når påminnelser er innstilt, aktiveres de for å minne deg på å måle blodsukkeret, måle blodsukkeret på nytt eller på en hendelse eller aktivitet.
Påminnelser om blodsukkermåling	Påminnelser om å måle blodsukkeret på nytt etter et høyt blodsukkerresultat, etter et lavt blodsukkerresultat eller etter et måltid.

Begrep	Definisjon
Penn/sprøyte-bolus	En bolus som tilføres med penn eller sprøyte.
PIN	Personlig identifikasjonsnummer
pm	Post Meridiem (12-timers tidsformat for "etter middag")
Pumpe	Se Insulinpumpe.
RF	Radiofrekvens
SD	Standardavvik
Signalutsettelse	Utsetter apparatets signaler til utsettelsesperioden er slutt eller til apparatet slås på.

Begrep	Definisjon
Slumre	Utsetter en apparatpåminnelse i et bestemt tidsrom (for eksempel 5 minutter).
Sluttid	Sluttiden for en tidsperiode.
Spisetid	Informasjon om tidspunktet for et blodsukkerresultat (før måltid, etter måltid, sengetid, fastende eller annet). Det kan velges fra en hurtigmeny og lagres sammen med blodsukkerresultatet.
Standard	De første innstillingene i apparatet før du endrer eller egendefinerer dem.
Standardavvik	I denne bruksanvisningen brukes begrepet "standardavvik" til å beskrive hvor stor spredning det er i blodsukkerresultatene (hvis f.eks. blodsukkerresultatene ligger tett opptil blodsukkergjennomsnittet, er standardavviket lite).
Standardbolus	En bolus som blir tilført umiddelbart.
Starttid	Starttiden for en tidsperiode.

Begrep	Definisjon
Tastelås	En funksjon som deaktiverer knappene på en enhet for å hindre at de aktiveres utilsiktet.
Teststrimmel	En plaststrimmel som reagerer med en bloddråpe og leverer et blodsukkerresultat, når den er satt inn i apparatet.
Tidsperiode	Én av opptil 8 tidsperioder i løpet av en dag.
Tidsskala	Brukeren innstiller tidsrommet for å konfigurere en Mine data-graf eller -tabell.
Tilførselshastighet	Hastigheten som den umiddelbare mengden av en standardbolus eller flerbølgebolus tilføres med.
Trådløs Bluetooth-teknologi	Trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde, som forbinder enheter (som f.eks. apparat og pumpe) for å utveksle informasjon.
U	Enheter (insulinenheter)
Umiddelbar mengde	Mengden insulin som tilføres av en standardbolus eller på begynnelsen av en flerbølgebolus.
USB	Universell seriebuss

Begrep	Definisjon
Utvidet bolus	En bolus som tilføres i løpet av en tidsperiode. Den kan være nyttig under lange måltider eller ved inntak av mat som fordøyes sakte. Bruk av utvidet bolus kan også passe for personer som har gastroparese (forsinket fordøyelse).
Virketid	Tidsperioden fra begynnelsen på en bolus til blodsukkernivået forventes å gå tilbake til målverdien.

Stikkordregister

A

- advarselsgrense for hyperglykemi 18
- advarselsgrense for hypoglykemi 18
- advarselsgrenser
 - beskrivelse 23
 - stille inn 18

B

- basaldose
 - avbryte 98
 - egendefinert midlertidig basaldose 95
 - primær midlertidig basaldose 93
 - slette 100
- basalprofil
 - aktivere 107
 - fjerne 109
 - programmere 103
- batteri 206
- behandlingsinnstillinger 115, 127
- blodsukker
 - legge til informasjon 52
 - måle 47
 - resultat 50, 52

- blodsukkerresultat, detaljert blodsukkerresultat 51
- bolus
 - avbryte en bolus 82, 84
 - innstillinger 130, 132, 133, 134, 135
 - slette egendefinert bolus 80
 - tilførsel 55
 - type 56
- bolusråd
 - alternativer 28
 - oversikt 25
 - stille inn 18
- bolustilførsel 69
 - bruke bolusråd 86
 - egendefinert 76
 - flerbølge 62, 74
 - manuelt på pumpe 67
 - penn/sprøyte 65
 - standard 57, 70
 - utvidet 60, 72
- bolustrinn for hurtig bolus 132

D

dato og klokkeslett 18, 115, 150

E

enhet ikke koblet 206, 207

enhetsinnstillinger 115, 141

F

fant ingen enheter 206

flymodus 113, 114

forsinkelsestid (alternativer for råd) 135

forsinkelsestid (bolustilførsel)

beskrivelse 29

stille inn 21

H

helsehendelser

stille inn prosentandeler 21

velge helsehendelse 53, 163, 168

hjem-skjermbilde, beskrivelse 5

hovedmenyskjermbilde 6

I

ikon for karbohydrater godkjent 158

ikon for karbohydrater ikke godkjent 159

ikonliste 156, 201

informasjonsmelding 206, 207

infusjonssett

innstillinger 137

påminnelse om å bytte 122

insulinfølsomhet

beskrivelse 26

stille inn 19

K

karbohydrat

enhetsbeskrivelse 22

enhetsinnstilling 18

stille inn mengde 163, 167

karbohydratforhold

beskrivelse 26

stille inn 19

kobling 31

kommunikasjon 31

kommunikasjon tapt 208

konfigurasjonsveiviser 14, 16

L

- lade batteriet 9
- loggbok
 - beskrivelse 154
 - beskrivelse av oppføring 154
 - justere data 161
 - legge til nye data 166

M

- maksimal bolusmengde 134
- matbitgrense
 - beskrivelse 28
 - stille inn 21
- mine data 153
- målområde 19
- måltidsstigning
 - beskrivelse 28
 - stille inn 21

P

- pumpeinnstillinger 115
- pumpepåminnelser 115, 116, 117
- pumpespråk 148

R

- rullefelt 6

S

- signalmodus 111, 141, 144
- signalutsettelse 144
- spisetid 53, 163, 167
- spor for teststrimmel 48
- språk 17
- statusskjerm bilde 7
- symboler 200

T

- tastelås 146
- teststrimmelboks 47
- tid 18
- tidsformat 17
- tidsperioder 24
- tidtaker for automatisk av 128
- tilførselshastighet 133
- trendgraf 170

U

USB

kabel 9, 12

PC-port 12

utløpsdato 47

V

varselnivå for ampulle 139

vedlikeholdsmelding 207, 208

velkomstbilde 16

virketid

beskrivelse 28

stille inn 21

Norge

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510

www.accu-chek.no

© 2018 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK INSIGHT og ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT er varemerker for Roche.



CONTINUA, CONTINUA-logoene og CONTINUA CERTIFIED er varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker for Continua Health Alliance.

CONTINUA er et registrert varemerke i noen, men ikke i alle land, hvor produktet distribueres.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert.

Alle andre produktnavn og varemerker tilhører de respektive eiere.



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

