

Accu-Chek Insight Flex infusion set

The Accu-Chek Insight Flex infusion set is intended for the subcutaneous infusion of insulin with an Accu-Chek Insight insulin pump. The Accu-Chek Insight Flex infusion set consists of the head set (A–G) and the transfer set (H).

- Package 1 contents (with transfer set):
- Head set (A–G)
 - Transfer set (H)

- Package 2 contents (without transfer set):
- Head set (A–G)

A Adhesive plaster	Canula			
B Adhesive liner	Length: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Connector plate	Fill amount 0.7 µl	0.7 µl	0.7 µl	
D Introducer needle	(approx.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Needle box				
F Button				
G Disconnect cover				
H Transfer set (tubing)	Length: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Fill amount 9 µl	13 µl	17 µl	
	(approx.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* U100 insulin

- Before unpacking your infusion set, wash your hands thoroughly. Choose and disinfect your infusion site as instructed by your doctor or healthcare team.
- Remove the white liner on top (A), which will expose the blue liner. Then remove the blue liner (B).
- Push the button until it stops. The introducer needle with the soft canula snaps out.
- Insert the infusion set at a 90° angle. Choose an infusion site away from your waistline, bones, any scar tissue, belly button and recent infusion sites. Rotate your infusion site regularly.
- Press the adhesive plaster firmly onto the infusion site, ensuring that it makes good contact with the skin.
- Remove the needle box with the introducer needle at a right angle from the body, leaving the adhesive plaster and the connector plate in place on your skin. The introducer needle snaps back into the needle box automatically.
- Attach the transfer set to the insulin pump and fill it according to the instructions provided with the insulin pump. Make sure it is completely filled and free from air bubbles.
- Connect the filled transfer set to the connector plate. Before resuming insulin pump therapy, fill the head set and the soft canula with 0.7 U of insulin.

In US, distributed by:
Roche Diabetes Care, Inc.
Indianapolis, IN 46256-USA
Tel: 1-800-250-7801
ACCU-CHEK Customer Care Service Center: 1-800-688-4578
www.accu-chek.com

To disconnect the set safely, squeeze the side wings of the connector together and withdraw it. Keep the connector plate clean. Attach the disconnect cover when appropriate.

Warning

- When using the infusion set for the first time, your doctor or healthcare team must be present.
- Protect the product from excessive humidity, sunlight and heat. Store at room temperature.
- Check your blood glucose level at least 4 times a day, and at least once, 1 to 3 hours after inserting a new infusion set.
- Do not use this product for any medication other than insulin.
- Do not use this product if the blister package is already opened or damaged.
- If the infusion site becomes inflamed, replace your infusion set at a new site.
- Change the head set at least every 3 days and the transfer set at least every 6 days, or as instructed by your doctor or healthcare team. Also consult the instructions for use of the insulin pump.
- Discard your infusion set after use, according to local regulations. Do not re-use it to avoid infection and underdelivery of insulin.
- Dispose of your infusion set and needle box safely, so that no one can be pricked or hurt by it, as this could lead to infection. Regularly check that the infusion set is properly attached to the skin to prevent accidental removal of insulin.
- If your blood glucose level should suddenly increase, or if an occlusion occurs, check for clogging or leaks. Change your infusion set immediately if you are not entirely sure that it is working properly.

Set de infusión Accu-Chek Insight Flex

El set de infusión Accu-Chek Insight Flex ha sido diseñado para la infusión subcutánea de insulina con un sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight.

El set de infusión Accu-Chek Insight Flex consta del cabezal (A–G) y el catéter (H).

- Contenido del envase 1 (con catéter):
- Cabezal (A–G)
 - Catéter (H)

- Contenido del envase 2 (sin catéter):
- Cabezal (A–G)

A Adhesivo	Canúla			
B Protector del adhesivo	Longitud: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Placa del conector	Cantidad de cebado 0.7 µl	0.7 µl	0.7 µl	
D Aguja guía	(aprox.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Caja de la aguja				
F Botón				
G Tapón de desconexión				
H Catéter (tubo)	Longitud: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Cantidad de cebado 9 µl	13 µl	17 µl	
	(aprox.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* Insulina U100

- Lívese bien las manos antes de abrir el envase del set de infusión. Elija y desinfecte el sitio de inserción según las indicaciones de su médico o equipo de personal sanitario.
- Retire el protector blanco superior del adhesivo (A), que dejará expuesto el protector azul. Retire el protector azul (B).
- Apriete el botón hasta que se detenga. La aguja guía sale con la cánula flexible.
- Inserte el set de infusión con un ángulo de 90°. Elija un punto alejado de la cintura, los huesos, cicatrices, el ombligo y otros sitios de inserción que haya utilizado recientemente. Cambie la zona de inserción con regularidad.
- Presione el adhesivo firmemente en el sitio de inserción y asegúrese de que el contacto con la piel sea perfecto.
- Retire la caja de la aguja con la aguja guía en un ángulo recto, dejando el adhesivo y la placa del conector sobre la piel. La aguja guía vuelve a entrar en la caja de la aguja automáticamente.
- Conecte el catéter al sistema de infusión de insulina y cebelo según las instrucciones suministradas con el sistema de infusión de insulina. Asegúrese de que esté completamente lleno y de que no haya burbujas de aire.
- Conecte el catéter cebado a la placa del conector. Antes de reanudar el tratamiento con el sistema de infusión de insulina utilice un bolo de 0.7 U para llenar el cabezal y la cánula flexible.

Para desconectar el catéter presione los clips laterales del conector y retirelo. Mantenga limpia la placa del conector. Coloque el tapón de desconexión si es necesario.

Advertencia

- Si es la primera vez que utiliza el set de infusión, deberá hacerlo en presencia de su médico o equipo de personal sanitario.
- Proteja el producto de la humedad excesiva, de la luz solar y del calor. Almacénalo a temperatura ambiente.
- Compruebe el nivel de glucemia con un mínimo 4 veces al día y al menos una vez de 1 a 3 horas después de haber insertado un set de infusión nuevo.
- No utilice este producto para otros fármacos aparte de insulina.
- No utilice este producto si el envase blister está abierto o dañado.
- Si la zona de inserción se inflama, retire el set de infusión y utilice un nuevo en una zona de aplicación distinta.
- Cambie el cabezal al menos cada 3 días y el catéter al menos cada 6, o bien según las instrucciones de su médico o personal sanitario. Consulte también las instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina.
- Desinfecte el set de infusión después de haberlo utilizado según las normas locales vigentes. No vuelva a utilizarlo, ya que podrían ocasionarse infecciones o una administración insuficiente de insulina.

Accu-Chek Insight Flex Infusionsset

Das Accu-Chek Insight Flex Infusionsset dient in Verbindung mit einer Accu-Chek Insight Insulinpumpe zur subkutanen Infusion von Insulin. Das Accu-Chek Insight Flex Infusionsset besteht aus einer Kanüle (A–G) und einem Schlauch (H).

- Inhalt von Packung 1 (mit Schlauch):
- Kanüle (A–G)
 - Schlauch (H)

- Inhalt von Packung 2 (ohne Schlauch):
- Kanüle (A–G)

A Selbsthaftende Auflage	Kanüle			
B Schutzfolie der selbsthaftenden Auflage	Länge: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Kanüलगhäuse	Füllmenge 0,7 µl	0,7 µl	0,7 µl	
D Führungsnadel	(approx.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Nadelgehäuse				
F Auslöseknopf				
G Verschlusskappe				
H Schlauch	Länge: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Füllmenge 9 µl	13 µl	17 µl	
	(approx.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* U100-Insulin

- Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie das Infusionsset aus der Packung nehmen. Wählen Sie eine Einführungsstelle aus und desinfizieren Sie diese gemäß den Anweisungen Ihres Arztes oder Diabetesberaters.
- Entfernen Sie die obere weiße Schutzfolie (A), sodass die blaue Schutzfolie sichtbar wird. Entfernen Sie anschließend die blaue Schutzfolie (B).
- Drücken Sie den Auslöseknopf bis zum Anschlag. Die Führungsnadel mit der biegsamen Kanüle klappt heraus.
- Führen Sie das Infusionsset in einem Winkel von 90° ein. Wählen Sie eine Einführungsstelle, die nicht auf Taillenhöhe, über Knochen, im Bereich von Narbengewebe, dem Bauchnabel oder einer bereits kürzlich verwendeten Einführungsstelle liegt. Wechseln Sie regelmäßig die Einführungsstelle.
- Drücken Sie die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut, um einen sicheren Sitz des Infusionssets zu gewährleisten.
- Nehmen Sie das Nadelgehäuse mit der Führungsnadel im rechten Winkel ab, ohne die selbsthaftende Auflage und das Kanüलगehäuse von der Haut abzuziehen. Die Führungsnadel klappt automatisch wieder in das Nadelgehäuse ein.
- Schließen Sie den Schlauch an die Insulinpumpe an und füllen Sie ihn gemäß der Gebrauchsanweisung Ihrer Insulinpumpe. Achten Sie darauf, dass der Schlauch vollständig gefüllt ist und sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.
- Schließen Sie den gefüllten Schlauch an das Kanüलगehäuse an. Verarbeiten Sie ihn vor der Fortsetzung der Insulinpumpentherapie einen bis zwei Minuten lang. Füllen Sie das Kanüलगehäuse und die biegsame Kanüle mit 0,7 U von Insulin.

Um den Schlauch vom Kanüलगehäuse abzukoppeln, drücken Sie die Seitenschalt am Kupplungsstück zusammen und ziehen Sie es heraus. Halten Sie das Kanüलगehäuse sauber. Schließen Sie die Verschlusskappe an die dafür vorgesehene Stelle an.

Warnung

- Die erste Anwendung des Infusionssets muss im Beisein eines Arztes oder Diabetesberaters erfolgen.
- Produkt vor Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
- Überprüfen Sie Ihren Blutzuckerspiegel mindestens viermal täglich und nach dem Wechseln des Infusionssets mindestens einmal innerhalb von 1 bis 3 Stunden.
- Dieses Produkt darf nur mit Insulin verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
- Wenn sich die Einführungsstelle entzündet, wechseln Sie das Infusionsset umgehend aus und legen Sie es an einer noch nicht verwendeten Einführungsstelle an.
- Wachsam: Sie die Kanüle mindestens alle 6 Tage aus, sofern Ihr Arzt oder Diabetesberater nichts anderes verordnet hat. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der Insulinpumpe.

Conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex

O conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex destina-se à infusão subcutânea de insulina com uma bomba de insulina Accu-Chek Insight.

O conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex é composto pela cânula de infusão (A–G) e o cateter (H).

- A embalagem 1 contém (com o cateter):
- Cânula de infusão (A–G)
 - Cateter (H)

- A embalagem 2 contém (sem o cateter):
- Cânula de infusão (A–G)

A Adesivo	Canúla			
B Revestimento do adesivo	Comprimento: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Sistema de conexão	Volume de purga 0,7 µl	0,7 µl	0,7 µl	
D Agulha-guia	(aprox.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Caixa da agulha				
F Botão				
G Tampa de desconexão				
H Cateter (tubo)	Comprimento: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Volume de purga 9 µl	13 µl	17 µl	
	(aprox.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* Insulina U100

- Antes de retirar o conjunto de infusão da embalagem, lavar bem as mãos. Escolha e desinfete o local de infusão de acordo com as instruções do médico ou da equipe de cuidados de saúde.
- Retire a aba de revestimento superior branca (A), que irá expor a aba de revestimento azul (B). Em seguida, retire a aba de revestimento azul (B).
- Pressione o botão até parar. A agulha-guia salta com a cânula flexível.
- Introduza o conjunto de infusão a um ângulo de 90°. Escolha um local de infusão afastado da cintura, ossos, tecido cicatrizado, umbigo e locais de infusão recentes. Alternar regularmente os locais de infusão.
- Pressione o adesivo firmemente sobre o local de infusão, confirmando que fica totalmente em contacto com a pele.
- Retire a caixa da agulha com a agulha-guia em ângulo reto, deixando o adesivo e o sistema de conexão colocados sobre a pele. A agulha-guia retrai automaticamente para dentro da caixa da agulha.
- Ligar o cateter à bomba de insulina e purgá-lo de acordo com as instruções fornecidas com a bomba de insulina. Certifique-se de que esteja totalmente enchido e sem bolhas de ar.
- Ligar o cateter purgado ao sistema de conexão. Antes de retomar a terapêutica com bomba de insulina, purgar a cânula de infusão e a cânula flexível com 0,7 U de insulina.

Para desligar o cateter, apertar os cliques laterais do conector e retirá-lo. Manter limpo o sistema de conexão. Colocar a tampa de desconexão quando for necessário.

Atenção







- Se estiver usando o conjunto de infusão pela primeira vez, o profissional de saúde ou equipa de cuidados de saúde tem de estar presente.
- Proteja o produto contra humidade excessiva, luz solar e calor. Guarde-o a temperatura ambiente.
- Medir o nível de glicémia pelo menos 4 vezes por dia e pelo menos uma vez, 1 a 3 horas depois de introduzir um novo conjunto de infusão.
- Não utilizar este produto para nenhum outro medicamento além da insulina.
- Não utilizar este produto se o blister já estiver aberto ou danificado.
- Se o local de infusão inflamar, coloque um novo conjunto de infusão noutra local.
- Mudar a cânula de infusão pelo menos de 3 em 3 dias e o cateter pelo menos de 6 em 6 dias, ou de acordo com as instruções do profissional de saúde ou equipa de cuidados de saúde. Consultar também as instruções de utilização da bomba de insulina.
- Eliminar o conjunto de infusão usado de acordo com os regulamentos locais. Não reutilizar o conjunto de infusão para evitar infeções e administração insuficiente de insulina.

ACCU-CHEK® Insight Flex

Infusion set



Roche

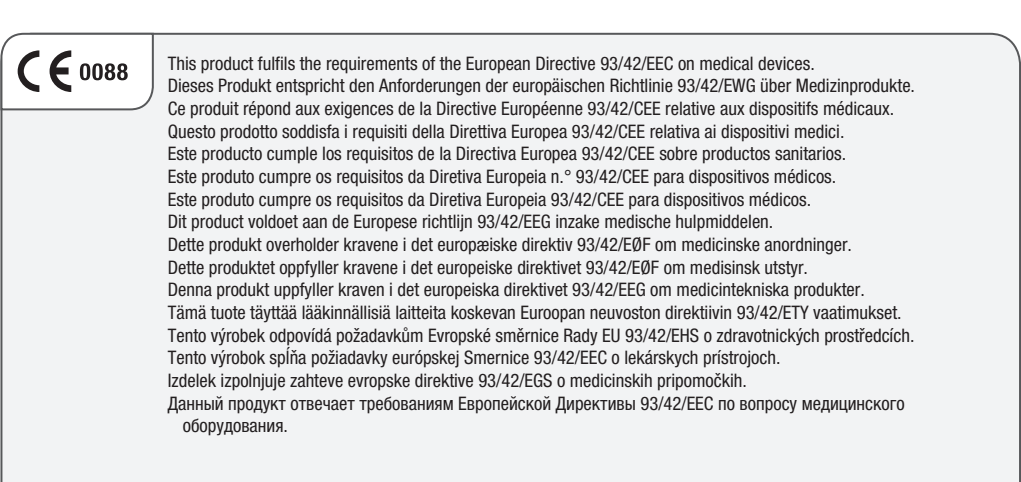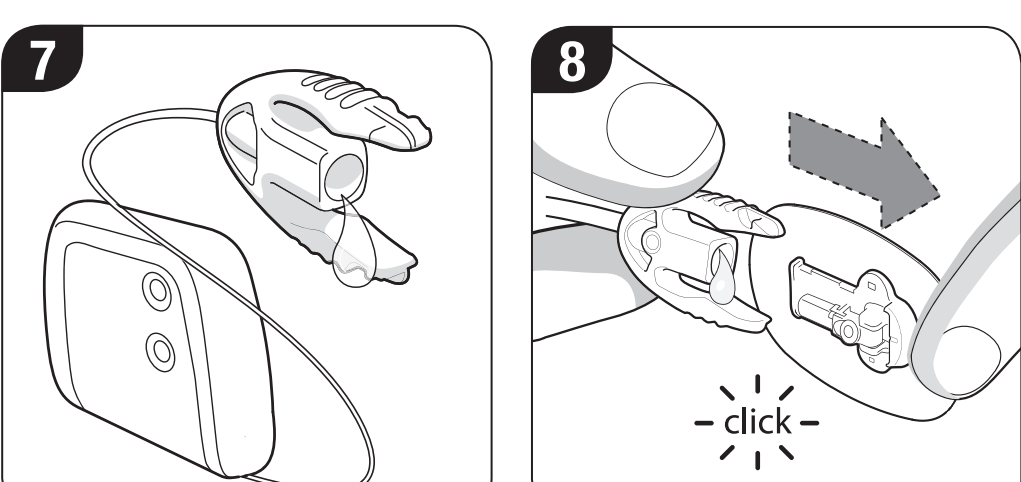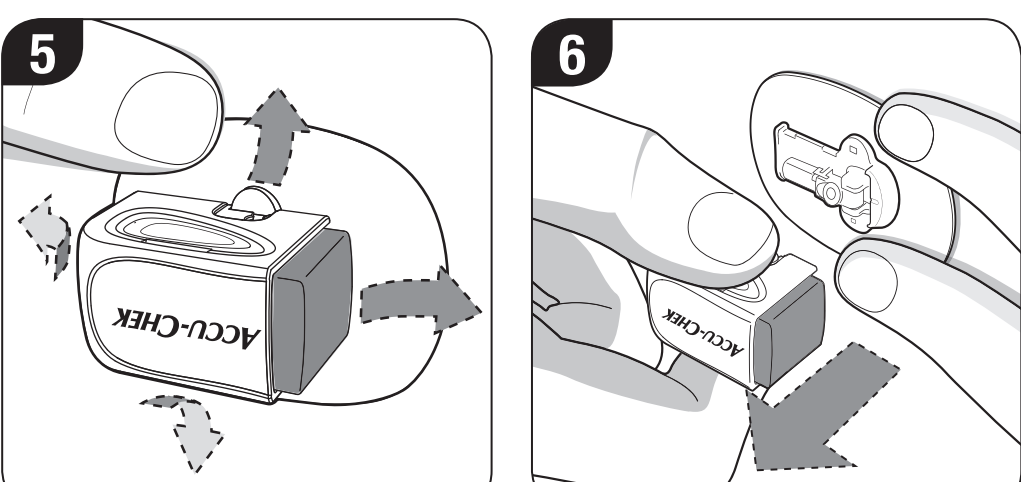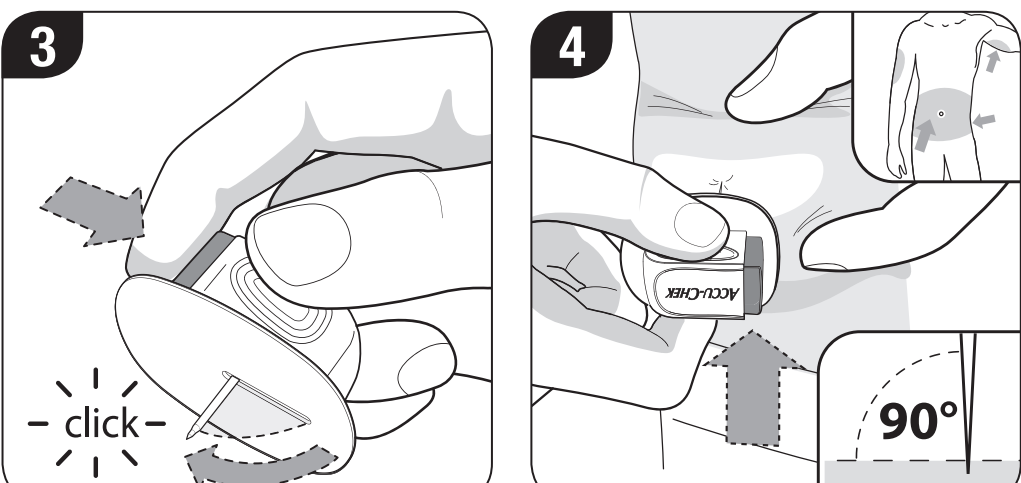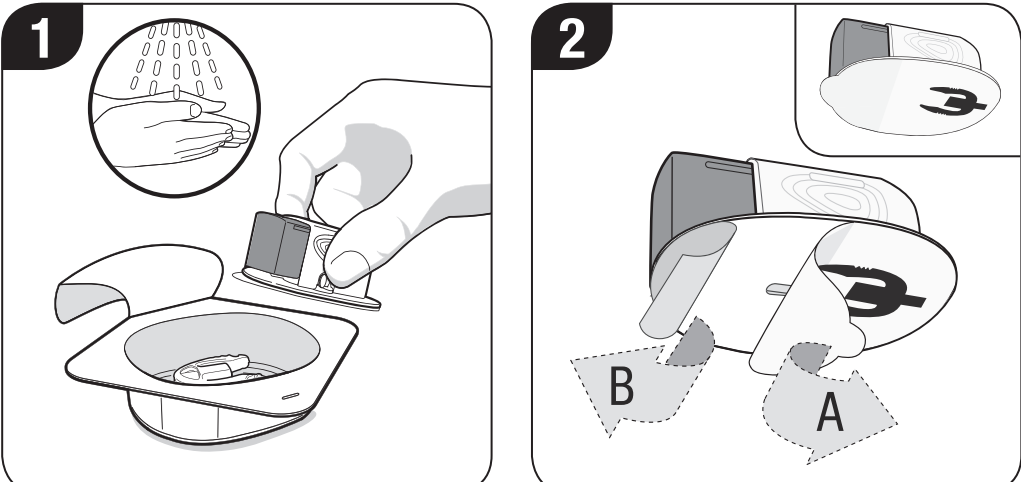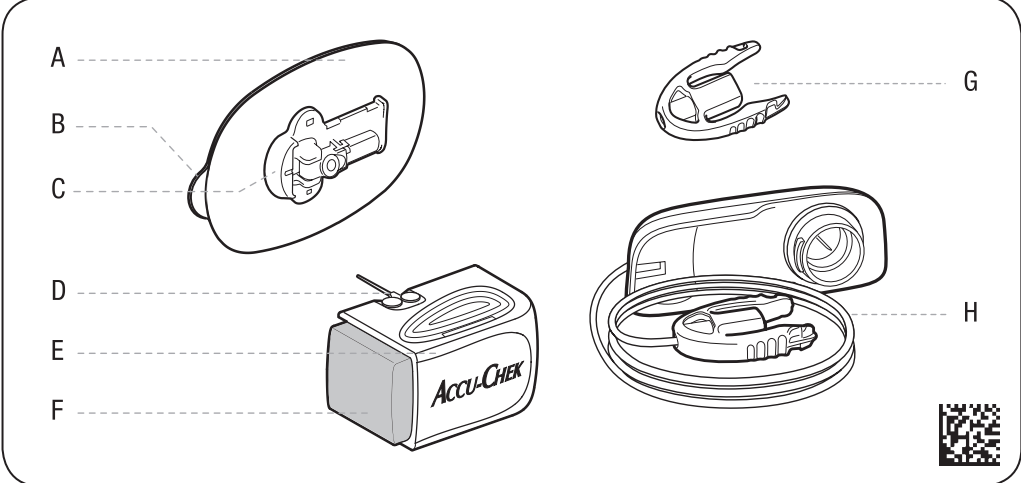

Dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex

Le dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex est destiné à la perfusion sous-cutanée d'insuline à l'aide d'une pompe à insuline Accu-Chek Insight.

Le dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex se compose du dispositif cutané (A–G) et du module de connexion (H).

- Contenu de l'emballage 1 (avec module de connexion) :
- Dispositif cutané (A–G)
 - Module de connexion (H)

- Contenu de l'emballage 2 (sans module de connexion) :
- Dispositif cutané (A–G)

A Embase auto-adhésive	Canule			
B Film protecteur	Longueur: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Système de connexion	Volume de purge 0,7 µl	0,7 µl	0,7 µl	
D Aiguille-guide	(env.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Boîte à aiguille				
F Bouton				
G Capuchon de déconnexion				
H Module de connexion	Longueur: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Volume de purge 9 µl	13 µl	17 µl	
	(env.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* Insuline U100

- Avant de sortir le dispositif de perfusion de son emballage, lavez-vous les mains soigneusement. Choisissez le site de perfusion et désinfectez-le en respectant les consignes de votre professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi.
- Retirez le film bleu présent sur le haut (A) pour apercevoir le film blanc. Retirez ensuite le film bleu (B).
- Appuyez sur le bouton jusqu'à la butée. L'aiguille-guide avec la canule souple sort (déclat).
- Insérez le dispositif de perfusion, selon un angle de 90°. Choisissez un site de perfusion à distance de la taille, d'un relief osseux, d'une cicatrice, du nombril et d'un site de perfusion récent. Changez régulièrement le site de perfusion.
- Appliquez l'embase auto-adhésive sur le site de perfusion en appuyant fermement afin de garantir un bon contact avec la peau.
- Retirez la boîte à aiguille à l'aide de l'aiguille-guide selon un angle droit, tout en laissant l'embase auto-adhésive et le système de connexion sur votre peau. L'aiguille-guide revient automatiquement dans la boîte à aiguille (déclat).
- Fixez le module de connexion à la pompe à insuline et purgez-la selon les instructions fournies avec la pompe à insuline. Assurez-vous qu'il est complètement purgé et exempt de bulles d'air.
- Raccordez le module de connexion purgé au système de connexion. Avant de reprendre le traitement par pompe à insuline, purgez le dispositif cutané et la canule souple de 0,7 U d'insuline.

Pour déconnecter le module de connexion, appuyez sur les clips latéraux et retirez-le. Veillez à ce que le système de connexion reste propre. Si nécessaire, lavez le capuchon de déconnexion.

Attention

- Si vous utilisez le dispositif de perfusion pour la première fois, votre professionnel de santé ou l'équipe médicale chargée de votre suivi doivent être présents.
- Protégez le produit d'une humidité excessive, des rayons du soleil et de la chaleur et conservez-le à température ambiante.
- Contrôlez votre glycémie à fois par jour au minimum et au moins une fois 1 à 3 heures après l'insertion d'un nouveau dispositif de perfusion.
- N'utilisez jamais ce produit pour un médicament autre que l'insuline.
- N'utilisez pas ce produit si son emballage thermoforme est déjà ouvert ou endommagé.
- Si une inflammation se manifeste au site de perfusion, remplacez votre dispositif de perfusion en choisissant un autre site.
- Remplacez le dispositif cutané tous les 3 jours au minimum et le module de connexion tous les 6 jours au minimum, ou selon les consignes de votre professionnel de santé ou de l'équipe médicale chargée de votre suivi. Consultez également le manuel d'utilisation de la pompe à insuline.

Conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex

O conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex destina-se à infusão subcutânea de insulina com um Sistema de Infusão Contínua de Insulina Accu-Chek Insight.

O conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex é composto pelo conjunto de cânula (A–G) e pelo cateter (H).

- Conteúdo da embalagem 1 (com cateter):
- Conjunto de cânula (A–G)
 - Cateter (H)

- Conteúdo da embalagem 2 (sem cateter):
- Conjunto de cânula (A–G)

A Adesivo	Canúla			
B Revestimento do adesivo	Comprimento: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Sistema de conexão	Quantidade de preenchimento 0,7 µl	0,7 µl	0,7 µl	
D Agulha-guia	(aprox.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Caixa da agulha				
F Botão				
G Tampa de desconexão				
H Cateter (tubo)	Comprimento: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Quantidade de preenchimento 9 µl	13 µl	17 µl	
	(aprox.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* Insulina U100

- Antes de retirar o conjunto de infusão da embalagem, lave bem suas mãos. Escolha e desinfete o local de infusão conforme instruído por seu médico ou equipe de profissionais de saúde.
- Verifique regularmente se seu conjunto de infusão está bem fixo e se a pele para evitar uma administração acidental insuficiente de insulina.
- Se sua glicemia aumentar inesperadamente, ou se ocorrer uma occlusão, verifique a existência de entupimentos ou vazamentos. Substitua seu conjunto de infusão imediatamente se não tiver certeza de que o conjunto está funcionando corretamente.
- Nunca preencha o cateter antes de tentar desentupir um cateter enquanto o conjunto de infusão estiver conectado ao seu corpo, pois poderá ocorrer uma infusão inesperada de insulina.
- Fique atento ao cateter do conjunto de infusão conectado ao seu corpo. Há perigo de enforcamento se o cateter se enrolar em seu pescoço. Em caso de dúvida, use o menor comprimento de cateter, a fim de minimizar o risco de enforcamento.
- Pressione o adesivo com firmeza sobre o local de infusão, certificando-se de que fique totalmente em contato com a pele.
- Retire a caixa da agulha com a agulha-guia em um ângulo reto, deixando o adesivo e o sistema de conexão colocados sobre a pele. A agulha-guia retrai automaticamente para dentro da caixa da agulha.
- Conecte o cateter ao SICI e preencha-o de acordo com as instruções fornecidas com o SICI. Certifique-se de que esteja totalmente preenchido e sem bolhas de ar.
- Conecte o cateter preenchido ao sistema de conexão. Antes de retomar a terapia com o SICI, preencha o conjunto de cânula e a cânula flexível com 0,7 U de insulina.

Para desconectar o cateter, aperte os cliques laterais do conector e retire-o. Mantenha o sistema de conexão limpo. Coloque a tampa de desconexão quando for necessário.

Advertência

- Se estiver usando o conjunto de infusão pela primeira vez, o profissional de saúde ou profissionais de saúde tem de estar presente.
- Proteja o produto da umidade do ar, da luz do sol e do calor excessivos. Armazene em temperatura ambiente.
- Verifique sua glicemia pelo menos 4 vezes por dia e pelo menos uma vez, 1 a 3 horas após inserir um novo conjunto de infusão.
- Não use este produto com qualquer medicamento que não seja insulina.
- Não use este produto se a embalagem já estiver aberta ou se estiver danificada.
- Se o local de infusão inflamar, coloque um novo conjunto de infusão em outro local.
- Substitua o conjunto de cânula pelo menos de 3 em 3 dias e o cateter pelo menos de 6 em 6 dias, ou conforme instruído por seu médico ou equipe de profissionais de saúde. Consulte também as instruções de uso do SICI.
- Elimine seu conjunto de infusão de acordo com a legislação local. Não reutilize para evitar que ocorram infeções e uma administração insuficiente de insulina.

Set d'infusione Accu-Chek Insight Flex

Il set d'infusione Accu-Chek Insight Flex è un dispositivo per la somministrazione sottocutanea di insulina con un microinfusore per insulina Accu-Chek Insight.

Il set d'infusione Accu-Chek Insight Flex è costituito dall'agocannula (A–G) e dal catetere (H).

- Contenuto della confezione 1 (con catetere):
- Agocannula (A–G)
 - Catetere (H)

- Contenuto della confezione 2 (senza catetere):
- Agocannula (A–G)

A Autoadesivo	Canula			
B Pellicola copriadesivo	Lengthezza: 6 mm	8 mm	10 mm	
C Base del connettore	Capacità 0,7 µl	0,7 µl	0,7 µl	
D Agnula guida	(ca.): 7 µl	7 µl	7 µl	
E Contenitore dell'ago				
F Pulsante				
G Connettore di riserva				
H Catetere	Lengthezza: 40 cm	70 cm	100 cm	
	Capacità 9 µl	13 µl	17 µl	
	(ca.): 90 µl	130 µl	170 µl	

* Insulina U100

- Lavare le mani accuratamente prima di aprire la confezione del set d'infusione. Scegliere e disinfettare il sito d'infusione come indicato dal medico curante o dal team diabetologico.
- Rimuovere prima la pellicola bianca (A), che copre quella blu. Poi rimuovere la pellicola blu (B).
- Premere il pulsante fino all'arresto. L'ago guida con la canula morbida fuoriesce.
- Inserire il set d'infusione perpendicolarmente a 90°. Scegliere un sito d'infusione lontano dal giro vita, dalle ossa, da eventuali cicatrici, dall'ombelico e da siti d'infusione recenti. Cambiare periodicamente il sito d'infusione.
- Premerne fermamente l'autoadesivo sul sito d'infusione, verificando che sia perfettamente a contatto con la cute.
- Rimuovere il contenitore dell'ago con l'ago guida tenendolo perpendicolarmente alla base e lasciando l'autoadesivo e la base del connettore in posizione sulla cute. L'ago guida si ritrae automaticamente nel contenitore dell'ago.
- Collegare il catetere al microinfusore per insulina e riempirlo seguendo le istruzioni fornite insieme al microinfusore per insulina. Assicurarsi che sia completamente pieno e privo di bolle d'aria.
- Collegare il catetere riempito alla base del connettore. Prima di riprendere la terapia insulinica con microinfusore, riempire la canula morbida con 0,7 U d'insulina.

Per scollegare il catetere, premere le clip laterali del connettore e estrarlo. Tenere pulita la base del connettore. Inserire il connettore di riserva, se necessario.

Avvertenze

- In caso di primo utilizzo del set d'infusione è necessario che sia presente il medico curante o il team diabetologico.
- Proteggere il prodotto da umidità, luce solare e calore eccessivi. Conservare a temperatura ambiente.
- Controllare il livello glicemico almeno 4 volte al giorno e almeno una volta entro 1-3 ore dall'inserimento di un nuovo set d'infusione.
- Non

